

## DOSSIER DE REHAUSSEMENT UNIDIRECTIONNEL

RÉFÉRENCE  
SIIM376



Le dossier de rehaussement unidirectionnel ONE-WAY® est conçu pour maintenir le patient en position semi-couchée. Son utilisation est recommandée pour les activités de veille comme par exemple le repas ou encore la lecture.

Ce dossier glisse à sens unique, mais agit en deux temps.

Lors de l'installation, ONE-WAY® coulisse avec la personne vers la tête de lit, puis l'empêche de glisser vers le pied du lit.

Ainsi le maintien en position semi-couchée est facilité, l'affaissement est évité ■


### LES **+** PRODUIT

Le revêtement aéré permet **un confort optimal pour le patient.**

Agît comme un **frein antichute en limitant la glisse passive.**

**Discret** grâce à sa couleur et sa taille.

Convient à **tous les poids** et tous les supports.

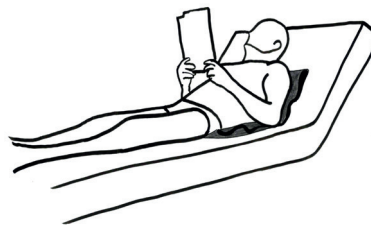

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ


YouTube

### OPTION

Housse imperméable pour dossier ONE-WAY®  
Référence SIIM3710



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

[CONTACT@ALTERECOSANTE.NET](mailto:CONTACT@ALTERECOSANTE.NET) / [WWW.ALTERECOSANTE.NET](http://WWW.ALTERECOSANTE.NET)

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

## FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	ONE-WAY®
DESCRIPTION COURTE :	DOSSIER DE REHAUSSEMENT UNIDIRECTIONNEL
RÉFÉRENCE :	SIIM37G
DATE DE MISE À JOUR :	23/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012145201
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	500 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Indiqué pour les sujets présentant des difficultés de rehaussement en position semi-couchée et sujet à un affaissement au lit. Lors de l'installation sur la partie haute du lit, la flèche doit être visible et en direction de la tête de lit. Placer le dossier ONE-WAY® de manière à ce qu'une fois le rehaussement effectué, le patient se trouve en position semi-couchée confortable.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage – désinfection et de comptabilité tissus » mis au point par la société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. Le procédé de lavage suivant doit être utilisé : – Lavage à 80° en machine. Séchage à 60° maximum. – Lavage à la main, trempage et essuyage. – Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Nylon contre laqué 160° avec enduction polyuréthane et velours, polyester, mesh antidérapant en polyéthylène.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant le dossier de rehaussement unidirectionnel ONE-WAY® et sa fiche technique.
COULEUR :	Gris.
DIMENSIONS :	80 x 60 cm.