

L862 L865 - L872 L110 L871



F	1.	Guide utilisateur
GB	2.	User's manual
D	3.	Gebrauchsanweisung
E	4.	Manual del usuario
I	5.	Manuale dell'utente
NL	6.	Gebruiksaanwijzing
P	7.	Guia do utilizador
S	8.	Bruksanvisning
DK	9.	Brugsanvisning
FIN	10.	Käyttäjän käsikirja
N	11.	Bruksanvisning



I. FRANCAIS

Vous venez d'acquérir un produit INVACARE®. Nos produits sont conçus et fabriqués suivant les normes de qualité et de sécurité les plus sévères et sont conformes aux directives européennes (MDD 93/42/EEC). Ils sont garantis un an. Toutefois, certains produits disposent d'une garantie plus importante ; consulter votre revendeur.

Il est impératif de respecter les consignes d'utilisation et d'entretien suivantes :

- Vérifier que le produit vous est livré en parfait état avant toute utilisation.
- En cas de doutes concernant les restrictions d'utilisation, le réglage ou la maintenance du produit, contacter votre revendeur.
- Ne pas dépasser le poids maximum utilisateur  ou le poids de charge maximum  indiqué sur l'étiquette du produit.
- Toujours veiller à ce que le produit soit adapté à vos besoins. En cas de doute, consulter un professionnel de la santé.
- Les pièces usées, endommagées ou manquantes devront être immédiatement remplacées par un réparateur agréé.
- Ne pas laisser ou stocker le produit à l'extérieur.
- Vérifier périodiquement la stabilité et la rigidité du produit et, le cas échéant, le serrage correct des vis et l'état des embouts caoutchouc.

BARRIERE DE LIT PLIANTE L862

Montage

Remarque : la partie supérieure du tube carré (montant du sommier) sur laquelle sera fixée la barrière de lit devra être au minimum à 43 cm du sol. En position basse, la barrière sera ainsi à 12 cm du sol sans risque de blessure du pied de l'utilisateur.

- Fixer la barrière de lit sur le tube carré (35x35 à 40x40 mm) latéral du lit, la forme triangulaire de la barrière dirigée vers la tête de lit et positionnée à 25 cm minimum de celle-ci. L'espace entre le pied de lit et l'autre extrémité de la barrière de lit sera au maximum de 6 cm.
- Pour éviter tout risque de blessure de la main, vérifier qu'en position basse, la distance entre la poignée du tube supérieur et le sommier est égale ou supérieure à 25 mm.

Si ces distances ne sont pas respectées, le lit n'est pas compatible avec la barrière de lit. Dans ce cas, ne pas utiliser le produit et contacter votre revendeur.

Utilisation

- Pour escamoter la barrière, saisir d'une main la poignée et, de l'autre, tirer sur le système de verrouillage (bouton rouge). La barrière se plie en décrivant un arc de cercle vers la tête de lit.
- Attention : il est impératif d'effectuer cette manœuvre en prenant garde de ne pas coincer un membre du patient. Le patient ne doit pas tenter de manœuvrer la barrière de lit par lui-même lorsqu'il est allité.
- Pour remonter la barrière de lit, procéder à l'inverse jusqu'à l'enclenchement du système de verrouillage.
- S'assurer que la barrière est correctement verrouillée avant de lâcher la poignée.

TABLE DE LIT L865

- Fixer les 2 pieds avec roulettes sous la base du « L » avec 2 vis à têtes hexagonales et insérer la molette sur la partie supérieure du « L ».

- Glisser la partie carrée du support plateau dans la partie verticale du « L » ; l'axe de plateau doit être situé au-dessus de la base à roulettes.
- Dévisser la molette de l'axe de plateau et glisser cet axe dans le logement situé sous le plateau.
- Serrer la molette d'axe de plateau à l'inclinaison souhaitée, régler la hauteur du plateau et serrer la molette.

TABLE DE LIT L872

Attention : le système de réglage en hauteur est mu par un ressort. Suivre scrupuleusement les instructions de ce paragraphe dans l'ordre indiqué pour monter votre table.

Fixation du montant vertical sur la base à roulettes

- Insérer les 2 grandes vis sur la plaque à 2 trous, puis enfiler les 2 petits cylindres. Positionner cet ensemble sous la base à roulettes et le visser sur le montant vertical ; l'axe de plateau doit être situé au-dessus de la base à roulettes.

Fixation du plateau

- Glisser le plateau sur son support et le maintenir à l'aide des 2 vis 8x15.

Montage du système de réglage

- Insérer le levier noir, partie bombée vers le dessus, dans la partie horizontale sous le plateau et le bloquer (vis d'axe 5x50 mm et écrou).
- Desserrer avec précaution la petite vis noire située au-dessus de l'étiquette rouge et la remplacer par la petite vis grise fournie avec la table. Ne jamais démonter la vis recouverte par l'étiquette rouge.
- Retirer le film protecteur du plateau.

Utilisation

- Pour remonter le plateau, le tirer vers le haut.
- Pour abaisser le plateau, actionner le levier noir.

RELEVÉ-BUSTE L110

Régler l'inclinaison et vérifier le blocage effectif du relève-buste.

ARCEAU DE LIT L871

Positionner l'arceau de lit au-dessus du patient. Disposer les couvertures sur l'arceau.

ENTRETIEN

Utiliser un chiffon doux humidifié pour nettoyer poussière et saleté. Utiliser de l'eau savonneuse pour nettoyer les salissures plus importantes. Sécher avec un chiffon doux. Pour la désinfection en milieu hospitalier, suivre les recommandations du spécialiste de l'hygiène.



POIDS MAXIMUM UTILISATEUR - POIDS DE CHARGE MAXIMUM

Voir tableau en fin de document.

2. ENGLISH

You have just purchased an INVACARE® product. Our products are designed and manufactured to the most rigorous quality and safety standards and conform to the European directives (MDD 93/42/EEC). They are guaranteed for one year. Certain products may have a longer guarantee; please check with your dealer.

The following operating and maintenance instructions must be observed:

- Check that the product has been delivered in perfect condition before you use it.
- If you have any doubts about the restrictions on use, the adjustment or maintenance of the product, please contact your dealer.
- Do not exceed the maximum operating load  or the maximum load  shown on the product label.
- Always ensure that the product is suitable for your requirements; in case of doubt, check with a health professional.
- Worn, damaged or missing components must be replaced immediately by an approved repairer.
- Do not leave or store the product out of doors.
- Periodically check the stability and rigidity of the product and, where applicable, that the screws are correctly tightened and the rubber end caps in good condition.

L862 FLEXIBLE BED BARRIER

Installation

NB: the upper part of the square tube (bedpost) to which the bed barrier is fixed should be at least 43cm from the floor. At its lowest position therefore, the barrier will be 12cm from the floor and not cause any potential damage to the user's feet.

- Fix the barrier onto the square tube (35x35 to 40x40 mm) along the length of the bed with the point of the triangle pointing towards the head of the bed and at least 25cm from it. The space between the foot of the bed and the other end of the barrier should be 6cm at most.
- To avoid any risk of damage to hands, check that the distance between the handle on the upper tube and the bed base is at least 25mm with the barrier in the lowest position.

If these distances cannot be maintained, the barrier is incompatible with the bed and should not be used. In this event, please contact your dealer.

Use

- To retract the barrier, grip the handle with one hand and pull on the locking system (the red knob) with the other. The barrier folds by curving towards the bedhead.
- Warning: take care not to trap a patient's limb when carrying out this manoeuvre. The patient should not attempt to operate the barrier himself while still in bed.
- To re-instate the barrier, follow the above procedure in reverse up to engaging the locking system.
- Ensure that the barrier is properly locked before releasing the handle.

L865 BED TABLE

- Fix the 2 feet on castors under the base of the "L" using 2 hex screws and insert the adjusting screw into the upper section of the "L".
- Slide the square part of the tray support into the vertical section of the "L"; the tray pivot should sit above the castor base.
- Unscrew the tray pivot adjusting screw and slide the pivot into position below the tray.
- Adjust the tray to the desired inclination and tighten the tray pivot adjusting screw; set the height of the tray and tighten the main adjusting screw.

L872 BED TABLE

Warning: the height adjustment system is controlled by a spring. Follow the instructions in this paragraph carefully, in the order indicated, when fitting the table.

Fixing the upright on the castor base

- Insert the two large screws in the two-hole plate, and then insert the two small cylinders. Place the whole assembly on the castor base and screw it onto the upright; the tray pivot should sit above the castor base.

Fixing the tray

- Slide the tray onto its support and fix it using two 8x15 screws.

Fitting the adjustment system

- Insert the black lever, with the rounded section uppermost, into the horizontal section and lock it in place (using a 5x50mm bolt and nut).
- Carefully unscrew the small black screw above the red label and replace it with the small grey screw supplied with the table. Never remove the screw covered by the red label.
- Remove the protective film from the tray.

Use

- To raise the tray, pull it upwards.
- To lower the tray, press the black lever.

L110 SHOULDER SUPPORT

Adjust the inclination and check that the shoulder support is properly locked.

L871 BED CRADLE

Position the cradle above the patient. Arrange the covers over the cradle.

MAINTENANCE

Remove any dirt or dust using a soft, damp cloth. Use soap and water to remove stubborn stains. Dry with a soft cloth. For disinfection in hospital environments, please follow the hygiene specialist's recommendations.


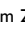
USER'S MAXIMUM WEIGHT - MAXIMUM LOAD

Please see the table at the end of this document.

3. DEUTSCH

Sie haben ein INVACARE® Produkt gekauft. Unsere Produkte werden nach strengsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt und entsprechen den europäischen Richtlinien (MDD 93/42/EWG). Sie haben ein Jahr Garantie. Für bestimmte Produkte wird jedoch eine längere Garantie gewährt; fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

Folgende Gebrauchs- und Pflegeanweisungen müssen unbedingt eingehalten werden:

- Prüfen Sie vor jeden Gebrauch, ob sich das Produkt in einwandfreiem Zustand befindet.
- In Zweifelsfällen bezüglich Gebrauchseinschränkungen, Einstellungen oder Pflege des Produkts fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.
- Das auf dem Produktetikett angegebene Höchstgewicht für Benutzer  bzw. die angegebene Höchstlast  dürfen nicht überschritten werden.
- Achten Sie immer darauf, daß das Produkt Ihren Bedürfnissen entspricht. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte einen Arzt, Therapeuten oder Ihren Fachhändler.
- Verschlossene, beschädigte bzw. fehlende Teile müssen sofort durch Ihren Fachhändler ersetzt werden.
- Das Produkt niemals im Freien abstellen bzw. lagern.
- Regelmäßig die Stabilität und die Festigkeit des Produktes und gegebenenfalls den festen Sitz der Schrauben und den Zustand der Gummikappen überprüfen.

FALTBARES BETTGITTER L862

Installation

Hinweis: das Oberteil des Vierkanthrohrs (Holm des Bettrosts), an dem das Bettgitter befestigt werden soll, muß mindestens 43 cm über dem Boden liegen. Auf diese Weise ist das Gitter in seiner unteren Position 12 cm vom Boden entfernt und birgt keine Verletzungsgefahr für die Füße des Benutzers.

- Das Bettgitter auf dem seitlichen Vierkantholm (35x35 bis 40x40 mm) des Bettrosts befestigen, wobei die dreieckige Form des Gitters zum Kopfende zeigen und dazu einen Abstand von mindestens 25 cm einhalten muß. Der Abstand zwischen dem Fußende und dem anderen Gitterende darf höchstens 6 cm betragen.
- Um Verletzung der Hände zu vermeiden, vergewissern Sie sich davon, daß in der unteren Position der Abstand zwischen dem Griff des oberen Rohrs und dem Bettrost mindestens 25 mm beträgt.

Falls diese Abstände nicht eingehalten werden, ist das Bett nicht mit dem Bettgitter kompatibel. In diesem Fall darf das Produkt nicht verwendet werden. Nehmen Sie bitte mit Ihrem Fachhändler Kontakt aufzunehmen.

Gebrauch

- Zum Versenken des Gitters, mit einer Hand den Griff fassen und mit der anderen am Riegelsystem (roter Knopf) ziehen. Das Gitter klappt um und beschreibt einen Kreisbogen zum Kopfende.
- Vorsicht: beim Ausführen dieser Funktion darauf achten, daß keine Gliedmaßen des Patienten eingeklemmt werden. Der Patient sollte nicht versuchen das Bettgitter vom Bett aus zu bedienen.
- Zum Anheben des Bettgitters in umgekehrter Weise verfahren, bis das Verriegelungssystem einrastet.
- Sich vor dem Loslassen des Griffs davon überzeugen, daß das Gitter richtig verriegelt ist.

BETT-TISCH L865

- Die beiden Füße, die mit jeweils zwei Rädern versehen sind, mit 2 Schrauben mit Sechskantkopf unter der Basis des L-Stücks befestigen und die Rändelschraube in den oberen Teil des L-Stücks einführen.
- Den viereckigen Teil der Tablethalterung in den senkrechten Teil des L-Stücks schieben, wobei die Tablettachse über der mit Rädern versehenen Basis liegen muß.
- Die Rändelschraube von der Tablettachse lösen und diese Achse in die Aussparung unter dem Tablett einführen.
- Die Rändelschraube der Tablettachse in der gewünschten Neigung festdrehen; die Tablettachse einstellen und die Rändelschraube festdrehen.

BETT-TISCH L872

Vorsicht: die Höheneinstellung erfolgt durch eine Feder. Die Anweisungen dieses Abschnitts zum Zusammenbau des Tisches strengstens und in der angegebenen Reihenfolge befolgen.

Befestigung des senkrechten Holms auf der mit Rädern versehenen Basis

- Die beiden großen Schrauben in die Platte mit den 2 Bohrungen einführen, dann die beiden kleinen Röhren darüber schieben. Diese Einheit unter die mit Rädern versehene Basis halten und auf dem senkrechten Holm festschrauben, dabei muß sich die Tablettachse über der Basis befinden.

Befestigung des Tablett

- Das Tablett auf seine Halterung schieben und mit Hilfe der beiden Schrauben 8x15 befestigen.

Installation des Einstellungssystems

- Den schwarzen Hebel mit der gewölbten Seite nach oben in den waagerechten Teil unter dem Tablett einsetzen und blockieren (Schraube von 5x50 mm und Mutter).
- Vorsichtig die kleine schwarze Schraube über dem roten Etikett lösen und durch die kleine graue Schraube ersetzen, die mit dem Tisch mitgeliefert wurde. Niemals die durch das rote Etikett bedeckte Schraube ausbauen.
- Den Schutzfilm des Tablett abziehen.

Gebrauch

- Zum Anheben des Tablett dieses nach oben ziehen.
- Zum Senken des Tablett den schwarzen Hebel betätigen.

RÜCKENSTÜTZE L110

Die Neigung einstellen und das richtige Blockieren der Rückenstütze überprüfen.

BETTBOGEN L871

Den Bettbogen über den Patienten setzen und die Decken über den Bogen legen.

PFLEGE

Die Produkte mit einem feuchten Tuch von Staub und Schmutz befreien. Für hartnäckigen Schmutz eine Seifenlauge verwenden. Mit einem weichen Tuch trocknen. Für die Desinfektion im Krankenhausbereich, befolgen Sie die bitte Empfehlungen des Hygiene-fachmanns.


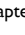
HÖCHSTGEWICHT FÜR BENUTZER - HÖCHSTLAST

Siehe Tabelle am Dokumentenende.

4. ESPAÑOL

Acaba Ud. de adquirir un producto INVACARE®. Nuestros productos han sido diseñados y fabricados de acuerdo con las más estrictas normas de calidad y seguridad y se ajustan a las directivas europeas (MDD 93/42/EEC). Están garantizados por un año. No obstante, algunos productos disponen de una garantía más extensa, consulte con su distribuidor.

Es imprescindible observar las siguientes indicaciones de utilización y mantenimiento:

- Antes de cualquier utilización, compruebe que el producto le haya sido entregado en perfecto estado.
- Póngase en contacto con el vendedor si tiene dudas respecto a las limitaciones de uso, al ajuste o al mantenimiento del producto.
- No exceda el peso máximo de usuario  o el peso máximo de carga  indicado en la etiqueta del producto.
- Procure siempre que el producto se adapte a sus necesidades. En caso de duda, consulte con un profesional de la salud.
- Haga sustituir inmediatamente las piezas gastadas, dañadas o que falten.
- No deje o almacene el producto en el exterior.
- Compruebe periódicamente la estabilidad y rigidez del producto, y en su caso el correcto ajuste de los tornillos y el estado de las conteras de goma.

BARANDILLA DE CAMA PLEGABLE L862

Montaje

Observación: la parte superior del tubo cuadrado (montante del somier) sobre la que se fijará la barandilla de cama deberá estar a 43 cm del suelo como mínimo. De este modo, en posición baja, la barandilla se encuentra a 12 cm del suelo, sin riesgo de que lesione el pie del usuario.

- Fije la barandilla de cama en el tubo cuadrado (35x35 a 40x40 mm) lateral de la cama, con la forma triangular de la barandilla dirigida hacia la cabecera de la cama y situada a 25 cm como mínimo de la misma. El espacio entre los pies de la cama y el otro extremo de la barandilla será de 6 cm como máximo.
- Para evitar cualquier riesgo de lesiones en la mano, compruebe que, estando la barandilla en posición baja, la distancia entre la empuñadura del tubo superior y el somier sea igual o superior a 25 mm.

Si no pueden respetarse estas distancias, la cama no es compatible con la barandilla. En este caso no utilice el producto y póngase en contacto con su distribuidor.

Utilización

- Para esconder la barandilla, coja con una mano la empuñadura y con la otra tire del sistema de bloqueo (botón rojo). La barandilla se dobla describiendo un arco de círculo en dirección a la cabecera de la cama.
- Atención: es imprescindible efectuar esta maniobra cuidando de no aprisionar un miembro del paciente. El paciente no deberá intentar maniobrar él mismo la barandilla mientras esté en la cama.
- Para volver a subir la barandilla, proceda a la inversa hasta enclavar el sistema de bloqueo.
- Asegúrese de que la barandilla esté correctamente bloqueada antes de soltar la empuñadura.

MESA DE CAMA L865

- Fije los 2 pies con ruedas debajo de la base de la « L » con 2 tornillos de cabeza hexagonal e inserte el botón moleteado en la parte superior de la « L ».
- Deslice la parte cuadrada del soporte de la bandeja en la parte vertical de la « L »; el eje de la bandeja debe estar situado por encima de la base de ruedas.
- Desenrosque el botón moleteado del eje de la bandeja y deslice este eje en el alojamiento situado bajo la misma.
- Apriete el botón moleteado del eje de la bandeja con la inclinación deseada; ajuste la altura de la bandeja y apriete el botón moleteado.

MESA DE CAMA L872

Atención: El sistema de ajuste de la altura se desplaza por medio de un resorte. Para montar la mesa siga cuidadosamente las instrucciones de este párrafo en el orden indicado.

Fijación del montante vertical sobre la base de ruedas

- Inserte los 2 grandes tornillos en la placa de 2 agujeros; a continuación inserte los 2 cilindros pequeños. Coloque este conjunto bajo la base de ruedas y atornillelo sobre el montante vertical; el eje de la bandeja debe estar situado encima de la base de ruedas.

Fijación de la bandeja

- Deslice la bandeja sobre su soporte y sujétela con ayuda de los 2 tornillos de 8x15.

Montaje del sistema de ajuste

- Inserte la palanca negra, con la parte bombada hacia arriba, en la parte horizontal de debajo de la bandeja y bloquéela (tornillo de eje 5x50 mm y tuerca).
- Afloje con cuidado el pequeño tornillo negro situado encima de la etiqueta roja y sustitúyalo por el pequeño tornillo gris suministrado con la mesa. No desmonte nunca el tornillo recubierto por la etiqueta roja.
- Retire la película protectora de la bandeja.

Utilización

- Para subir la bandeja, tire de ella hacia arriba.
- Para bajar la bandeja, accione la palanca negra.

INCORPORADOR DE ESPALDA L110

Ajuste la inclinación y compruebe que el incorporador quede perfectamente bloqueado.

ARCO DE CAMA L871

Coloque el arco de cama encima del paciente. Disponga la ropa de cama sobre el arco.

CONSERVACIÓN

Utilice un paño suave humedecido para limpiar el polvo y la suciedad. Utilice agua jabonosa para la suciedad más resistente. Seque con un paño suave. Para desinfección en medio hospitalario, siga las recomendaciones del especialista en higiene.


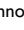
PESO MÁXIMO USUARIO - PESO MÁXIMO DE CARGA

Consulte la tabla al final del documento.

5. ITALIANO

Complimenti per l'acquisto di un prodotto INVACARE®. I nostri prodotti sono progettati e fabbricati secondo le norme di qualità e di sicurezza più severe e sono conformi alle direttive europee (MDD 93/42/EEC). Sono garantiti un anno. Certi prodotti dispongono di una garanzia più importante; consultare il vostro rivenditore.

E' di primaria importanza rispettare le istruzioni per l'uso e manutenzione seguenti:

- Verificare che il prodotto vi è stato consegnato in perfetto stato prima di qualsiasi utilizzazione.
- In caso di dubbio riguardante le restrizioni di utilizzazione, la regolazione o la manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore.
- Non superare il peso massimo utilizzatore  o il peso di carico massimo  indicato sull'etichetta del prodotto.
- Fare sempre attenzione che il prodotto sia adatto ai vostri bisogni. In caso di dubbio, consultare un medico.
- I pezzi usati, danneggiati o mancanti dovranno essere immediatamente sostituiti da un tecnico autorizzato.
- Non lasciare o conservare il prodotto all'esterno.
- Verificare periodicamente la stabilità e la rigidità del prodotto e se necessario il corretto serraggio delle viti nonché lo stato dei puntali in gomma.

BARRIERA DA LETTO PIEGHEVOLE L862

Montaggio

Nota: la parte superiore del tubo quadrato (montante della rete) sul quale sarà fissata la barriera del letto dovrà essere a minimo 43 cm dal pavimento. In posizione bassa, la barriera sarà a 12 cm dal pavimento per evitare rischi di ferite per il piede dell'utilizzatore.

- Fissare la barriera da letto sul tubo quadrato (da 35x35 a 40x40 mm) laterale del letto, la forma triangolare della barriera diretta verso la testa del letto è posizionata a 25 cm minimo da quest'ultima. Lo spazio tra il piede del letto e l'altra estremità della barriera del letto sarà al massimo di 6 cm.
- Per evitare qualsiasi rischio di ferita alla mano, verificare che in posizione bassa, la distanza tra il manico del tubo superiore e la rete sia uguale o superiore a 25 mm.

Se queste distanze non sono rispettate, il letto non è compatibile con la barriera da letto. In questo caso non utilizzare il prodotto e contattare il vostro rivenditore.

Utilizzazione

- Per ribaltare la barriera, afferrare con una mano il manico, e con l'altra, tirare sul sistema di bloccaggio (pulsante rosso). La barriera si piega descrivendo un arco di cerchio verso la testa del letto.
- Attenzione: è importante effettuare questa manovra facendo attenzione a non intrappolare un membro del paziente. Il paziente non deve tentare di manovrare la barriera da solo quando è a letto.
- Per rialzare la barriera del letto, procedere al contrario fino all'inserimento del sistema di bloccaggio.
- Assicurarsi che la barriera sia correttamente bloccata prima di lasciare il manico.

TAVOLINO DA LETTO L865

- Fissare i 2 piedi con rotelle sotto la base del ferro a « L » con 2 viti a testa esagonale ed inserire la moletta sulla parte superiore del « L ».
- Fare scivolare la parte quadrata del supporto nella parte verticale del « L »; l'asse del vassoio deve essere situato al di sopra della base a rotelle.
- Svitare la moletta dell'asse del vassoio e fare scivolare quest'asse nella sede situata sotto il vassoio.
- Stringere la moletta dell'asse del vassoio in corrispondenza dell'inclinazione desiderata, regolare l'altezza del vassoio e stringere la moletta.

TAVOLINO DA LETTO L872

Attenzione: il sistema di regolazione in altezza è mosso da una molla. Per montare il tavolino seguire scrupolosamente le istruzioni di questo paragrafo nell'ordine indicato.

Fissaggio del montante verticale sulla base a ruote

- Inserire le 2 grandi viti sulla placca a 2 fori, poi infilare i 2 piccoli cilindri. Posizionare questo insieme sotto la base a rotelle ed avvitare sul montante verticale; l'asse del vassoio deve essere situato al di sopra della base a rotelle.

Fissaggio del vassoio

- Fare scivolare il vassoio sul suo supporto e mantenerlo con l'ausilio delle 2 viti 8x15.

Montaggio del sistema di regolazione

- Inserire la leva nera, con la parte bombata verso l'alto, nella parte orizzontale sotto il vassoio e bloccarlo (vite dell'asse 5x50 mm e dado).
- Allentare con precauzione la piccola vite nera situata al di sopra dell'etichetta rossa e sostituirla con la piccola vite grigia fornita con la tavola. Non smontare mai la vite ricoperta dall'etichetta rossa.
- Ritirare la pellicola protettrice dal vassoio.

Utilizzazione

- Per rialzare il vassoio, tirarlo verso l'alto.
- Per abbassare il vassoio, azionare la leva nera.

RIALZA-BUSTO L110

Regolare l'inclinazione e verificare il bloccaggio effettivo del rialza-busto.

ARCHETTO DA LETTO L871

Posizionare l'archetto da letto al di sopra del paziente. Dispone le coperte sull'archetto.

PULITURA



Utilizzare un panno morbido umido per pulire polvere e sporco. Utilizzare dell'acqua con sapone per pulire lo sporco più importante. Asciugare con un panno morbido. Per la disinfezione in ambiente ospedaliero, seguire le raccomandazioni dello specialista dell'igiene.

PESO MASSIMO UTILIZZATORE - PESO MASSIMO DI CARICO

Vedere tabella alla fine del documento.

6. NEDERLANDS

U heeft zojuist een product INVACARE® gekocht. Onze producten worden ontworpen en gefabriceerd volgens de strengste kwaliteit- en veiligheidsnormen en voldoen aan de Europese richtlijnen (MDD 93/42/EEC). Zij hebben een garantie van één jaar. Voor sommige producten geldt een langere garantie: raadpleeg uw leverancier. **U moet zich aan de volgende regels betreffende gebruik en onderhoud houden:**

- U controleert dat het product u in perfecte staat geleverd is, voor u het gaat gebruiken.
- Als u twijfelt over de gebruiksbepalingen, de instelling of het onderhoud van het product, neemt u contact op met uw leverancier.
- U moet zich houden aan het maximumgewicht gebruiker  of het maximum laadgewicht  dat op het etiket van het product staat.
- U moet er altijd voor zorgen dat het product is aangepast aan uw behoeften. Als u twijfelt, neemt u contact op met een deskundige.
- U moet versleten, beschadigde of ontbrekende onderdelen onmiddellijk laten vervangen door een erkende reparateur.
- U mag het product niet buiten laten of opslaan.
- U moet regelmatig controleren dat het product nog stabiel en stevig is, dat de eventuele schroeven goed aangedraaid zijn en dat de plastic dopjes in goede staat verkeren.

OPKLAPBAAR BEDHEK L862

Montage

Opmerking: het bovenste gedeelte van de vierkanten buis (stijl van de springbox) waarop het bedhek bevestigd wordt moet zich op minstens 43 cm van de grond bevinden. In de laagste stand, bevindt het bedhek zich dan op 12 cm van de grond, zodat u er niet tegenaan kunt stoten met uw voeten.

- Bevestig het bedhek op de buitenste vierkanten buis (35x35 tot 40x40 mm) van het bed. De driehoekige vorm van het bedhek moet naar het hoofd van het bed wijzen en zich op minstens 25 cm van het hoofd van het bed bevinden. De ruimte tussen de voet van het bed en het andere uiteinde van het bedhek is dan maximaal 6 cm.
- Om te voorkomen dat u uw handen verwondt, controleert u dat in de laagste stand de afstand tussen het handvat van de bovenste buis en de springbox 25 mm of meer bedraagt.

Als deze afstanden niet gerespecteerd worden, is het bed niet geschikt voor het bedhek. In dat geval, gebruikt u het product niet en neemt u contact op met uw wederverkoper.

Gebruik

- Om het bedhek te draaien, pakt u met één hand het handvat vast en trekt u met de andere aan het vergrendelsysteem (rode knop). De barrière klappt in de vorm van een cirkelboog naar het hoofd van het bed.
- Let op: als u deze manoeuvre uitvoert, moet er ervoor oppassen de ledematen van de patiënt niet te beklemmen. De patiënt moet niet proberen het bedhek zelf te manoeuvreren als hij in bed ligt.
- Om het bedhek weer weg te halen, gaat u omgekeerd te werk, tot het vergrendelsysteem weer vastzit.
- Controleer dat het bedhek goed vergrendeld is voor u het handvat loslaat.

BEDTAFEL L865

- Bevestig de 2 poten met wieltjes met 2 zeskantige schroeven onder de basis van de "L" en schuif het kartelwielje op het bovenste gedeelte van de "L".
- Schuif het vierkanten gedeelte van de bladsteun in het verticale gedeelte van de "L". De as van het plateau moet zich boven de basis met wieltjes bevinden.
- Het kartelwielje van de as van het blad losschroeven en deze as in de uitsparing onder het blad schuiven.
- Het kartelwielje van de as van het blad op de gewenste schuine zetten. De hoogte van het blad instellen en vastdraaien.

BEDTAFEL L872

Let op: het systeem van de hoogteinstelling werkt met een veer. Volg zorgvuldig de instructies van deze paragraaf in de aangegeven volgorde om uw tafel te monteren.

Bevestiging van de verticale stijl op de basis met wieltjes

- Schuif de 2 grote schroeven in de plaat met 2 gaten, en plaats de 2 cilindertjes erop. Plaats dit geheel onder de basis met wieltjes en schroef het op de verticale stijl. De as van het plateau moet zich boven de basis met wieltjes bevinden.

Bevestiging van het plateau

- Schuif het blad op de steun en zet het vast met de 2 schroeven 8x15.

Montage van het instelsysteem

- Schuif de zwarte hendel, met het ronde gedeelte naar boven, in het horizontale gedeelte onder het blad en blokkeer het (as schroeven 5x50 mm en moer).
- De kleine zwarte schroef boven het rode etiket voorzichtig losdraaien en vervangen door de kleine grijze schroef die met de tafel wordt geleverd. De schroef onder het rode etiket nooit demonteren.
- De beschermende folie van het plateau verwijderen.

Gebruik

- Om het blad naar boven te halen trekt u het naar boven.
- Om het blad te laten zakken, drukt u op de zwarte hendel.

RUGSTEUN L110

Stel de hoek in en controleer dat de bustesteun geblokkeerd is.

DEKENBOOG L871

Plaats de dekenboog boven de patiënt. Leg de dekens op de boog.

Hvis disse avstandene ikke overholdes, vil ikke sengen stemme overens med sengehesten. I dette tilfellet skal produktet ikke brukes og du må kontakte forhandler.

Bruk

- For å slå sammen sengehesten grip håndtaket med en hånd og dra i låsesystemet med den andre (rød knapp). Sengehesten foldes ved å utføre en sirkelbue mot hodegjerdet.
- Forsiktig: Det er absolutt nødvendig å passe på at man ikke klemmer en av pasientens lemmer når man utfører denne manøveren. Pasienten skal ikke prøve å håndtere sengehesten selv når han ligger i sengen.
- For å heve sengehesten igjen gå fram på motsatt vis helt til låsesystemet kobles inn.
- Kontroller at sengehesten er riktig låst før du slipper håndtaket.

SENGBORD L865

- Fest de 2 føttene med hjul under underlaget på « L'en » med 2 sekskantskruer og sett inn rullen på den øvre delen av « L'en ».
- La den firkantete delen av brettstøtten gli inn i den vertikale delen av « L'en ». Brettaksen skal befinne seg over hjulunderlaget.
- Skru løs rullen fra brettaksen og la denne aksen gli inn i åpningen plassert under brettet.
- Stram til rullen på brettaksen i ønsket helling, juster brett høyden og stram til rullen.

SENGBORD L872

Forsiktig: Høydejusterings-systemet beveges ved hjelp av en fjær. Instruksjonene i dette avsnittet må følges nøyaktig i angitt rekkefølge for å montere bordet.

Festing av den vertikale stolpen på hjulunderlaget

- Sett inn de 2 store skruene på platen med 2 hull, tre deretter på de 2 små sylindrene. Plasser denne enheten på hjulunderlaget og skru den på den vertikale stolpen. Brettaksen skal være plassert over hjulunderlaget.

Festing av brettet

- La brettet gli inn i dets underlag og hold det fast med 2 skruer på 8x15.

Montering av justeringssystemet

- Sett inn den sorte spaken, med den hvelvede siden vendt oppover, i den horisontale delen under brettet og blokker det (akseskruer på 5x50 mm og mutter).
- Løsne med forsiktighet den lille sorte skruen som befinner seg over den røde etiketten og skift den ut med den lille grå skruen som leveres sammen med bordet. Skruen som er dekket av en rød etikett skal aldri demonteres.
- Fjern beskyttelsesfilmen på brettet.

Bruk

- For å heve brettet dra det oppover.
- For å senke brettet beveg den sorte spaken.

HJERTEBRETT L110

Juster skrången og kontroller at hjertebrettet er skikkelig blokkert.

SENGBUE L871



Plasser sengebuen over pasienten og legg teppene til rette på buen.

VEDLIKEHOLD

Bruk en myk fuktet klut til fjerning av støv og skitt. Bruk såpevann til fjerning av større flekker. Tørk med en myk klut. Ved desinfisering i sykehus, følg prosedyrene i hygieneforskriftene.

BRUKERENS MAKSIMUMSVEKT - MAKSIMUMSLASTVEKT

Se tabell til slutt i dokumentet.

	 (kg)	 (kg)
L110	110	-
L862	100	-
L865 - L872	-	10
L871	-	25

INVACARE INTERNATIONAL

Les Roches
F - 37230 Fondettes