

# DOOPY

Support roulant pour selle (TIPS TR 73 Z01)

DOOPY a été conçu pour recevoir une selle moulée.

Son but est de maintenir les hanches en abduction et permettre une meilleure utilisation des possibilités musculaires du tronc et de ce fait éveiller une correction posturale (liberté des membres inférieurs, autonomie lors du déplacement).

DOOPY existe en deux versions pour selle de type posture ou pour selle de type proprioceptive.



## Réglages

- Réglage en hauteur de selle de 350 à 675mm (DOOPY) de 250 à 400 (DOOPY PM)
- Réglage de l'inclinaison de 20° à -30° (ou de 30° à -20°)
- Réglage de l'empattement en largeur 600 / 800, en profondeur 350 / 600

Réglages du segment condylien  
en hauteur 250 / 600  
en largeur 250 / 500



## Caractéristiques techniques

- Mobilité et blocage de l'ensemble par roues pivotantes à freins Ø75
- Réglages manuels efficaces de la hauteur et de l'inclinaison
- Démontable
- Finition Epoxy


Pour selle de type proprioceptive...



## Dimensions

- Empattement : 675 / 800
- Inclinaison : 20 / -30 (ou 30° / -20°)
- Poids : 8kg

ou de type posture

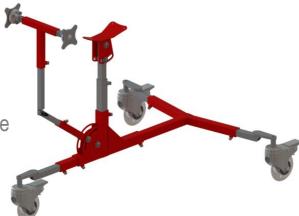

## **Fixations**

**DOOPY A** : 4 points pour la selle, 3 points pour les rotules  
**DOOPY A / A4** : 4 points pour la selle


## **Applications**

- selle de posture ou proprioceptive
  - usage intérieur

## Tailles

- patient + selle : maxi 40 kg (DOOPY)  
maxi 20 kg (DOOPY PM)

## ***Couleurs***

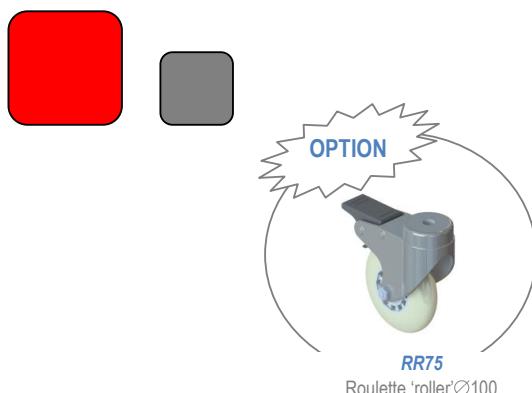

## Références commandes :

		avec flasques	Option roulette 'roller' Ø100
-DOOPY	Support roulant (maxi 40kg) pour selle de posture	FL	RR100
-DOOPY S	Support roulant (maxi 40kg) avec support tablette	FL	RR100
-DOOPY PM	Support roulant (maxi 20kg) pour selle de posture	FL	RR100
-DOOPY A	Support roulant (maxi 40kg) pour selle proprioceptive	FL	RR100
-DOOPY A PM	Support roulant (maxi 20kg) pour selle proprioceptive	FL	RR100
-DOOPY 4	DOOPY – avec 4 roulettes	FL	RR100
-DOOPY 4 PM	DOOPY PM – avec 4 roulettes	FL	RR100
-DOOPY A4	DOOPY A – avec 4 roulettes	FL	RR100
-DOOPY A4 PM	DOOPY A PM – avec 4 roulettes	FL	RR100

TEL : (33) 03 29 39 54 90 | FAX : (33) 03 29 39 54 91  
technologie.ravel@orange.fr