

Baignoires Calypso® et Vivendo®

Soins, Confort et Bien-Être

Les baignoires à hauteur variable **Calypso®** et **Vivendo®** s'adaptent de façon optimale aux exigences des traitements en apportant confort et facilité des soins.

Elles répondent aux critères d'hygiène et de sécurité des Centres hospitaliers, des établissements de soins et d'hébergement.

Leur position basse permet un accès facile au bain pour les patients éprouvant des difficultés de mobilité, ainsi que l'utilisation aisée d'un lève-personnes, d'un élévateur en version siège ou brancard.



Nouvelle
Génération

Calypso®

- **Durabilité exceptionnelle**
- **Cuve acrylique** d'une longévité remarquable garantie 10 ans*
- **Hauteur variable** assurée par une technologie avancée et éprouvée
- **Accès facile et sécurisé** pour le patient grâce à la faible hauteur
- **L'espace libre sous tous les modèles** permet l'emploi d'un lève-personnes
- **Télécommande pneumatique** de montée/descente
- **Dimensions réduites** de la baignoire Vivendo

La baignoire **Calypso**® est disponible en 2 versions avec de nombreuses options. La version standard est posée au sol à l'aide de 2 supports d'appui. Dans le cas où l'ancrage au sol est possible, cette version facilite le nettoyage au sol. Ces choix fonctionnels permettent l'utilisation facile et sans contrainte des lève-personnes.

La baignoire **Vivendo**® est un modèle peu encombrant dont la forme intérieure est identique au modèle **Calypso**®. Elle est parfaitement adaptée aux petites salles de bain.



Baignoire **Vivendo**® en position haute

La forme anatomique confortable de la coque permet l'immersion complète du patient. Le positionnement fonctionnel des poignées et du cale-pieds réglable assure un appui et évite l'effet de glisse.

La résistance aux chocs évite les éclats par contact éventuel avec un lève-personnes. Le nettoyage et la désinfection en sont fortement améliorés.



Baignoire **Vivendo**® avec décor en bambou

Les cuves de toutes nos baignoires sont réalisées en acrylique thermoformé, renforcé par une couche de polyester et un châssis métallique traité anti-corrosion.

La surface homogène et sans pores de la coque en acrylique évite le dépôt des impuretés. Le patient bénéficie d'une meilleure tenue et d'une sécurité accrue grâce aux poignées ergonomiques.

Le tapis de baignoire antidérapant, non hygiénique, n'est plus nécessaire.

Le repose tête gonflable et le mitigeur thermostatique de remplissage 48 l/min sont fournis en standard avec les deux baignoires.



Baignoire **Vivendo**® en utilisation de soin avec un élévateur en version brancard.

Equipements optionnels

- Bain bouillonnant avec jet de massage pour la baignoire **Calypso**®
- Module bien-être
- Système de désinfection
- Cale-pieds
- Douchette de dosage pour bain d'huile
- Remplissage automatique
- Vidange gros diamètre
- Descente d'urgence
- Appareil à ultrasons
- Élévateur siège ou brancard.

Module bien-être

Disponible pour les baignoires **Calypso®** et **Vivendo®**, le bain peut devenir un véritable festival des sens d'une grande intensité

Massage par ondes sonores

Plongez dans le monde du son de la musique classique de relaxation et de détente.

La baignoire sert de haut-parleur et transmet les ondes sonores uniformes de haute qualité à l'eau.

Le son est remarquablement clair, la musique et les vibrations enveloppantes sont perçues par l'oreille et le corps selon l'intensité choisie par le réglage du volume.

Chromothérapie

La lumière d'ambiance accompagne le son et les senteurs magiques.



L'eau reflète les couleurs de l'arc-en-ciel par une illumination subaquatique, non scintillante et pure des lumières.

Ces lumières de couleur apportent une régénération et une revitalisation du corps et de l'esprit.

Les bons sentiments du printemps nous démontrent l'importance de la lumière et de ses effets.

Grâce à tous ces éléments: lumière d'ambiance, ondes sonores et massage, le corps et l'esprit sont libérés des contraintes produisant un effet positif sur l'âme.

La détente et la motricité de la personne seront remarquablement optimisées.

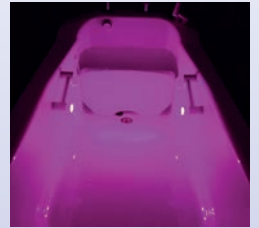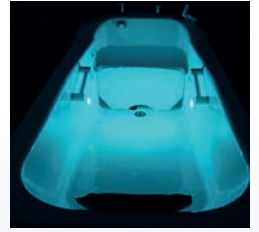

Plusieurs variantes de couleurs sont disponibles afin de pouvoir intégrer la baignoire dans l'environnement de l'établissement.

Option de la baignoire Calypso®



Dispositif de bain bouillonnant avec massage par jet

Ce dispositif est composé d'une buse de tourbillon, réglable et orientable.

Le volume d'air du tourbillon est réglable grâce à une buse d'air.

Le coffret de commande permet de gérer le fonctionnement du système.

Le branchement d'un flexible avec jet de massage est possible sur la buse.

Son utilisation est un acte médical qui doit être pratiqué par du personnel soignant habilité.

Dispositif optionnel de désinfection pour la baignoire Vivendo®

Ce module externe comprend une douchette à bouton-poussoir avec un tuyau rouge et un dispositif de dosage.

Le bidon de produit désinfectant se positionne dans le support prévu à cet effet.

Le système de désinfection de la baignoire **Calypso®** est intégré dans le pupitre.



Équipements

Repose-tête gonflable
assure un meilleur confort
pour le patient.



Télécommande pneumatique
Son support magnétique
facilite les manipulations
et la prise en main.

Les poignées latérales
permettent plus de sureté
dans les mouvements.



Sécurité anti-glisse
Le cale-pieds en option assure
un appui et évite l'effet de glisse.



Huiles essentielles et aromathérapie

Le dispositif de diffusion d'huiles essentielles parfumées est disponible en option sur la douchette. Le procédé de tourbillonnement, par la buse **Venturi**, permet de disperser l'huile dans l'eau sous forme de fines gouttelettes.

Les effets thérapeutiques sur la peau et les senteurs sont ainsi optimisés.



Remplissage

Grâce aux formes douces et arrondies de la coque, l'eau se déverse par le bec de remplissage en cascade silencieuse et rapide sans éclaboussures.

L'option de remplissage avec arrêt automatique

permet un gain de temps important et évite les pertes d'eau.



Robinetterie

Toutes nos robinetteries sont chromées.

Le mitigeur thermostatique dispose de 3 positions : remplissage, douchette et arrêt. Il est fourni en standard sur les deux baignoires avec sécurité anti-brûlure.

Caractéristiques techniques

La cuve et le pupitre sont moulés dans une seule pièce en acrylique thermoformé, renforcé par une couche de polyester et un châssis métallique traité anti-corrosion.

Ceci évite les jonctions et les assemblages dans lesquels se déposent les impuretés.

L'entraînement électromécanique breveté permet un levage synchronisé et un mouvement régulier quel que soit le poids

du patient et son positionnement dans la cuve.

Le mouvement d'élévation est réalisé par un système électrique éprouvé d'entraînement et de guidage par arbre. Cette solution technique minimise et simplifie l'entretien.

Le raccordement d'arrivée d'eau au sol est conseillé. En cas de difficulté, un raccordement mural est possible. Le raccordement de la vidange doit obligatoirement être positionné au sol.

	Calypso®	Vivendo®
Dimensions hors tout	213 x 83 x 77-117 cm	192 x 83 x 77-117 cm
Hauteur plat bord de la baignoire	65 à 105 cm	65 à 105 cm
Dimensions interne de la cuve	163 x 65 x 44 cm	163 x 65 x 44 cm
Hauteur de passage sous baignoire	15 cm	15 cm
Contenance	200 litres	200 litres
Poids à vide	220 kg	170 kg
Vérin électrique de monté/descente	7000 N	7000 N
Débit du mitigeur	48 l/min	48 l/min
Diamètre de l'évacuation	50 mm mural / 70 mm sol	50 mm mural / 70 mm sol
Installation	Posé ou fixé au sol	Posé au sol
Hauteur de passage sous la baignoire	12,5 cm	12,5 cm
Puissance de sortie de l'amplificateur	2x75-100 W, 4 Ohms	2x75-100 W, 4 Ohms

***Cuve garantie 10 ans contre les fissures**

praxis
medical technologies

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES

107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France

Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39

e-mail : info@praxismedical.com - http://www.praxismedical.com

CACHET DISTRIBUTEUR