



## DISQUE DE TRANSFERT PIVOTANT RIGIDE


RÉFÉRENCE  
SI21310

**D**ISKEKO® est un disque de transfert pivotant rigide. Grâce à ses deux disques en plastique antidérapant, DISKEKO® permet d'accompagner facilement un patient lors d'un transfert entre deux plans par rotation sur le disque.

Ce disque rigide peut être posé sur tous types de sols plats et également en zone humide ■

### LES PRODUIT

Peut être utilisé pour un **transfert assisté**.  
Facilement transportable grâce à sa poignée.  
Faible épaisseur.

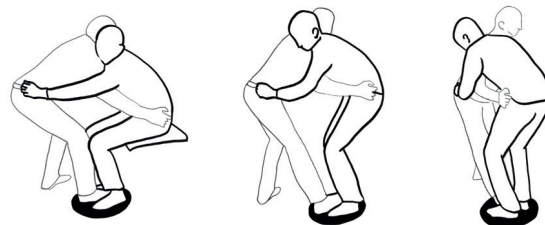

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

### OPTIONS

#### OLIVIA




Peut être associé à une sangle de transfert OLIVIA® par exemple et au coussin anti abduction/adduction MOUSTACHE®.

#### MOUSTACHE



VOTRE CONSEILLER



#### ALTER ECO SANTE


7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

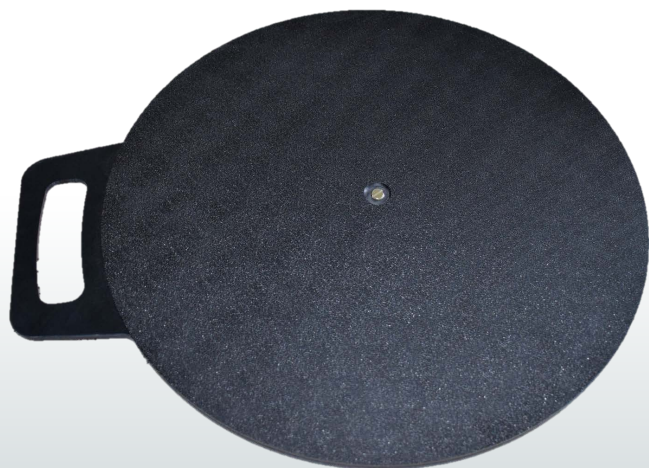

PRODUIT :	DISKEKO®
DESCRIPTION COURTE :	DISQUE DE TRANSFERT PIVOTANT RIGIDE
RÉFÉRENCE :	SI21310
DATE DE MISE À JOUR :	02/07/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311371028
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	1,30 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux plans de transfert, d'un sujet présentant une incapacité de piétinements.</p> <p>Peut être aussi utilisé pour un transfert actif si l'usage de ce produit est adapté au patient.</p> <p>S'utilise sur tous les types de sols plats.</p> <p>En zone humide, vérifier l'adhérence au sol.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b></p> <p><b>Ne jamais séparer les deux faces du disque.</b></p> <p><b>Après utilisation, le disque de transfert DISKEKO® ne doit pas rester sur le sol.</b></p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p><b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p><b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>ABS, Acier zingué, polyéthylène.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 carton contenant le disque de transfert pivotant rigide DISKEKO® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Noir.</p>
DIMENSIONS :	<p>Diamètre 38 cm.</p> <p>Épaisseur 1,1 cm.</p>