

# DISPOSITIFS D'AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE EN MICRO-BILLES



Les coussins de positionnement ASKLÉSANTÉ permettent la mise en place simple et rapide de différentes postures contribuant à réduire la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à risque d'escarre.

- **Performance** : multiplicité des solutions aux besoins cliniques et au confort des personnes soignées.
- **Efficacité** : prévention par décharge des zones anatomiques vulnérables et maintien durable des postures réalisées.
- **Ergonomie** : conformabilité aux régions anatomiques exposées, légèreté des accessoires et simplicité d'installation.
- **Sécurité** : protection en Promust PU Haute Densité avec coutures renforcées par festonnage intérieur surpiqué.



# LES CALES DE POSITIONNEMENT



## PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRE AU NIVEAU DE LA RÉGION TROCHANTÉRIENNE

Escarres peu fréquentes mais dangereuses apparaissant principalement chez les patients alités en décubitus latéral strict. Les experts recommandent la position en décubitus semi latéral à 30°.

### • La solution ASKLÉ SANTÉ : le coussin de positionnement latéral 30°

- + 2 tailles pour une adaptation optimale à la taille des personnes
- + Un oreiller intégré pour le confort de l'utilisateur
- + Une installation facile, sans effort et rapide du patient
- + Un maintien stable et durable



## PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DES COUDES ET DES TALONS

Escarres rares pour les coudes, elles sont fréquentes aux talons, principalement chez les patients alités. Les experts recommandent la mise en décharge totale des coudes et des talons en décubitus dorsal.

### • La solution ASKLÉ SANTÉ : des plots de positionnement au niveau de la jambe et de l'avant bras

- + L'inclinaison sensible est favorable au retour veineux
- + La bordure régulière du dispositif est non traumatique
- + Pas de surpression au niveau du tendon d'Achille et des malléoles
- + Soulagement de la pression d'appui au niveau des coudes



## PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DES MALLÉOLES ET DES GENOUX

Escarres à fréquence élevée chez les patients présentant des rétractions musculotendineuses des membres inférieurs. Les experts recommandent l'abduction des membres inférieurs pour la décharge des malléoles, des condyles et des genoux. décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

### • La solution ASKLÉ SANTÉ : le coussin cylindrique associé au plot d'abduction des genoux

- + Maintien des membres inférieurs en abduction
- + Réduction de l'appui exercé au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes
- + Protection des points de contact des genoux

## PRÉVENIR LA CONSTITUTION D'ESCARRES AU NIVEAU DE LA RÉGION DU SACRUM, DES ISCHIIONS ET DES TALONS

Escarres sacrées apparaissant chez les patients assis en position affaissée vers l'avant, ou chez des patients alités en position semi-assise inadaptée. Escarres ischiatiques fréquentes chez les patients assis. C'est l'escarre la plus fréquente chez le paraplégique. Les experts recommandent une position dite de type Semi Fowler pour décharger les zones sacrées, ischiatiques et talonnières.

### • La solution ASKLÉ SANTÉ :

#### **l'association de 4 coussins adaptés**

- + Réduction du « glissé avant » responsable du cisaillement des tissus
- + Limite le risque de chute
- + Alternative aux utilisations de lits non médicalisés
- + Soulagement de la pression d'appui au niveau des coudes



## UNE AIDE À LA PRÉVENTION DES POSITIONS VICIEUSES DES HANCHES ET GENOUX

### LA FLEXION DES GENOUX SEULE

#### • La solution ASKLÉ SANTÉ : le coussin cylindrique placé sous les genoux

- + Réduit le creux lombaire
- + Soulage les douleurs d'origine facettaires

### LE MAINTIEN STABLE DES HANCHES EN POSITION D'ABDUCTION

#### • La solution ASKLÉ SANTÉ : le coussin d'abduction de hanche


- + Est indiqué en phase post opératoire de prothèse de hanche
- + Limite le risque de luxation d'une Prothèse Totale de Hanche lors des retournements des patients



## UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

### • Les coussins universel T1 et T2

- + S'adaptent à toutes les situations de soins (utilisés seuls ou en association)
- + Se substituent à l'usage dérivé des oreillers dans le respect de la prévention du risque de contaminations croisées
- + Facilitent l'installation ou les retournements lors des actes de soins
- + Présentent un encombrement réduit pour un rangement facilité

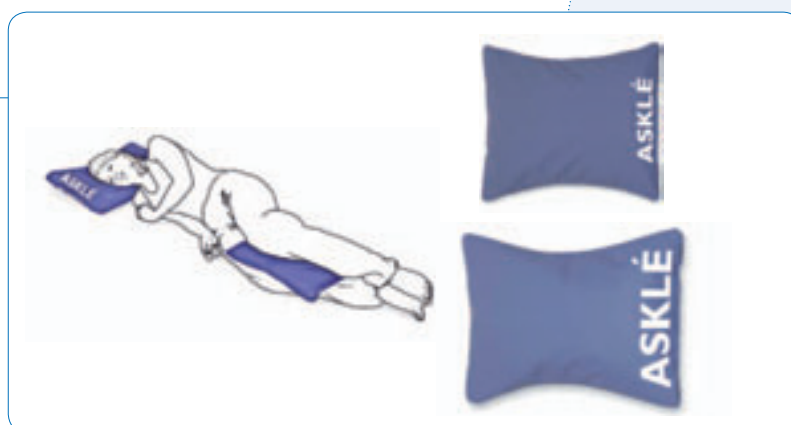



## HOUSSE DE PROTECTION LAVABLE POUR ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

- Une housse pour chaque coussin de la gamme (voir références au dos)
- Rabat\* de protection de la fermeture permettant d'éviter les infiltrations.
- Etiquette de traçabilité avec conditions d'entretien et composition à l'intérieur des housses

\* (sauf pour réf. VHOCP05 et VHOCP06)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DÉSIGNATION	RÉF.	POIDS	DIMENSIONS	HOUSSES
	<b>Coussin Plot d'abduction des genoux</b>	VCP01	0,36	680 x 515	VHOCP01
	<b>Coussin Universel 1</b>	VCP02	0,23	410 x 310	VHOCP02
	<b>Coussin Universel 2</b>	VCP03	0,58	640 x 440	VHOCP03
	<b>Coussin Cylindrique</b>	VCP04	0,64	Ø 210 x 60	VHOCP04
	<b>Coussin Plot de Positionnement Pied</b>	VCP05	0,23	412 x 228	VHOCP05
	<b>Coussin Plot de Positionnement Main</b>	VCP06	0,23	412 x 228	VHOCP06
	<b>Coussin d'abduction des Hanches</b>	VCP07	0,43	342 x 300	VHOCP07
	<b>Coussin de Positionnement latéral 30°</b>	VCP08 T>165 CM	2,20	1940 x 666	VHOCP08
		VCP11 T<165 CM	2,00	1830 x 666	VHOCP11
	<b>Coussin de Positionnement</b>	VCP09	1,9	1590 x 790	VHOCP09
	<b>Sac de Transport</b>	VCP10	0,65	800 x 900	X

## ENTRETIEN

- **COUSSIN**  
Entretien au moyen d'une lavette imprégnée d'une solution détergente ou de détergent-désinfectant de surface marqué CE.



- **HOUSSE**



## MATÉRIAUX

- **COUSSIN**  
Protection Promust PU HD  
Microbilles Polystyrène Expansé (PSE) dont 99 % du volume se compose d'air  
Coutures Fil de polyester bactériostatique
- **HOUSSE**  
Protection Promust PU HD

## NORME FEU

- **COUSSIN**  
EN 597- 1 et 2 Protection PU HD Crib V
- **HOUSSE**  
EN 597- 1 et 2 Crib V

Garantie 1 an



ASKLÉSANTÉ Groupe Winnocare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail : contact@askle.com

[www.askle.com](http://www.askle.com)

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, ASKLÉSANTÉ se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.