

Coussins et Dossiers Jay



Gamme coussins Jay

Confort

Prévention Anti-Escarre

Prévention Anti-Escarre & Positionnement

Basic



Easy Fluid



Jay Balance



Soft Combi P



Jay Lite



J3 et J3 Deep Contour



Easy Visco



Xtreme Active



J2 et J2 Deep Contour



Jay Zip



Gamme dossiers Jay

Positionnement

Stabilité et Légèreté

Confort

Confort pour l'enfant

J3



J3 Carbon



Jay Easy



Jay Zip



Sommaire

Confort

Basic	2
Soft Combi P	3
Easy Visco	4
Jay Zip	5

Prévention Anti-Escarre

Easy Fluid	6
Jay Lite	7
Xtreme Active	8

Prévention Anti-Escarre & Positionnement

Jay Balance	10
J3 et J3 Deep Contour	12
J2 et J2 Deep Contour	14

Dossiers

J3	16
J3 Carbon	20
Jay Easy	22
Jay Zip	24

Basic

Caractéristiques:

- Mousse polyuréthane (densité faible)
- Forme de la mousse avec un léger contour, permettant un alignement orthopédique et favorisant la répartition des pressions.
- Tolérance d'assise optimisée
- Housse incontinence de série

Applications Cliniques:

- Faible risque d'escarre
- Faible besoin de maintien
- Le plus: confort




Tailles du coussin JAY® Basic

Prof.	Largeurs											
cm	25	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
25												
30												
35												
40												
42												
44												
46												
50												
56												
60												

Hauteur	
Avant	Arrière
5 cm	5 cm

Poids coussin 40x40 cm	0,7 kg
Poids max. Utilisateur	113 kg
Garantie coussin	2 ans
Garantie housse	6 mois

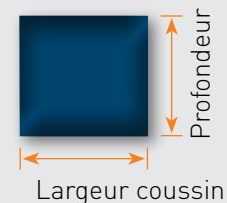

Soft Combi P

Caractéristiques:

- Mousse polyuréthane (densité moyenne)
- Base thermo soudée garantissant un usage sur du long terme
- Base préformée pour un meilleur support des fémurs et assurer ainsi une bonne répartition des pressions
- Base plate (pour utilisation avec une assise rigide)
- Assise rigide en option pour utilisation avec une toile d'assise
- Housse incontinence de série

Applications Cliniques:

- Faible risque d'escarre
- Faible besoin de maintien
- Le plus: stabilité




Tailles du coussin JAY® Soft Combi P

Prof.	Largeurs											
cm	25	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
25												
30												
35												
40												
42												
44												
46												
50												
56												
60												

Hauteur	
Avant	Arrière
6 cm	4,5 cm

Poids coussin 40x40 cm	0.8 kg
Poids max. Utilisateur	150 kg
Garantie coussin	2 ans
Garantie housse	6 mois

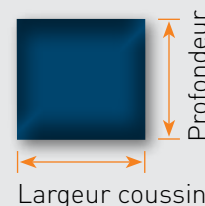

Easy Visco

Caractéristiques:

- Mousse polyuréthane (densité faible)
- Mousse à mémoire de forme (visco élastique) dans la cuvette ischiatique assurant l'immersion des ischions et la répartition des pressions au niveau des fémurs
- Découpe sacrale évitant les pressions excessives sur le sacrum et optimisant ainsi le confort
- Découpes à l'arrière du coussin pour maintenir le coussin en place entre les montants du dossier du fauteuil
- Base incurvée ou plate pour une utilisation avec assise rigide ou toile d'assise
- Housse incontinence de série - aérée en option



Applications Cliniques:

- Risque modéré d'escarre
- Faible besoin de maintien
- Le plus: confort et stabilité




Tailles du coussin JAY® Easy Visco

Prof.	Largeurs											
cm	25	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
25												
30												
35												
40												
42												
44												
46												
50												
56												
60												

Hauteur	
Avant	Arrière
6 cm	6 cm

Poids coussin 40x40 cm	1,06 kg
Poids max. Utilisateur	150 kg
Garantie coussin	2 ans
Garantie housse	6 mois

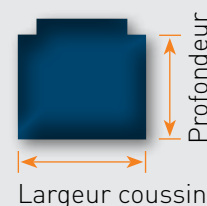

Jay Zip

Caractéristiques:

- Deux couches de mousse de différentes densités
- Base légèrement préformée
- Housse externe douce et aérée 3DX™ favorisant la circulation de l'air et la dissipation de l'humidité. Disponible en noire (de série), rose ou bleue
- Housse interne imperméable avec la technologie Aquaguard™, facile à essuyer



Applications Cliniques:

- Risque modéré d'escarre
- Besoin modéré de positionnement
- Le plus: confort



Housse de couleur en option




Base préformée 2 couches

Tailles du coussin JAY® Zip

Prof.	Largeurs										
cm	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
20											
22											
24											
26											
28											
30											
32											
34											
36											
38											
40											
42											
44											
46											

Hauteur	
Avant	Arrière
6 cm	6 cm

Poids coussin 30x30cm	0.9 kg
Poids max. Utilisateur	75 kg
Garantie coussin	2 ans
Garantie housse	6 mois

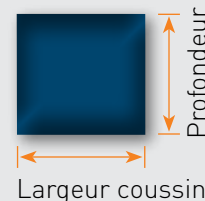

Easy Fluid

Caractéristiques:

- Mousse polyuréthane (densité faible)
- Base préformée
- Poche de fluide dans la cuvette ischiatique pour envelopper les proéminences osseuses et répartir les pressions
- Surface de contact accrue grâce à l'adaptation du fluide Jay et à la mousse préformée avec sa découpe sacrale
- Choix d'une base incurvée (pour fauteuil avec toile d'assise) ou plate (pour fauteuil avec assise rigide)
- Housse incontinence de série, aérée en option

Applications Cliniques:

- Risque modéré d'escarre
- Faible besoin de maintien
- Le plus: confort et stabilité




Tailles du coussin JAY® Easy Fluid

Prof.	Largeurs											
cm	25	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
25												
30												
35												
40												
42												
44												
46												
50												
56												
60												

Hauteur	
Avant	Arrière
6 cm	6 cm

Poids coussin 40x40cm	1,6 kg
Poids max. Utilisateur	150 kg
Garantie coussin	2 ans
Garantie housse	6 mois

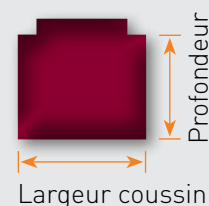

Jay Lite

Caractéristiques:

- Base Airflow en mousse ferme, ultra légère et aérée pour une bonne circulation de l'air
- Couches de mousse de différentes densités (Oletex et EVA) pour offrir confort et fonctionnalité sans compromettre la stabilité
- Cuvette ischiatique dotée d'une mousse réticulée garantissant la répartition des pressions et la stabilité pelvienne
- Découpe sacrale et évidement sous les ischions
- Housse aérée 3DX™ pour optimiser la dissipation de la chaleur et de l'humidité
- Version positionnement (Jay Lite P) optimise l'alignement des fémurs grâce à une butée d'abduction et à deux cales d'adduction

Applications Cliniques:

- Risque faible à modéré d'escarre
- Besoin de maintien modéré
- Le plus: légèreté



Jay Lite Standard



Jay Lite Positionnement




Tailles du coussin JAY® Lite

Prof.	Largeurs									
cm	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
35	■									
38	■	■	■	■	■					
40	■	■	■	■	■	■	■	■		
42	■	■	■	■	■	■	■	■		
44	■	■	■	■	■	■	■	■		
46	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50			■	■	■	■	■	■	■	■
56									■	■
60										■

Hauteur	
Avant	Arrière
8 cm	8 cm

Poids coussin 40x40cm	0,7 kg
Poids max. Utilisateur	113 kg
Garantie coussin	2 ans
Garantie housse	6 mois

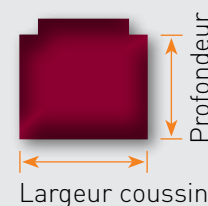

Xtreme Active

Caractéristiques:

- Véritable compromis entre prévention anti-escarre, coussin de faible hauteur et léger
- Deux types de poche de fluide:
 - poche standard (S) pour une prévention anti-escarre modéré mais un poids optimisé. Pour base et cuvette standards.
 - poche large (L): haute prévention anti-escarre. Immersion et répartition des pressions optimales. Pour base et cuvette larges
- Cales de positionnement disponibles: butée d'abduction, cales d'adductions (hauteur: 2.5cm)
- Double housse de série: housse interne imperméable et externe aérée.



Applications Cliniques:

- Risque d'escarre modéré à élevé
- Besoin de positionnement modéré
- Le plus: 6 cm de hauteur en condition réelle d'utilisation



→ Poche de fluide standard
avec base standard

→ Poche de fluide large
avec base cuvette large

Tailles du coussin JAY® Xtreme Active

Prof.	Largeur								
cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
34									
36									
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									

Hauteur	
Avant	Arrière
7 cm 6 cm (en condition)	7 cm 6 cm (en condition)

Poids coussin 40x40cm	1,7 kg
Poids max. Utilisateur	150 kg
Garantie coussin	2 ans
Garantie housse	6 mois



Jay Balance

Caractéristiques:

- Base préformée constituée de deux couches de mousse. La couche inférieure à cellules fermées pour la stabilité et la couche supérieure de mousse souple pour le confort
- Design spécifique de la zone des fémurs et retour arrière de la cuvette aident à prévenir de la migration du fluide
- Insert fluide ou air Roho (mono ou bivalve) au choix pour l'immersion des proéminences osseuses du bassin
- Deux housses: intérieure imperméable et extérieure aérée ou incontinence
- Eléments de positionnement disponibles



Applications Cliniques:

- Risque d'escarre élevé à très élevé
- Besoin en positionnement modéré à élevé
- Le plus: haute prévention escarre, stabilité et confort optimal



Tailles du coussin JAY® Balance

Prof. cm	Largeurs											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60	
34	■											
36	■	■										
38	■	■	■									
40	■	■	■	■								
42	■	■	■	■	■							
44	■	■	■	■	■	■						
46	■	■	■	■	■	■	■					
48	■	■	■	■	■	■	■	■				
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
56	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PLA	A			B					C			

Hauteur	9,5 cm 8,5 cm en condition réelle d'utilisation	<p>Profondeur</p> <p>Largeur coussin</p>
Poids coussin 40x40cm	2,4 kg (avec fluide) 1,9 kg (avec air)	
Poids max. Utilisateur	150 kg (width 34-50cm) 225 kg (width 56-60cm)	
Garantie coussin Garantie housse	2 ans 6 mois	

Jay Balance

Cuvette pelvienne - Technologie du Fluide JAY™ ou de l'Air ROHO™

L'insert positionné dans la cuvette pelvienne est la pièce maitresse du coussin. Il enveloppe les proéminences osseuses du bassin optimisant la répartition des pressions et maintenant l'intégrité de la peau. Deux types au choix: insert fluide JAY ou insert air ROHO.



L'insert fluide JAY ne nécessite aucune maintenance et le design spécifique de la poche garantit des résultats optimums durant tout le cycle de vie du coussin.



Le niveau de l'air de l'insert air ROHO peut s'ajuster pour s'adapter aux bassins asymétriques ou légèrement asymétriques. Deux versions: monovalve: gonflage uniforme - bivalve: gonflage indépendant gauche/droite



Version positionnement

Les cales de positionnement intégrées dans la housse interne, permettent un positionnement correct du bassin et des cuisses. Elles favorisent l'alignement orthopédique optimisant la tolérance d'assise.

Technologie de la double housse

Housse interne: imperméable, facile à essuyer et à nettoyer. Equipée d'une fermeture hermétique Aqua-guard pour une base toujours sèche.

Housse externe: micro-climatique dissipe la chaleur et l'humidité pour une protection supplémentaire de la peau



Jay J3 et J3 Deep Contour

Caractéristiques:

- Mousse polyuréthane préformée ferme
- Technologie Optiwell: taille et forme anatomique de la cuvette ischiatique pour optimiser l'immersion et la stabilité pour prévenir le talonnement des proéminences osseuses sur la base
- Base standard ou profonde (Deep Contour)
- Choix entre la technologie du fluide (standard ou personnalisable) ou de l'air Roho. Immersion des tubérosités ischiatiques jusqu'à 4 cm
- Housse aérée ou incontinence. Couche de mousse intégrée à la housse
- Large gamme d'accessoires de positionnement



Applications Cliniques:

- Risque élevé à très élevé d'escarre
- Besoin de positionnement élevé
- Le plus: correction et/ou compensation d'attitudes vicieuses et déformations



Tailles du coussin JAY® J3

Prof.	Largeur										
cm	30	35	38	40	42	44	46	48	50	56	60
30											
35											
38											
40											
42											
44											
46											
48											
50											
56											
60											

Hauteur max. [standard]	9,5 cm	
Hauteur max. [profond]	11 cm	
Poids coussin 40x40cm	1,9 kg	Profondeur Largeur coussin
Poids max. Utilisateur	150 kg (larg. 30-50cm) 227 kg (larg. 56-60cm)	
Garantie coussin	2 ans	
Garantie housse	6 mois	


Jay J3 et J3 Deep Contour

Base Jay 3. Deux profondeurs - Standard et Profonde

Le profil standard offre répartition de la pression et stabilité latérale pour des Utilisateurs à haut risque d'escarre.




La version profonde (Deep Contour) se caractérise par une immersion maximale pour les Utilisateurs à risque d'escarre très élevé, pouvant présenter une atrophie musculaire sévère et/ou avec l'intégrité de la peau compromise.

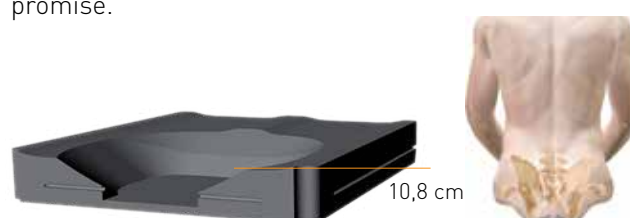


Choix de la Technologie du Fluide ou de l'Air

- Poche de fluide fixe (grise): volume non ajustable ultérieurement - pour bassin symétrique ou légèrement asymétrique
- Poche de fluide à volume variable avec possibilité de varier les niveaux de fluide pour un bassin asymétrique
- Insert Air Roho monovalve: gonflage uniforme des cellules pour bassin symétrique ou légèrement asymétrique
- Insert Air Roho biovalve: gonflage indépendant des cellules gauche/droite pour un bassin asymétrique

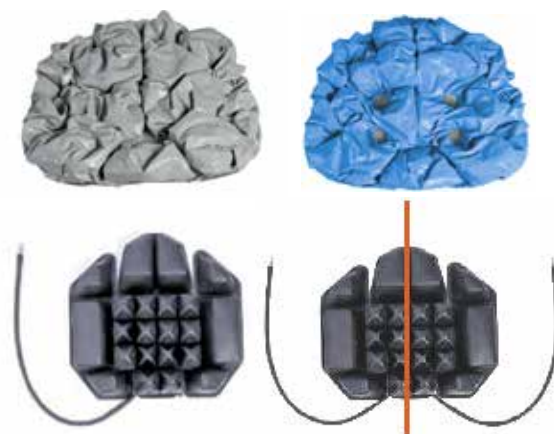

Personnalisation avec cales de positionnement

Avec des éléments de positionnement, le bassin et les cuisses peuvent être correctement positionnés pour répondre à de nombreuses applications cliniques. Par conséquent, le Jay3 favorise l'alignement orthopédique, augmente la tolérance d'assise et s'adapte aux évolutions pathologiques de l'Utilisateur.

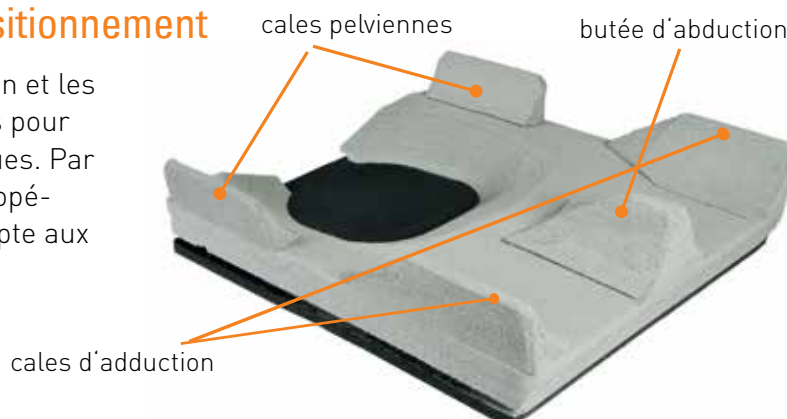

J2 et J2 Deep Contour

Caractéristiques:

- Base ferme à cellules fermées
- Base personnalisable pour s'adapter à des besoins spécifiques
- Poche Jay Fluid Tripad: immersion et enveloppement des proéminences osseuses
- Large gamme d'éléments posturaux
- Housse aérée de série

Applications Cliniques

- Risque élevé d'escarre
- Besoin modéré à élevé de positionnement
- Le plus: correction et/ou compensation de posture asymétrique



J2



Base coussin J2



Poche fluide J2



J2 Deep Contour



Base coussin J2 Deep Contour



Poche fluide J2 Deep Contour

Tailles du coussin JAY® J2


Prof. cm	Largeur					
	36	39	43	46	51	61
41						
43						
46						
51						

Tailles du coussin JAY® J2 Deep Contour

Prof. cm	Largeur							
	36	38	41	43	46	51	56	61
36								
38								
41								
43								
46								
51								

Hauteur (en cm)	
Avant	Arrière
8 (J2)	8 (J2)
10 (J2 DC)	10 (J2 DC)

Poids coussin J2 39x41cm	2 kg
Poids coussin J2 DC 41x41cm	2.4 kg
Poids max. Utilisateur	150 kg
Garantie coussin	2 ans
Garantie housse	6 mois

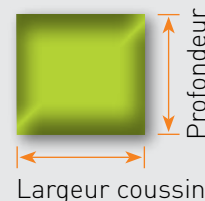



Jay J3

Cinq niveaux d'enveloppement

Peu profond (SC)

Support latéral léger

5 cm

**Moyen (MC)**

Support latéral moyen

8 cm

**Profond (DC)**Support latéral élevé
Support haut

15 cm

**Profond (MDC)**Support latéral élevé
Support moyen

15 cm

**Profond (PDC)**Support latéral élevé
Support bas


15 cm



Jay J3

Quatre niveaux de support

Maintien haut	(SH)	53-61 cm
Thoracique supérieur	(UT)	42-50 cm
Thoracique moyen	(MT)	30-38 cm
Thoracique inférieur	(LT)	17-24 cm

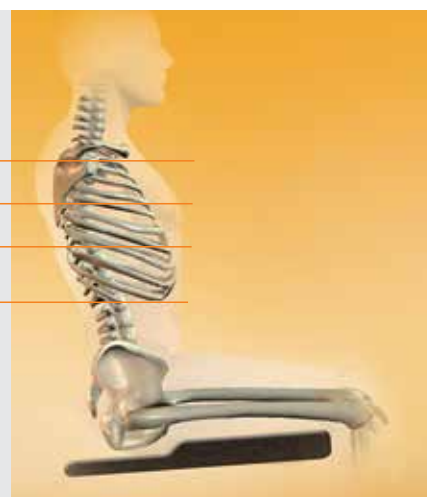

Trois hauteurs de dossier

Deux Utilisateurs peuvent avoir besoin d'un soutien au même endroit sur la colonne vertébrale, mais nécessitent une hauteur différente. C'est pourquoi chaque niveau de support est disponible dans 3 hauteurs.



Short (S)



Medium (M)



Tall (T)

Jay J3

Fixations JAY Mount - multi-compatibilité

■ Multi-compatibilité:

- avec diamètres de tubes de 1.9 cm à 2.5 cm
- mâchoire de fixation en 2 points (de série)



■ Sans compromis:

- Fixations occupant très peu de place, n'affectant en rien la posture de l'Utilisateur et l'emplacement des éléments du fauteuil
- Multi-position sur toute la hauteur du fauteuil



■ Simple d'utilisation:

- Le retrait et l'installation du dossier nécessite très peu de force et de dextérité
- Système à dégagement rapide pour faciliter le transport
- Mécanisme de verrouillage automatique pour plus de sécurité



■ Fixations 4 points:

- Disponibles en option
- Pour dossier thoracique supérieur et maintien haut



Jay J3

Fixations JAY Mount - multi-réglables

- En largeur:
 - jusqu'à 5 cm pour une bonne adéquation avec la morphologie de l'Utilisateur
- En profondeur:
 - Sans perte de profondeur utile sur le fauteuil
 - fixations standards: réglage jusqu'à 5 cm
 - fixations allongées: réglage jusqu'à 8 cm
- En inclinaison:
 - jusqu'à 22° tout en conservant la même profondeur

Fonction fondamentale pour les Utilisateurs avec des déformations posturales et pour optimiser le confort.



Profondeur inchangée

Éléments de positionnement et accessoires

- Éléments de posture à positionner à l'intérieur de la housse du dossier pour corriger ou compenser les postures asymétriques ou optimiser le maintien.
- Malette Spine-Align comprenant plus de 32 composants pour ajuster le dossier à la forme dorsale de l'Utilisateur.
- Appui-tête:
 - 2 supports au choix: standard ou escamotable
 - 2 coussinets au choix: standard ou enveloppant
- Cales-tronc:
 - Supports fixes ou escamotables
 - 6 tailles de coussinets
- Sangles et harnais:
 - Harnais à ouverture centrale
 - Sangle rembourrée



J3 Carbon

J3 Carbon - Le support indispensable pour être actif

Le dossier J3 Carbon combine légèreté, excellente stabilité et confort. Grâce au support du bassin, il permet une stabilisation du tronc et favorise des courbures dorsales optimales. Caractéristique majeure qui renforce la stabilité dont vous avez besoin pour une vie active, tout en réduisant les douleurs dorsales et en garantissant un grand confort.

Légèreté et stabilité

Le carbone est le matériau par excellence, reconnu pour sa légèreté et sa résistance. 60% plus léger qu'un dossier en aluminium (980 gr en largeur 41cm et hauteur de 38cm)

De plus, le J3 Carbon garantit la stabilité du bassin tout en encourageant la liberté des mouvements des membres supérieurs. Ainsi, comme avec tout dossier rigide, la force générée lors de la phase de poussée est transférée plus efficacement vers le châssis du fauteuil, limitant effort et fatigue.



Fauteuil pliant ou rigide, le J3 carbon répond à vos besoins

Le dossier J3 Carbon propose deux types de fixation:

- Système fixe: offrant aux Utilisateurs de fauteuils à cadre rigide une solution légère
- Système à démontage rapide: retrait simple et rapide du dossier, idéal pour les fauteuils pliants.

Quel que soit le choix, les deux systèmes de montage disposent de deux points de fixation facilitant l'installation et offrant les mêmes réglages en profondeur, en largeur, en angle et en hauteur.

Système de fixation à démontage rapide
idéal pour les fauteuils pliants



Système de fixations fixes
la solution la plus légère



J3 Carbon

A chacun son dossier...!

Différents besoins nécessitant une solution adaptée. Les quatre hauteurs de dossier s'adressent aux Utilisateurs actifs avec des besoins de positionnement variant de faibles à modérés.

Des cales lombaires sont fournies de série avec chaque dossier pour encourager l'extension thoracique, la répartition des pressions et le confort.

→ **Différents niveaux de support**
Quatre hauteurs 17, 24, 30 et 38 cm



→ **Galbe peu profond**
Support du tronc modéré avec 5 cm de profondeur

Accessoire de rangement

Pochette de dossier discrète et élégante pour y stocker ses effets personnels. Permet également de combler l'espace entre le coussin et le dossier.



Pochette de dossier

Jay Easy

Dossier rigide, à la fois simple, confortable et efficace, pour que la prévention posturale soit accessible au plus grand nombre.

Système de fixations polyvalent

Deux points de fixation, dossier simple à installer et à régler pour un support et confort optimum.

- Une simple pression sur le cordon pour déverrouiller le système de chaque côté, une légère inclinaison et un mouvement vers le haut pour libérer le dossier.
- Fixations compatibles avec une grande variété de diamètres de tubes: 1,9 - 2,2 – 2,3 cm avec inserts ou 2,5 cm sans inserts
- Réglable en hauteur, largeur, profondeur et en angle avec un seul outil



Housse: technologie innovante

Le dossier JAY EASY est livré de série avec une housse aérée et une couche de mousse intégrée à la housse pour plus de confort et de protection.

- Matière 3DX™ favorisant la ventilation de la chaleur et de l'humidité et augmente la circulation de l'air
- Housse lavable en machine à 60° C et séchage rapide
- Utilisation de cales lombaires pour s'adapter au mieux à la forme dorsale



Jay Easy

Différents niveaux d'enveloppement et de maintien

Le dossier rigide JAY EASY favorise le maintien, l'alignement postural et la stabilité du tronc de l'Utilisateur, grâce à deux types d'enveloppement. L'équilibre de l'Utilisateur et sa tolérance d'assise sont alors améliorés et ses fonctions optimisées.



Trois niveaux de support distincts selon les nécessités fonctionnelles et posturales de l'Utilisateur: thoracique moyen (38 cm), thoracique supérieur (46 cm) et maintien haut (53 cm).



Jay Zip

Le dossier JAY Zip a été conçu en utilisant des données anthropométriques pour que les tailles correspondent spécifiquement aux besoins uniques des Enfants. Dossier ultra-léger et réglable, équipé de housses anti-microbiennes. Un seul geste suffit pour libérer le dossier et recevoir des accessoires répondant aux besoins de l'Enfant.

Dossier polyvalent

- Montage et démontage en une seule étape
- Compatible avec différents diamètres de tubes de dossier: 1,9 cm, 2,2 cm, 2,3 cm avec inserts ou 2,5 cm sans inserts
- Un seul outil pour les réglages (livré avec le dossier)

Légèreté, confort, réglages & positionnement

- A partir de 1kg seulement
- Confort: couche de mousse aérée intégrée à la housse
- Réglages: en inclinaison (+20° à -20°), en largeur (+2.5cm) et en profondeur (+2.5cm)
- Accessoires de positionnement: appui-têtes, cales tronc, cales de positionnement, harnais ..
- Housses lavables en machine: housse externe stretch aérée
housse interne imperméable, facile à essuyer



Démontage en un seul geste

Largeurs de dossier:	20 / 25 / 30 / 35 cm	Inclinaison :	+20° à -20°
Hauteurs de dossier:	15 / 20 / 25 / 30 cm	Réglage en largeur:	+2,5 cm
Enveloppement:	4 types	Réglage en profondeur:	7,5 cm
Poids (à partir de):	1 kg	Poids max. Utilisateur:	75 kg





Knowledge for the future

Sunrise Medical propose des programmes de formation
Positionnement Jay et Whitmyer abordant les thèmes suivants:

- Enjeux et principes fondamentaux du positionnement
- Les différentes anomalies posturales
- Les facteurs de risque favorisant l'apparition d'une escarre
- Solutions Jay:
 - Coussins d'assise: de la théorie à la conception, la gamme de produits
 - Dossiers Jay: avantages du dossier rigide
- Déformations posturales et solutions
- Réflexions autour d'images de nappe de pression



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr