

Catalogue Matrix® et Flo-tech® 2015



Le confort et le bien-être des Patients sont notre priorité

Pour améliorer le confort et le positionnement des patients, retrouvez notre gamme de dossier et de coussins de positionnement **Matrix®** et **Flo-tech®**. Faites découvrir le confort et le maintien que procure le nouveau coussin **Matrix Vi** grâce à sa conception inédite page 12.

Prévention, stabilité, modularité, le nouveau coussin **Matrix Libra** présente de nombreux avantages, retrouvez-les page 6.

Nos dossiers de positionnement sont également disponibles en option montée sur la plupart de nos fauteuils roulants standard et de confort ainsi que sur les fauteuils roulants électriques équipés de l'assise **Modulite™**.

Pour obtenir plus d'informations sur nos produits, consultez notre site internet **www.invacare.fr**.





making life's experiences possible™



matrix®
SEATING SERIES

INVACARE
Yes, you can.®


Invacare® | **Matrix® & Flo-tech®**

Coussins Flo-tech & Matrix	Guide de choix	4
	Caractéristiques techniques	5
	Invacare Matrix Libra 	6
	Invacare Flo-tech Solution Xtra & Xtra box	10
	Invacare Matrix Vi & Kidabra-Vi 	12
	Invacare Flo-tech Image	14
	Invacare Flo-tech Contour Visco	16
Dossiers Matrix	Invacare Matrix	18
	Invacare Matrix MX1	19
	Invacare Matrix Elite	20
	Invacare Matrix Elite Deep	21
	Invacare Matrix Posture Back 	22
	Invacare Matrix Posture Back Deep 	23
	Fixations pour dossiers Invacare Matrix Elite & Posture Back	24
	Accessoires pour dossiers Invacare Matrix	25

Retrouvez encore plus d'informations sur les dossiers **Matrix** et les coussins **Matrix** et **Flo-tech** dans notre tarif public :

- Dimensions disponibles
- Conseils pour le choix de la largeur du dossier
- Compatibilité entre largeur d'assise et largeur de dossier



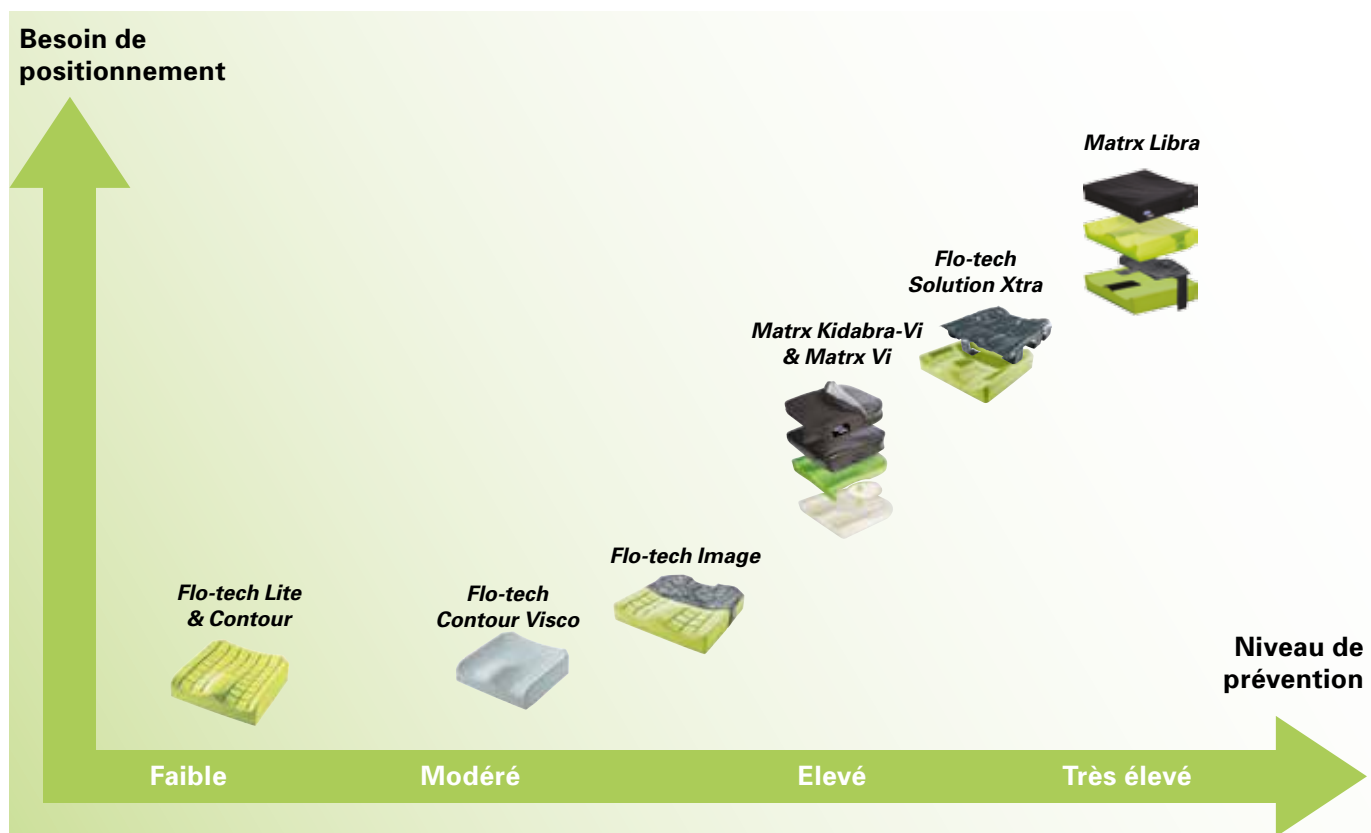




Guide de choix coussins Matrix® & Flo-tech®



Guide de choix dossiers Matrix

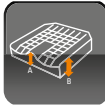






	Matrix MX1	Matrix Elite	Matrix Elite Full Back / Elite TR	Matrix Elite Deep	Matrix Posture Back	Matrix Posture Back Deep	Matrix Posture Back Max	Matrix Posture Back Deep Max
Capacité de propulsion (découpe scapulaire)	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
Niveau de maintien du tronc	Modéré	Modéré	Modéré	Elevé	Elevé	Très élevé	Elevé	Très élevé
Galbe	80 mm	80 mm	80 mm	160 mm	130 mm	180 mm	130 mm	180 mm
Compatibilité avec cale-tronc	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non

Caractéristiques Techniques

							
	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur	Poids	Poids Max. Utilisateur ¹	Revêtement extérieur lavable à
Matrix Libra	360 à 560 mm	310 à 560 mm	A:89 mm/B:89 mm	70 mm	à partir de 1,60 kg	Standard : 136 kg Bariatrique : 227 kg	80°
Flo-tech Solution Xtra	360 à 600 mm	405 à 455 mm	A:85 mm/B:85 mm	60 mm	3,08 kg	140 kg	80°
Matrix Kidabra-Vi	310 à 360 mm	380 à 510 mm	A:70 mm/B:73 mm	50 mm	à partir de 0,5 kg	68 kg	60°
Matrix Vi	360 à 560 mm	310 à 360 mm	A:82,5 mm/B:95 mm	63,5 mm	à partir de 0,9 kg	136 kg	80°
Flo-tech Image	405 à 500 mm	405 à 560 mm	A:85 mm/B:78 mm	60 mm	1,82 kg	140 kg	60°
Flo-tech Contour Visco	355 à 600 mm	405 à 560 mm	A:12 mm/B:12 mm	90 mm	1,60 kg	125 kg	80°

Technologie utilisée

Matrix Libra	Mousse HR et poche de gel fluide
Flo-tech Solution Xtra	Mousse HR et nappe de gel fluide
Matrix Kidabra-Vi	Mousse HR soft, mousse à mémoire de forme et mousse HR ferme
Matrix Vi	Mousse HR soft, mousse à mémoire de forme et mousse HR ferme
Flo-tech Image	Mousse HR et poche de gel fluide
Flo-tech Contour Visco	Mousse HR et mousse à mémoire de forme

							
	Largeur	Hauteur	Réglage en Profondeur	Réglage en Angle	Revêtement lavable à	Poids Max. Utilisateur	Poids
Matrix MX1	360 à 460 mm	230 à 410 mm	50 mm	30° +/- 15°	60°	115 kg	à partir de 500 gr
Matrix Elite	310 à 510 mm	260 à 510 mm	100 mm	40° +/- 20°	60°	136 kg	à partir de 800 gr (sans fixation)
Matrix Elite Deep	360 à 510 mm	310 à 510 mm	100 mm	40° +/- 20°	60°	136 kg	à partir de 1,4 kg (sans fixation)
Matrix Posture Back	360 à 510 mm	310 à 510 mm	100 mm ²	40° ²	60°	136 kg	à partir de 1,3 kg (sans fixation)
Matrix Posture Back Max	510 à 610 mm	410 à 510 mm	100 mm ²	40° ¹ +/- 20°	60°	227 kg	à partir de 1,3 kg
Matrix Posture Back Deep	360 à 510 mm	310 à 510 mm	100 mm ²	40° ²	60°	136 kg	à partir de 1,3 kg (sans fixation)
Matrix Posture Back Deep Max	510 à 610 mm	410 à 510 mm	100 mm ²	40° ¹ +/- 20°	60°	227 kg	à partir de 3,2 kg

1/ Les limites maximales de poids sont fixées en supposant que le coussin choisi ait une largeur et une profondeur appropriées à l'utilisation prévue

2/ Les réglages en angle et en profondeur du dossier peuvent être limités dans le cas d'un dossier plus large que l'assise.

Fabriqués selon les Normes Européennes:

BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, and BS 7176 (Crib 5)

Invacare® | **Matrx® Libra®**

NOUVEAU



Le coussin *Invacare Matrx Libra* offre une solution complète :

- Design innovant combinant base en mousse et poche de gel fluide pour optimiser la protection de la peau, le positionnement et l'adaptation au besoin spécifique de chaque utilisateur
- Une poche de gel fluide compartimentée a été développée pour améliorer la gestion du cisaillement
- Design galbé pour favoriser l'équilibre et la stabilité du bassin et ainsi apporter plus de mobilité à l'utilisateur
- Léger et sans entretien, le **Libra** s'adapte aux besoins de prévention et de positionnement de l'utilisateur tout en convenant à un style de vie actif
- Recommandé pour tous les utilisateurs incluant ceux présentant un risque très élevé de lésions cutanées

matrx®
SEATING SERIES



Yes, you can.®



Design unique

- Base en mousse – galbe anatomique pour optimiser le maintien et le positionnement du bassin
- Durabilité de la mousse haute résilience bénéficiant du traitement Ultra-Fresh™ contre la prolifération des bactéries et des odeurs
- Poche de gel fluide – Double couche compartimentée pour un maximum de protection au niveau des reliefs osseux

Bénéfices fonctionnels

- Butée pelvienne prévenant le glissement et réduisant le risque de cisaillement
- Soutien des grands trochanters favorisant la stabilité du bassin latéralement
- Extension du bord postérieur du coussin pour prévenir la bascule postérieure du bassin
- Découpe biseautée à l'avant pour s'adapter à des ischio-jambiers tendus et à la traction podale
- Galbe favorisant l'alignement des cuisses

Fiabilité et légèreté

- Gel fluide non sensible à la température. Pas d'entretien nécessaire
- Le coussin **Matrx Libra** est léger (poids à partir de 1,6 kg) et convient à un style de vie actif
- Pour des besoins d'adaptations plus importants, une gamme d'accessoires de positionnement facile d'utilisation est disponible

Caractéristiques et options



Enveloppement

Surface d'appui augmentée favorisant la répartition des appuis.



Répartition des appuis

Poids réparti entre le bassin et les cuisses pour réduire la pression sur les zones à risque.



Immersion

Les reliefs osseux s'immergent confortablement dans la poche de gel fluide pour une protection optimale.



Réduction du cisaillement


Le design unique du coussin permet des mouvements du bassin contrôlés et évite le glissement.

Caractéristiques et Options



Bord avant biseauté

Facilite les transferts et la traction podale.

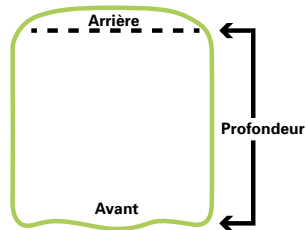

Dimensions du coussin

Profondeur réelle = Profondeur + 38 mm.



Bord postérieur du coussin

Une extension de 38 mm augmente la surface du coussin et permet de stabiliser la poche de gel fluide lors d'une bascule d'assise. Encoche en regard du coccyx pour soulager les appuis.



Cale antérieure

Prévient le glissement et réduit le cisaillement.



Cale antérieure découpée

Pour hanche limitée en flexion et/ou hauteur d'assise abaissée pour la traction podale.



Cale conique

Pour accentuer le soutien en adduction.



Cale conique

En cas d'obliquité pelvienne lors d'une mise en place à l'arrière du coussin.



Cales latérales

Améliore la stabilité latérale pour favoriser l'alignement des cuisses le long de l'axe médian.



Poche de gel fluide supplémentaire

Pour une protection ciblée ou en cas d'obliquité.



Plot d'abduction

Favorise un bon alignement des cuisses et des hanches.



Poche sur le côté pour un rangement pratique

Boucle attachée à la fermeture éclair pour faciliter l'ouverture de la poche.

Tailles disponibles

Version standard en mm : largeur x profondeur Poids maximum utilisateur : 136 kg

360 x 310	380 x 410	410 x 410	430 x 410	460 x 410	480 x 410	510 x 410
360 x 360	380 x 460	410 x 460	430 x 460	460 x 460	480 x 460	510 x 460
360 x 410	380 x 510	410 x 510	430 x 510	460 x 510	480 x 510	510 x 510

Version bariatrique en mm : largeur x profondeur Poids maximum utilisateur : 227 kg

530 x 460	560 x 460
530 x 510	560 x 510
530 x 560	560 x 560

Données techniques



Matrx Libra

Poids à partir de 1,6 kg¹




Poids max utilisateur
Standard : 136 kg
Bariatrique : 227 kg




Revêtement extérieur lavable en machine à 80°



Protection intérieure
Nettoyage avec un chiffon humide

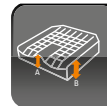

Hauteur
A: 89 mm/
B: 89 mm

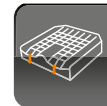

Hauteur
70 mm


- 1/ Varie selon la dimension du coussin
- 2/ Conforme à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - RoHS(2011/65 / CE).
- 3/ Conforme à la réglementation concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques.



Housses



Revêtement noir bi-extensible imperméable et déperlant

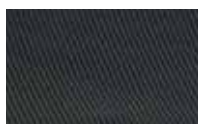

Revêtement Mesh noir respirant micro-aéré.

Invacare® | **Flo-tech® Solution Xtra**




Le coussin **Solution Xtra** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m³. La nappe de gel est complète et recouvre toute la base en mousse HR, sa conception est brevetée car dotée de poches individuelles sous chaque ischion pour prévenir les risques de talonnement et assurer un maximum de prévention par immersion dans le gel. Le gel fluide permet d'assurer un positionnement stable tout en assurant une prévention d'escarres pour risque élevé. La base en mousse est galbée pour favoriser le bon alignement des cuisses et est dotée de velcro pour permettre le rajout de cales.

Le traitement anti-bactérien **Ultra Fresh™** est désormais appliqué au coussin **Flo-tech Solution Xtra**. Ce traitement limite la prolifération des bactéries et rend ainsi la mousse encore plus résistante aux odeurs et aux moisissures.



Yes, you can.®

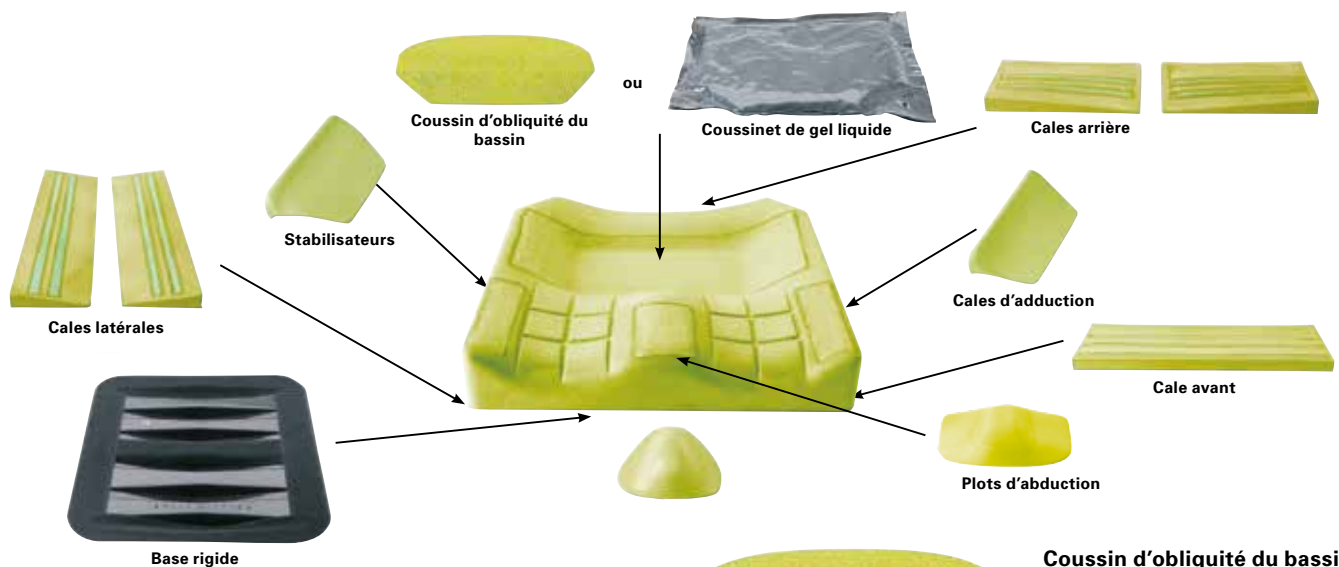

Coussin d'obliquité du bassin
Permet de suivre ou de corriger une obliquité du bassin. Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487164

Coussinet de gel liquide
Limite la pression sur les ischiens en cas de glissement vers l'avant. Idéal pour lutter ou suivre une faible obliquité du bassin. Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487166

Cales arrière
Empêchent la rotation externe des hanches. Participent à l'alignement des cuisses. Compatibles **Image & Solution Xtra**



AP1487158

Cales d'adduction
Réduit l'abduction et la rotation externe des hanches en guidant l'alignement des fémurs. Stabilisent les fémurs. Compatibles **Solution Xtra**



AP1487160

Stabilisateurs
Favorisent l'alignement des hanches. Le long d'un axe médian en guidant l'alignement des 2 fémurs le long de l'assise. Stabilisent le bassin. Compatibles **Solution Xtra**



AP1487161

Cale avant
Aide à stabiliser le bassin. Lutte contre une rétroversion éventuelle du bassin. Permet de changer l'angle d'assise. Compatible **Image & Solution Xtra**



AP1487157

Plots d'abduction
"Finalise" l'alignement des 2 fémurs et empêche les 2 faces latérales internes des genoux de se frotter l'une contre l'autre. Maintient les articulations des hanches dans une bonne position. Existe en 2 tailles. Compatibles **Solution Xtra**



AP1487162/AP1487163

Base rigide
Lutte contre l'effet hamac d'une assise en toile. Stabilise le bassin sur un plan horizontal. Compatible **Image & Solution Xtra**. Compatible avec tous les coussins Invacare.



AP1487165

Cales latérales
Améliorent la stabilité latérale pelvienne. Participent à la rotation interne des hanches. Compatibles **Image & Solution Xtra**



AP1487155


Caractéristiques techniques



Flo-tech Solution Xtra Largeur : 360 à 600 mm



Profondeur : 330 à 550 mm

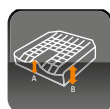

Hauteur
A : 85 mm/
B : 85 mm



Hauteur
60 mm



Poids
A partir de 3,08 kg



Poids max
140 kg



Revêtement lavable
en machine à 80°

Invacare® | **Matrix® Vi**

NOUVEAU



Coussin *Invacare Matrix Vi*

Le coussin *Invacare Matrix Vi* a été conçu pour le positionnement et la prévention des escarres pour risque moyen à élevé. Sa conception unique en trois parties grâce à une combinaison de différentes mousses procure une prévention ciblée sur les parties les plus à risque du patient et apporte un excellent niveau de stabilité et de confort.



matrix®
SEATING SERIES



Yes, you can.®



Caractéristiques

① **Housse externe** : Imperméable et respirante grâce à sa finition mesh, elle inclut une base antidérapante, deux bandes velcro et une poignée.


② **Housse interne** : Imperméable et zippée pour un accès facile à la mousse.

③ **Couche supérieure** : Mousse Haute Résilience (HR) Soft pour un confort et un soutien optimal. Sa cuvette ischiatique favorise la stabilité du bassin et son galbe, le bon alignement au niveau des membres inférieurs.

Traitement anti-bactérien **Ultra-Fresh™** limitant la prolifération des bactéries et les mauvaises odeurs.


④ **Insert en mousse visco-élastique** : Disque en mousse visco-élastique en regard de la zone ischiatique/sacrée permettant l'immersion des reliefs osseux.

⑤ **Couche inférieure** : Mousse Haute Résilience (HR) Ferme pour le soutien et la durabilité. Appui en regard des grands trochanters pour répartir les appuis et favoriser la stabilité des hanches.

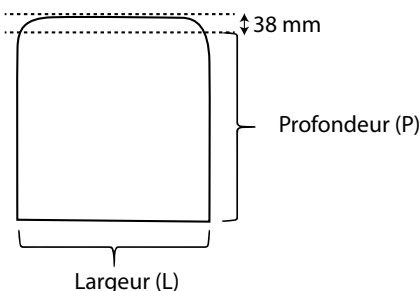

Largeur réelle : L - 12,5 mm pour couvrir plusieurs largeurs d'assise.

Profondeur réelle : P + 38 mm pour couvrir plusieurs profondeurs d'assise.

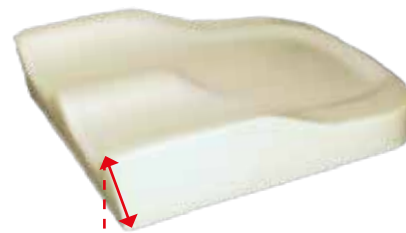

Découpe biseautée à l'avant

Elle permet de s'adapter à des ischio-jambiers tendus, facilite la traction podale et les transferts.


Caractéristiques techniques



Largeur



Profondeur

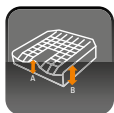

Hauteur A / B



Hauteur en regard de la cuisse

Matrx Kidabra-Vi	310 - 360 mm	310 - 360 mm	70/73 mm	50 mm
Matrx Vi	360, 410, 430, 460, 510, 560 mm	380 - 510 mm	82.5/95 mm	63,5 mm



Matrx Kidabra-Vi	Poids à partir de 0,5 kg*
Matrx Vi	à partir de 0,9 kg*



Poids max	68 kg
	136 kg



Housse externe lavable à 60°

* varie selon les dimensions du coussin

Couleurs et options



Revêtement Mesh noir imperméable et respirant



Tissu Kid*ab*ra en standard sur les tailles enfant (KA-Vi)



Kit d'Obliquité Pelvienne facile à installer sur tous les coussins **Matrx Vi** et **Kid*ab*ra-Vi**. (adapté pour obliquités jusqu'à 25 mm)

Invacare® | **Flo-tech® Image**



Stabilité et prévention !

Le coussin **Flo-tech Image** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m³. Le design de la base en mousse est galbé pour favoriser le bon alignement des cuisses et assurer un positionnement stable. La cuvette ischiatique avec une poche en gel fluide apportera une zone de contact plus importante au niveau de la zone sacrée et donc une réelle prévention des escarres.





Caractéristiques

Conception Originale

Le design du coussin **Image** a été pensé pour une meilleure adaptation du coussin sur le fauteuil roulant : découpe toile d'assise pour compenser l'effet hamac

de la toile d'assise, découpe tube de dossier pour maximiser la profondeur du fauteuil.



Revêtement imperméable et déperlant

Equippé d'une sangle de préhension.

Poche en gel fluide

Permet une meilleure répartition des points de pression.

Traitement anti-bactérien Ultra Fresh™

Limite la prolifération des bactéries et rend la mousse plus résistante aux odeurs et moisissures.



Cales de positionnement

Caractéristiques techniques


Flo-tech Image




Largeur :
405 mm
430 mm
455 mm
480 mm
500 mm



Profondeur :
405 mm
430 mm
455 mm

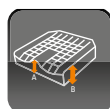

Hauteur
A: 85 mm/
B: 78 mm

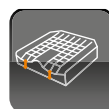

Hauteur
60 mm



A partir de
1.82 kg




Max. 140 kg



Revêtement lavable
en machine à 80°

Coloris du revêtement

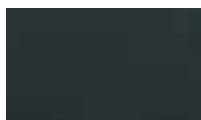

Revêtement noir bi-extensible
imperméable et déperlant

Invacare® | *Flo-tech® Contour Visco*



Conception originale!

Le coussin **Flo-tech Contour Visco** est composé d'une base en mousse Haute Résilience de 40 kg/m³ recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³. Ce coussin moulé bénéficie d'une forme anatomique et d'une hauteur de mousse viscoélastique sous les ischions supérieure à 60 mm. Il favorise ainsi l'immersion des parties du corps en contact avec le support et de ce fait assure une bonne répartition des pressions de contact.



Yes, you can.®



Caractéristiques

De multiples découpes pour toujours plus de confort!

Les coussins **Flo-tech Contour Visco** sont disponibles sous 2 formes différentes


- **Contour Visco** : Hauteur de 90 mm
- **Contour Visco** pour fauteuils de confort : Hauteur de 90 mm et profondeur de 530 mm.

Le coussin **Contour Visco** est équipé d'une découpe toile d'assise pour compenser l'effet Hamac éventuel d'une toile ainsi qu'une découpe au niveau des tubes de dossier pour maximiser la profondeur d'assise du fauteuil. Un galbe assure un bon positionnement du patient avec plot d'abduction et un soutien latéral.



Revêtement imperméable et déperlant

Equippé d'une sangle de préhension.

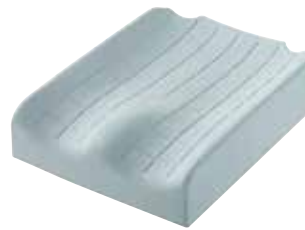

Modèle spécifique pour fauteuils de confort Rea® Azalea® et Clematis®

4 tailles disponibles, profondeur 530 mm, portance ferme.




Trois densités de mousse

Ferme (poids patient max 100 kg), médium (poids patient max 75 kg) et très ferme (poids patient max 125 kg).



Base en mousse Haute Résilience

Donne de la structure au coussin.

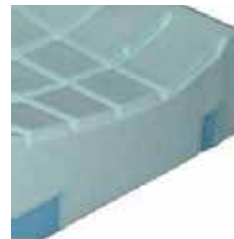

Mousse viscoélastique à mémoire de forme

La mousse viscoélastique sous ischions d'une hauteur supérieure à 60 mm favorise une bonne immersion de la partie ischiatique



Conception originale grâce aux deux mousses

Vue de dessous.

Caractéristiques techniques




Flo-tech Contour Visco

Largeur :
355 mm
380 mm
405 mm
430 mm
455 mm
480 mm
505 mm
600 mm



Profondeur :
405 mm
430 mm
455 mm
530 mm
560 mm

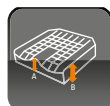

Hauteur
A : 12 mm
B : 12 mm



Hauteur
90 mm



A partir de
1.60 kg




Max. 125 kg



Revêtement lavable
en machine à 80°

Coloris du revêtement

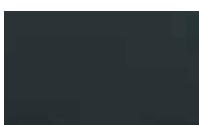

Revêtement noir bi-extensible
imperméable et déperlant



Confort et design au service du positionnement

Grâce à sa gamme de dossiers **Matrix** et à ses coussins **Flo-tech**, Invacare propose désormais un large éventail de solutions pour offrir aux utilisateurs un positionnement et un confort optimal. Ces produits bénéficient de tout le savoir faire Invacare en terme d'innovation et de qualité.

Ce catalogue dédié aux produits **Matrix** et **Flo-tech** vous permettra de découvrir l'étendu de la gamme et l'objectif de chaque produit.

matrix[®]
SEATING SERIES



Yes, you can.®



**Dossier 100% carbone
à partir de 500 g**

Invacare *Matrx MX1* : A la pointe de l'innovation

*Invacare **Matrx MX1*** a été conçu pour les utilisateurs actifs à la recherche d'un dossier aux caractéristiques techniques innovantes et au look inédit. Sa structure en fibre de carbone lui confère une légèreté exceptionnelle.

Caractéristiques techniques et bénéfiques

- Profondeur du dossier de 80 mm pour offrir un maintien latéral suffisant tout en laissant un maximum de mobilité à l'utilisateur.
- **3 types de fixations brevetés** disponibles pour adapter le dossier sur les différents types de fauteuils : fixation centrale, fixations latérales fixes, fixations latérales à démontage rapide.
- **Fixations multi-réglables** pour positionner le dossier selon la morphologie de l'utilisateur et ainsi lui **assurer un maintien et un confort optimal**.
- Revêtement de haute qualité antifongique et respirant pour limiter la transpiration et les effets de macération.



Livré avec une cale lombaire de série

Profondeur : 80 mm



Caractéristiques et options

3 types de fixations: centrale, latérales fixes et latérales à démontage rapide sur diamètre 19, 22 et 25 mm.



Bavette

Compatible sur tous les dossiers de la gamme **Matrx**.



Fixation centrale

Adapté pour les fauteuils à cadre rigide. Permet un réglage en angle et en hauteur du dossier.



Fixations latérales fixes

Pour montage sur les cannes de dossier. Permet un réglage en hauteur, en profondeur et en largeur.



Fixations latérales à démontage rapide

Pour montage sur les cannes de dossier. Permet un réglage en hauteur, en profondeur et en largeur. Idéal pour fauteuils pliants.

Caractéristiques techniques

Revêtement



Matrx MX1

360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm



230 mm
310 mm
410 mm



Réglage en Profondeur
5 cm



Réglage en Angle
30°
+/- 15°



Revêtement lavable à 60°



Max 115 kg



A partir de 500 gr (sans fixations)



Revêtement Mesh noir respirant micro-aéré

Certificat feu :
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité :
ISO 10993-5



Livré avec une cale lombaire de série

Invacare Matrix Elite

Les dossiers **Invacare Matrix Elite** ont été conçus pour apporter un maintien et un positionnement précis tout en laissant une grande mobilité et un bon accès aux mains-courantes à l'utilisateur pour lui permettre de garder une activité fonctionnelle optimale.

Caractéristiques techniques et bénéfiques

- Structure en aluminium permettant de moduler le galbe.
- Maintiens latéraux recouverts de mousse pour un confort et une protection maximum.
- Revêtement de haute qualité antifongique et respirant pour limiter la transpiration et les effets de macération.
- Dossier compatible avec fixation standard et fixation split (pour les cadres rigides) (cf page 10).
- **Montage et réglages des fixations rapides.** Possibilité de régler le dossier en profondeur, en angle et en rotation, sans faire de transfert.
- Coque de dossier ajourée pour une meilleure circulation de l'air.

Caractéristiques et options



Support pour harnais pour dossier Elite
Compatible sur les dossiers **Elite, Elite Deep** et **Elite Full Back**.



Dossier Matrix Elite TR
Cette version TR bénéficie d'un appui scapulaire pour offrir un maintien des épaules lors de la bascule d'assise. Confort apporté par la double épaisseur avec mousse supersoft.





Nombreux accessoires disponibles
Cale-tronc fixe ou escamotable (différentes tailles de coussins disponibles), en position haute, basse ou intermédiaire - Appui-tête - Bavette.

Caractéristiques techniques

Matrix Elite

310 mm
330 mm
360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm
480 mm
510 mm

260 mm
310 mm
360 mm
410 mm
460 mm
510 mm

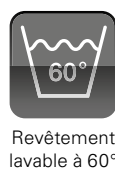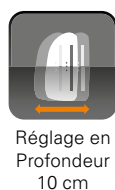

Revêtement



Revêtement Mesh noir imperméable et respirant

Certificat feu :
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité :
ISO 10993-5



Livré avec une cale lombaire de série



Invacare **Matrx Elite Deep**

Les dossiers **Invacare Matrx Elite Deep** bénéficient d'un galbe profond pour apporter un maintien latéral du tronc tout en laissant de la mobilité au niveau des épaules.

Caractéristiques techniques et bénéfiques

- Structure en aluminium permettant de moduler le galbe.
- Maintiens latéraux recouverts de mousse pour un confort et une protection maximum.
- Revêtement de haute qualité antifongique et respirant pour limiter la transpiration et les effets de macération.
- Dossier compatible avec fixation standard et fixation split (pour les cadres rigides).
- **Montage et réglages des fixations rapides.** Possibilité de régler le dossier en profondeur, en angle et en rotation, sans faire de transfert.
- Coque de dossier ajourée pour une meilleure circulation de l'air.

Caractéristiques et options



Bavette

Compatible sur tous les dossiers de la gamme **Matrx**.



Appui-tête

Avec coussin soft largeur 255 mm. Réglable en orientation grâce à son système de rotule.



Support pour harnais pour dossier Elite

Compatible sur les dossiers **Elite, Elite Deep** et **Elite Full Back**.



Fixation Standard ou Split (cf p24)

Caractéristiques techniques



Matrx Elite Deep

360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm
480 mm
510 mm



310 mm
410 mm
460 mm
510 mm



Réglage en Profondeur 10 cm



Réglage en Angle 40° +/- 20°



Revêtement lavable à 60°



Max 136 kg



A partir de 1,4 kg (sans fixation)

Revêtement



Revêtement Mesh noir imperméable et respirant

Certificat feu :
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité :
ISO 10993-5



Livré avec une cale lombaire de série

Profondeur : 130 mm



Invacare **Matrix Posture Back**

Les dossiers **Invacare Matrix Posture Back** apportent un maintien latéral uniforme sur toute la hauteur de leur structure. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un confort accru et d'une meilleure répartition des points d'appui.

Caractéristiques techniques et bénéfiques

- Coque de dossier entièrement recouverte d'une **mousse haute résilience** pour un confort et une protection maximum de l'utilisateur.
- Revêtement de haute qualité antifongique et respirant pour limiter la transpiration et les effets de macération.
- Dossier compatible avec fixation standard et fixation split (cf page 24).
- **Montage et réglages des fixations rapides.** Possibilité de régler le dossier en profondeur, en angle et en rotation.
- Coque de dossier à structure ABS, avec fixation d'appui-tête intégré.

Caractéristiques et options



Appui-tête

Avec coussin soft largeur 255 mm. Réglable en orientation grâce à son système de rotule.



Support pour harnais pour dossier Posture Back

Compatible sur les dossiers **Posture Back, Posture Back Deep** et **Posture Back Max**.

Version max



Dossier Posture Back Max

Disponible en largeur 510, 560, 610 mm – poids max utilisateur : 227 kg.



Fixation Renforcée

Poids max utilisateur : 227 kg.

Caractéristiques techniques



Matrix Posture Back

360 mm
410 mm
430 mm
460 mm
510 mm
560 mm
610 mm



310 mm
410 mm
510 mm



Réglage en Profondeur
10 cm¹



Réglage en Angle
40°¹



Revêtement lavable à 60°



Max 136 kg
(227 kg version Max)



A partir de 1,3 kg
(sans fixation)



Revêtement Mesh noir imperméable et respirant

Certificat feu :
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité :
ISO 10993-5

^{1/} Les réglages en angle et en profondeur du dossier peuvent être limités dans le cas d'un dossier plus large que l'assise.



Livré avec une cale lombaire de série

Profondeur : 180 mm



Invacare **Matrix Posture Back Deep**

Les dossiers **Invacare Matrix Posture Back Deep Max** disposent des mêmes avantages que les dossiers **Posture Back** tout en bénéficiant d'un galbe plus profond. L'utilisateur dispose ainsi d'un maintien latéral supérieur.

Caractéristiques techniques et bénéfiques

- Coque de dossier entièrement recouverte d'une **mousse haute résilience** pour un confort et une protection maximum de l'utilisateur.
- Revêtement de haute qualité antifongique et respirant pour limiter la transpiration et les effets de macération.
- Dossier compatible avec fixation standard et fixation split (cf page 10).
- **Montage et réglages des fixations rapides.** Possibilité de régler le dossier en profondeur, en angle et en rotation.
- Coque de dossier à structure ABS, avec fixation d'appui-tête intégré.

Caractéristiques et options



Appui-tête

Avec coussin soft largeur 255 mm. Réglable en orientation grâce à son système de rotule.



Support pour harnais pour dossier Posture Back

Compatible sur les dossiers **Posture Back, Posture Back Deep** et **Posture Back Max**.

Version max



Dossier Posture Back Deep Max

Disponible en largeur 510, 560, 610 mm – poids max utilisateur : 227 kg



Fixation Renforcée

Poids max utilisateur : 227 kg.

Caractéristiques techniques

Matrix Posture Back Deep



360 mm
410 mm
430 mm
460 mm
510 mm
560 mm
610 mm



310 mm
410 mm
510 mm



Réglage en Profondeur 10 cm¹



Réglage en Angle 40°¹



Revêtement lavable à 60°



Max 136 kg (227 kg version Max)



A partir de 1,3 kg (sans fixation)

Revêtement



Revêtement Mesh noir imperméable et respirant

Certificat feu :
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité :
ISO 10993-5

1/ Les réglages en angle et en profondeur du dossier peuvent être limités dans le cas d'un dossier plus large que l'assise.

Fixations pour gamme de dossiers Elite et Posture Back

Les deux types de fixations à 4 points offrent une grande stabilité aux dossiers. L'installation est rapide et les réglages peuvent être effectués avec l'utilisateur assis sur le fauteuil roulant :

- Démontage rapide du dossier d'une seule main.
- Réglages en profondeur sur 100 mm, en angle (40°) et en rotation.
- Compatibles sur cannes de dossiers de diamètres 17 à 30 mm.
- Poids max : 136 kg.



Fixation Standard

Poids de 640 g, la paire. Existe en version renforcée pour dossiers Max.



Fixation Split

Idéal pour fauteuil roulant à cadre rigide ou avec un tendeur de dossier soudé. Poids de 510 g, la paire. Poids Max Utilisateur: 136 kg.

Réglages du dossier



Profondeur

Réglage en profondeur sur 50 mm à l'arrière des cannes de dossier.



Profondeur

Réglage en profondeur sur 50 mm à l'avant des cannes de dossier.



Angle

Amplitude de 20° pour fermer l'angle de dossier.



Angle

Amplitude de 20° pour ouvrir l'angle de dossier.



Rotation

Le dossier peut être orienté pour mieux s'adapter à la morphologie de l'utilisateur.

Cale-tronc pour dossiers Elite

Large gamme de cale-tronc avec de nombreux réglages: en hauteur sur 60 mm, en largeur, en profondeur, en inclinaison et en rotation.



Cale-tronc fixe

Disponible en 2 tailles de coussin : S & L.



Cale-tronc fixe position haute ou basse

Permet de positionner le cale-tronc 80 mm plus haut ou plus bas. Taille unique de coussin : L.



Cale-tronc escamotable latéralement

Disponible en 4 tailles de coussin : XS, S, M & L.



Cale-tronc escamotable latéralement position haute ou basse

Disponible en 4 tailles de coussin : XS, S, M & L.

Dimensions des coussins de cale-tronc (L x h)

Taille XS		108 x 82,5 mm
Taille S		133 x 89 mm
Taille M		146 x 95 mm
Taille L		165 x 108 mm

Dimensions des cales lombaires (L x h)



100 x 130 mm pour largeurs de dossier 310 et 330 mm
 130 x 130 mm pour largeurs de dossier 360 et 380 mm
 150 x 130 mm pour largeurs de dossier 410 et 430 mm
 180 x 130 mm pour largeurs 460 mm et plus

Accessoires



Appui-tête

Avec coussin soft largeur 255 mm. Réglable en orientation grâce à son système de rotule.



Fixation d'appui-tête

Uniquement nécessaire pour l'installation d'un appui-tête sur un dossier de la gamme Elite.



Dossiers pré-perçés

Les dossiers **Posture Back** et **Elite** sont pré-perçés pour faciliter l'installation d'un appui-tête



Bavette

Bavette

Compatible sur tous les dossiers de la gamme **Matrix**.



Support pour harnais pour dossier Elite

Compatible sur les dossiers **Elite**, **Elite Deep** et **Elite Full Back**.



Support pour harnais pour dossier Posture Back

Compatible sur les dossiers **Posture Back**, **Posture Back Deep** et **Posture Back Max**.



LE POSITIONNEMENT EN FAUTEUIL ROULANT

Objectifs:

- Savoir conseiller l'utilisateur vers un modèle adapté à ses besoins.
- Comprendre et prendre conscience des mécanismes de la position assise.
- Détailler les différents équipements des fauteuils roulants et analyser l'impact des réglages sur l'utilisateur.
- Choisir régler et adapter les différentes aides techniques au positionnement.

Programme:

Description des différentes catégories de fauteuils roulants (manuels, électriques, verticalisateurs) et de leurs équipements.

Rappels anatomiques de la position assise (aspects fonctionnels et incidences dans la vie quotidienne).

Description des différentes Aides Techniques au Positionnement (ATP).

Démarche de choix, réglages des fauteuils roulants et des aides techniques au positionnement (ATP). Mises en pratique sur les fauteuils manuels et électriques, réglages d'assise et d'ATP.

Personnes concernées:

Distributeurs de Matériel Médical confirmés, Ergothérapeutes ayant le désir de perfectionner leurs connaissances sur les gammes de positionnement (dossiers et coussins).



matrix
SEATING SERIES

Dates:

Du 09/09 à 14h au 11/09 à 12h30

Durée: 3 jours (15h30)

Mercredi: 14h00 - 18h00

Jedi: 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00

Vendredi: 9h00 - 12h30

Prix: 800,40 € TTC par personne (soit 667,00 € HT)

Effectif: 5 minimum/ 12 maximum

Votre Service Clients *Invacare*[®]

- ▶ A votre disposition du lundi au vendredi de **8h30 à 12h00** et de **13h30 à 17h30**.
- ▶ Expédition le jour même pour les commandes de produits stock **passées avant 12h00**.
- ▶ Nombreux articles en stock **livrables en 24/48/72h**.
- ▶ Passez vos commandes par mail sur l'adresse **commandesfr@invacare.com**
- ▶ Pour toutes vos demandes de Fabrications Spéciales, contactez le 02 47 62 64 38 !
- ▶ Pour la comptabilité Clients, contactez le 02 47 62 64 24 ou vpetit@invacare.com
- ▶ Pour le Service Qualité, contactez le 02 47 62 64 65 ou labelque@invacare.com
- ▶ **Invacare Pro** :
 - Consultez en ligne les vues éclatées mises à jour en temps réel
 - Commandez vos pièces détachées et produits finis non configurables et bénéficiez d'un délai de livraison raccourci.
- ▶ **Configurateur en ligne** : complétez en ligne votre fiche de mesure, réduisez le risque d'incompatibilité et réduisez votre délai de livraison !



Pour contacter votre Service Clients spécialisé sur la gamme Matrx

02 47 62 69 16

alberactif@invacare.com

Un numéro et une adresse e-mail uniques pour répondre à toutes vos demandes !

Un site internet pour faciliter vos recherches www.invacare.fr



Invacare® Vos Responsables Régionaux

LIGNE DIFFUSION

LIGNE SÉLECTION

Véronique BUCHET **3**
06 80 98 66 66
vbuchet@invacare.com

Julien VILBERT
06 07 81 80 30
jvilbert@invacare.com

Martine LEPETIT **1**
06 80 98 66 70
mlepetit@invacare.com

Patrick BRETECHER
06 07 44 42 88
pbretech@invacare.com

Frédéric BOUVART
Directeur Commercial France
02 47 62 64 96
fbouvar@invacare.com

Franck TUAL **4**
06 08 87 67 80
ftual@invacare.com

Laurent FAIST
06 80 98 66 71
lfaist@invacare.com

Didier SORIA **2**
06 73 68 40 81
dsoria@invacare.com

David VU VAN
06 80 98 66 73
dvuvan@invacare.com

Rodolphe LERASLE **8**
06 72 19 20 67
rlerasle@invacare.com

Filipe Lopes
06 86 62 05 89
flopes@invacare.com


Evelyne ROSSET **7**
06 86 62 06 68
erosset@invacare.com

Didier HUREZ
06 80 98 66 67
dhurez@invacare.com

Hervé DI MANNO **5**
06 80 98 66 68
hdimanno@invacare.com

Guillaume PRONOST
06 78 89 24 40
gpronost@invacare.com

Stéphane GARCIA **6**
06 07 11 25 33
sgarcia@invacare.com

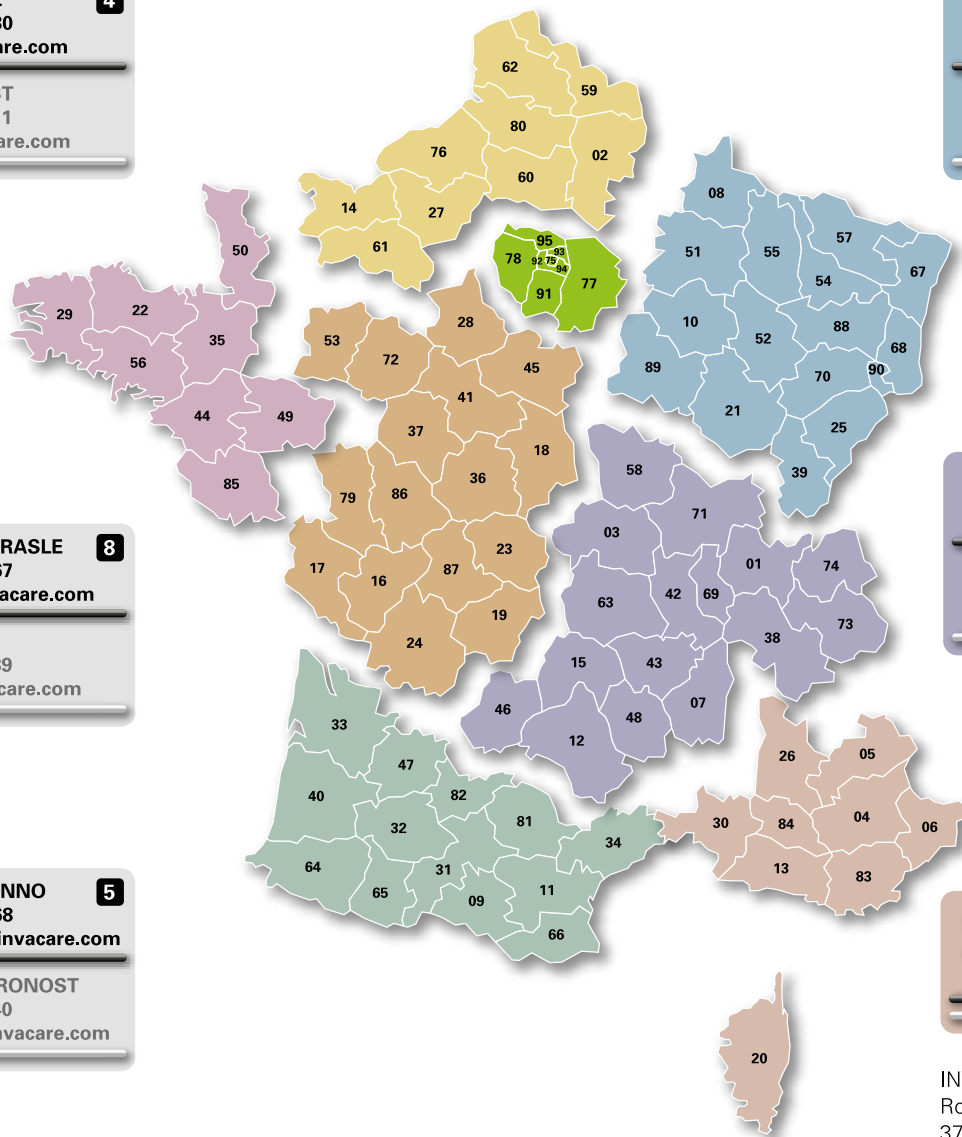

Pierre-Marie JURANVILLE
06 87 76 05 02
pmjuranville@jufine.fr

**Gabon, Sénégal
Côte d'Ivoire
Ghana, Togo
Mauritanie, Bénin**

**Nigéria
Cameroun
Congo Brazzaville
Congo RDC**

Charles DOROTHÉE
06 90 62 74 57
cdorothe@invacare.com

**Guadeloupe
Martinique
Guyane**

Jacques TIREL
06 92 23 18 53
tirel.jacques-egret@wanadoo.fr

**La Réunion
Mayotte**

**Madagascar
Ile Maurice**

Marie Elia GONINET
+ 212 655 31 70 22
megconsultant@hotmail.fr

Maroc

Philippe MALAGA
00 687 79 42 78
p.malaga@pharmagence.nc

**Nouvelle-Calédonie
Polynésie Française**

**Wallis
Futuna**

Amina AOUADI
+ 216 53 84 14 99
amina_ouadi@hotmail.fr

**Tunisie
Algérie**

INVACARE POIRIER S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr
www.scalamobil.fr
www.my-invacare.fr

© 2015 Invacare International Sarl.
Tous droits réservés.
1585581

