




# Varilite

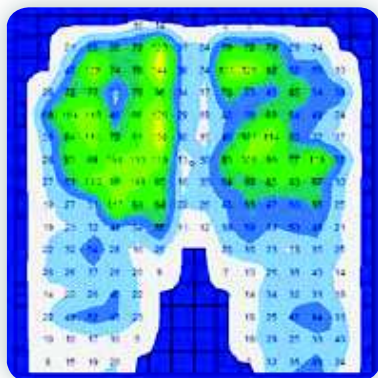

Nappe de pression du coussin Reflex

POSITIONNEMENT

## COUSSIN REFLEX

Le coussin **REFLEX** est recommandé pour les utilisateurs présentant un risque modéré d'escarres.

Il ne nécessite aucun ajustement, fournissant automatiquement confort, stabilité, et une excellente répartition des pressions grâce à un système unique de valve à ajustement automatique de l'immersion.

Le coussin **REFLEX** est extrêmement léger et facile d'utilisation, le rendant idéal pour les environnements hospitaliers, ou hospitalisations à domicile.

- 1- Le coussin **REFLEX** est réparti en 3 zones :
  - > Une mousse HD pour la stabilité latérale et l'abduction
  - > Une mousse Medium pour le positionnement du bassin
  - > Une mousse perforée sous les ischions afin de libérer la pression
 Le système air-mousse permet une prévention d'escarres optimisée : l'air supporte la charge et répartit la pression, alors que la mousse procure une stabilité optimum.  
Le coussin s'adapte à chaque utilisateur, et le poids est réparti sur la surface du coussin.
- 2- Le coussin **REFLEX** présente un revêtement résistant et durable
- 3- Une valve intégrée libère l'air nécessaire lorsque l'utilisateur s'installe sur le coussin : l'immersion est optimisée et le talonnement évité. Le coussin se regonfle automatiquement lorsqu'il n'y a plus de charge dessus.
- 4- Le coussin **REFLEX** est livré avec une housse incontinence lavable en machine, équipée de velcros.

## DIMENSIONS DISPONIBLES (cm)

	Profondeur d'assise						
	30	35	38	40	43	45	50
Largeur	30	X	X				
	35		X		X		X
	38			X		X	
	40		X		X		X
	43					X	
	45				X		X
	50				X		X