

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

SARA PLUS

LE VERTICALISATEUR AVANCÉ



...with people in mind

SÉCURITÉ, MOBILISATION, FORMATION...



**...DES AVANTAGES TOUS AZIMUTHS
GRÂCE AU CERCLE DE CONFORT**



**Ajout avancé du groupe de verticalisateurs
ArjoHuntleigh, le SARA Plus vient s'ajouter au SARA
3000.**

Pour activer la mobilité pendant les transferts

Le SARA Plus est un verticalisateur ergonomique qui mobilise les résidents pendant les activités quotidiennes, telles que les transferts et la toilette.

Mais le SARA Plus offre d'autres avantages. Il met les avantages de la stimulation de la mobilité offerts par le verticalisateur à la portée d'un nombre de résidents toujours croissant. Et ceci grâce au soutien supplémentaire apporté aux résidents par le Comfort Circle. Celui-ci comprend l'Arc-Rest et un harnais sélectionné pour répondre aux besoins individuels. L'Arc-Rest inédit est une partie incorporée dans le mécanisme de levage qui apporte un soutien exceptionnel à la partie supérieure du corps pendant la verticalisation. Le soutien des genoux à hauteur réglable, le Pro-Active Pad (un autre dispositif inédit) contribue à favoriser la transition à la position debout en permettant une flexion naturelle des chevilles.

Grâce à ces dispositifs inédits, le SARA Plus augmente et renforce les avantages obtenus par un verticalisateur. Il contribuera à améliorer non seulement la qualité des soins, mais aussi la qualité de la vie quotidienne des résidents.

Pour favoriser la mobilité grâce aux exercices

Le SARA Plus offre aussi un petit plus dans le domaine des exercices. C'est le seul verticalisateur conçu pour renforcer l'équilibre, faciliter les premiers pas et aider à la marche. Le Comfort Circle assure le soutien nécessaire au résident. Il suffit de retirer le repose-pieds et le Pro-Active Pad, et le SARA Plus devient alors une plate-forme optimale pour les séances d'exercices. Cet aspect de la rééducation confère un rôle encore plus important au SARA Plus dans les établissements de soins, où il favorise la mobilité des résidents.

Solutions harnais

Le harnais fait intégrante du Comfort Circle. Il existe toute une série de solutions harnais adaptées à des besoins spécifiques. En plus du harnais de verticalisation de base, le harnais BOS/EPS spécial permet aux résidents de se tenir dans une position plus droite, ce qui est plus favorable à la rééducation. Le harnais de transfert/déambulation soutient les résidents qui ont besoin d'être transférés à une position assise. Il est également idéal pour les exercices de déambulation.



Un seul soignant peut gérer les transferts de manière sûre et efficace.



Le harnais EPS/BOS permettant une verticalisation plus droite, c'est le harnais idéal pour la rééducation.



Le repose-pieds apporte sécurité et stabilité, tandis que le Pro-Active Pad permet une flexion naturelle des chevilles.



L'Arc-Rest assure un excellent soutien et renforce l'impression de sécurité.

Principales caractéristiques

- Arc-Rest : il offre un soutien et un confort exceptionnel.
- Capacité de charge sécuritaire 190 kg
- Conçu pour renforcer l'équilibre, faciliter les premiers pas et aider à la marche.
- Le repose-pieds et le rembourrage pour genoux Pro-Active Pad sont amovibles ce qui permet d'effectuer des exercices de déambulation.
- Roues ultra-glissantes, les deux roues arrières sont dotées de freins.

Avantages pour le résident

- Mobilité activée pendant les transferts quotidiens.
- Facilite les premiers pas et les exercices de déambulation ce qui stimule les avantages de la mobilité.
- Assure un environnement sûr et confortable.
- Il existe plusieurs solutions harnais (harnais de verticalisation, harnais de transfert/déambulation BOS/EPS et harnais faciles à nettoyer).

Avantages pour le soignant

- Appareil facile à manœuvrer, donc moins d'efforts astreignants.
- Un seul soignant peut superviser en toute sécurité le transfert ou les exercices de déambulation.
- Grâce à la télécommande, possibilité de toujours travailler tout près du résident.
- Les commandes jumelées constituent une solution en variante ou de secours à la télécommande.





Pour les transferts, les pieds du châssis motorisé peuvent être écartés pour donner un accès optimal.



Commandes jumelées. Télécommande ou commande au panneau du vérin ? Le soignant peut choisir la commande qui est la plus pratique dans une situation donnée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Espace requis

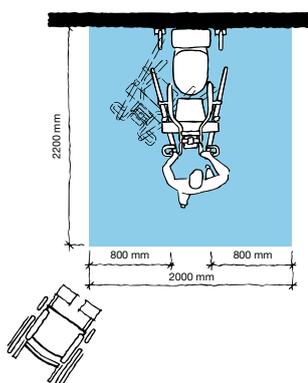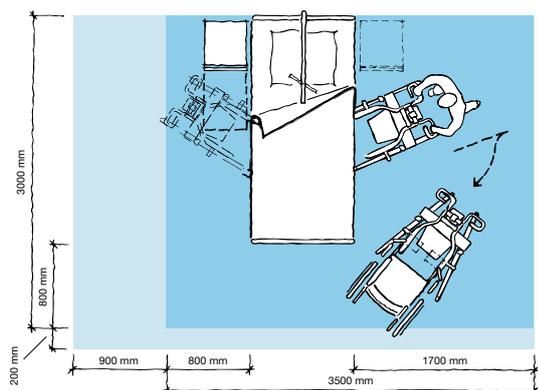

- La zone bleue indique l'espace requis pour pouvoir utiliser correctement les aides techniques.
- La zone en bleu clair indique la surface supplémentaire requise pour faciliter les activités des deux côtés du lit.

La Mobilitèthe™

Approprié à Carl et Doris*



C Carl, assis dans un fauteuil roulant, est à peine capable de se soutenir

D Doris, qui est incapable de se soutenir

Pour plus d'informations, contactez ArjoHuntleigh et demandez la plaquette La Mobilitèthe™.

* Grâce au soutien inédit apporté par le harnais EPS (support postural supplémentaire)/BOS, la verticalisation et le transfert deviennent possibles.

Information produit

Capacité de levage maxi	190 kg
Capacité de poids	140 kg
Poids	85 kg
Poids avec pèse-personne	95 kg
Longueur totale	1 033 mm
Hauteur de levage mini	906 mm
Hauteur de levage maxi	1 497 mm
Hauteur totale	1 195 mm
Hauteur du châssis	116 mm
Largeur externe des pieds rapprochés	646 mm
Largeur interne des pieds écartés	1 002 mm
Roues ultra-glissantes, les deux roues arrière sont dotées de freins	
Arrêt d'urgence et bouton de descente d'urgence	
Indicateur d'heures de fonctionnement : Affiche le nombre total d'heures d'utilisation du moteur	
Catégorie de protection	Lève-malade IPX4
Télécommande	IP67
Indicateur de faible charge de batterie : il affiche la charge restante et indique à quel moment il faut recharger la batterie	
Batterie	24 V 5 Ah

Une batterie et un chargeur sont fournis avec chaque Sara Plus

En option

Pèse-personne intégré

Accessoires

Siège toilette

Repose-pieds étroit

Rallonge de repose-pieds

Rembourrage large de protection des genoux

Housse molletonnée du rembourrage de genoux

Sangles pour les bras

Jambières

Homologations

Ce produit est conforme à la législation en vigueur et aux normes de produits applicables

Seules les pièces ArjoHuntleigh, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires ArjoHuntleigh. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2010.

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

www.ArjoHuntleigh.be

ArjoHuntleigh sa

Evenbroekveld 16

9420 Erpe-Mere

Tél.: +32 (0)53 60 73 80

Fax: +32 (0)53 60 73 81

E-mail: info@ArjoHuntleigh.be

GRUPE GETINGE est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons nos activités sous les trois marques **ArjoHuntleigh**, **GETINGE** et **MAQUET**. **ArjoHuntleigh** se consacre à la mobilité des patients et au traitement des plaies. **GETINGE** propose des solutions de lutte contre les infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. **MAQUET** se spécialise dans les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales et aux soins intensifs.