


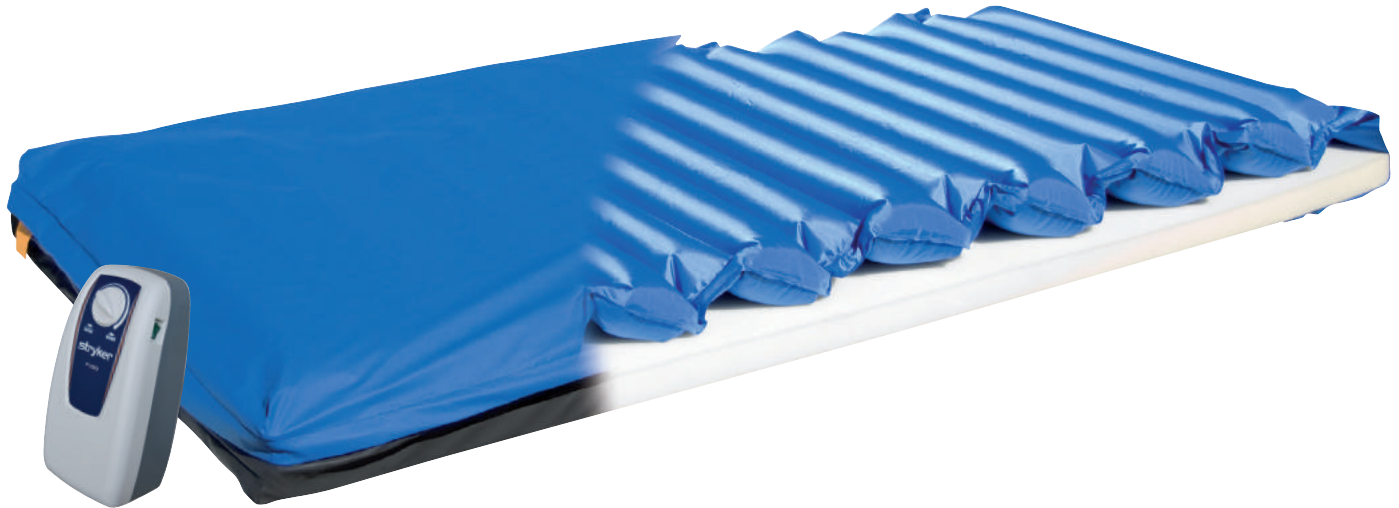

► DESCRIPTIF

Système thérapeutique Basse Pression Continue dynamique alternée

► INDICATIONS

Catégorie d'indications 2

• Prévention : RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ

Patient levé dans la journée, alité plus de 15 heures.

• Aide au traitement :

- avec adjonction(s) de système(s) de décharge et/ou de positionnement (plus de détails p. 56 / 57)
- possible également sans adjonction si plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 en zone d'appui et patient incapable de se mobiliser seul, hors mauvais état général / fin de vie (plus de détails p. 56 / 57).




LPP :

Conditions de prise en charge : se référer au Guide de la prescription et à ameli.fr

► MODÈLES DISPONIBLES



P100™ Housse P.U.

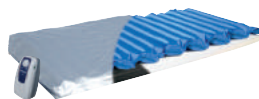

P100™ Housse Ag2+



SAC DE TRANSPORT
DISPONIBLE

MODÈLE	REF			
Surmatelas à air P100™ avec sa housse Intégrale P.U. + unité de contrôle + sous matelas mousse	P1000001	90 x 200 cm	18 cm	Pas de poids mini Poids max : 135 kg
Surmatelas à air P100™ avec sa housse Technologie Argent + unité de contrôle + sous matelas mousse	P1000002	90 x 200 cm	18 cm	Pas de poids mini Poids max : 135 kg
Surmatelas à air P100™ seul	M1000002	90 x 200 cm	13 cm	
Housse intégrale P.U.	8POH15PU			
Housse intégrale Technologie Argent	8POHAGE			
Support Mousse	8PM004NU	90 x 200 cm	5 cm	
Unité de contrôle pour P100™	2880030500			
Gonfleur rapide universel	8PGU0001			
Sac de transport	PSAC01			

• Ce dispositif médical de Classe 1 (matelas) et de Classe 2a (unité de contrôle), est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le **marquage CE**.

• Dans le cadre spécifique de la prise en charge par l'Assurance Maladie, les caractéristiques des poids minimum et maximum peuvent être considérées différemment.



GARANTIE



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Entretien
housses P.U.




Entretien
housses Ag2+




BASSE PRESSION CONTINUE (BPC)

- Technologie visant à favoriser l'immersion « naturelle » du patient afin de maximiser la surface de portance et ainsi de répartir de façon plus harmonieuse les pressions d'interface sur l'ensemble de la surface corporelle, ce qui permet par là même de réduire les pressions exercées en regard des zones à risque d'escarre
- Efficacité reconnue, en préventif comme en curatif
- Pas de poids minimum
- Poids maximum : 135 kg
- Système auto-régulé, sécurité de traitement

BASSE PRESSION CONTINUE

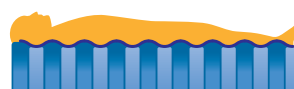

- Immersion du patient et optimisation des points de portance.
- Pressions constatées : 9 à 32 mmHg.
- Pas de poids minimum.

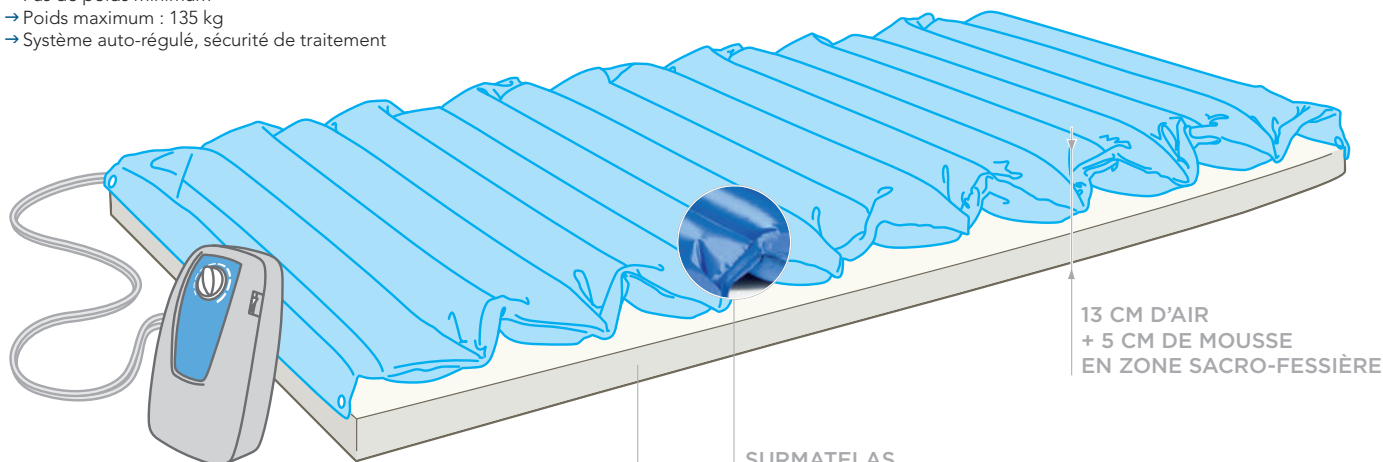

SUPPORT MOUSSE

- 5 cm d'épaisseur.
- Contribue à la bonne immersion et à la sécurité du patient.



13 CM D'AIR
+ 5 CM DE MOUSSE
EN ZONE SACRO-FESSIÈRE

SURMATELAS

- Le surmatelas est composé de 16 cellules anatomiques permettant une répartition optimale de la pression.
- Matériau souple et résistant (nylon enduit), conception longue durée.
- Ergonomie multizones : adaptation à toutes les morphologies et optimisation des points de portance quelle que soit la position du patient (allongé ou buste relevé...).
- Désinfection simple et rapide du support grâce à un système qui se démonte très facilement et entièrement.

UNITÉ DE CONTRÔLE

- Prévention et traitement assurés en Basse Pression Continue dynamique alternée (micro-alternance).
- Pas de poids minimum recommandé.
- **En mode dynamique, « micro-alternance » des points d'appuis au travers des cycles toutes les 6 minutes**
- Gonflage possible avec le patient allongé.
- Réglage de confort disponible sans altérer le principe de Basse Pression Continue. Position « max » adaptée pour faciliter les soins, la toilette, et les transferts.
- Facilité d'utilisation : aucun risque de surgonflage.

POSITION : MIN → 1/2

Prévention escarre,
traitement




POSITION : 1/2 → MAX

Soins, nursing,
transfert, activation
du relèvement buste

ERGONOMIE :

- Adaptée automatiquement à la morphologie du patient.

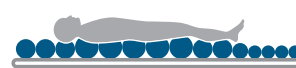

Patient mesurant 153 cm




Patient mesurant 192 cm


OPTIMISATION DES POINTS DE PORTANCE




0°

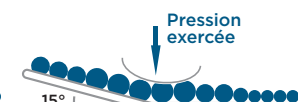

15°

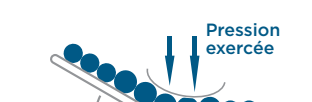

30°

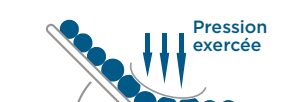

45°

2 VERSIONS DE HOUSSES DISPONIBLES Plus d'infos p. 85



Housse intégrale P.U.

- Enduction de Polyuréthane anallergique sur textile type jersey traité antibactérien, antimicrobien et antifongique.
- Bi-extensible, hyper-respirante afin de diminuer l'effet de macération et imperméabilisée.
- Fermetures éclair protégées d'un rabat pour une meilleure étanchéité du support.



Housse intégrale technologie argent

- Technologie Argent Ag²⁺ : anti-bactérien (y compris MRSA) et antimicrobien.
- Bi-extensible, hyper-respirante afin de diminuer l'effet de macération et imperméabilisée.



ANTIBACTÉRIEN



ANTIMICROBIEN



ANTIFONGIQUE
(sauf Ag²⁺)

Installation facilitée

- Ouverture sur 3 côtés des 2 compartiments

Deux compartiments

- Housse dotée de 2 compartiments permettant de déhousser de manière indépendante le surmatelas ou la mousse support.



Anti-dérappant

- Base anti-dérappante pour un meilleur maintien du support sur le lit.
- Compartiment inférieur également anti-glisse pour une meilleure stabilité du surmatelas à l'intérieur du support.

Fixation interne du surmatelas (4 points)

- Munie de 4 boutons de pression pour fixation et maintien du surmatelas en position dans la housse.

