

ATTITUDE® PURE LIBERTE



ATTITUDE: UNE FAMILLE COMPLETE

Goûtez à la liberté comme jamais auparavant grâce au nouveau handbike Quickie Attitude, pour fauteuil roulant.

Envie de faire de l'exercice ou de sortir des sentiers battus, découvrez les trois visages du handbike Attitude. La version manuelle offre un ensemble léger et simple à manoeuvrer. Si vous pensez avoir besoin d'une assistance électrique en cours de chemin, alors optez pour la version hybride. Avec l'Attitude 100% électrique vous apprécierez la mobilité à pleine puissance.



ATTITUDE Manual

LE SPORTIF





ATTITUDE Hybrid

LE TOUT-TERRAIN



ATTITUDE Power

LE PUISSANT




PRET A PARTIR EN QUELQUES SECONDES

Le mécanisme d'ancrage du handbike Attitude est si astucieux qu'il suffit de quelques secondes pour l'attacher à votre fauteuil roulant... et de le détacher tout aussi rapidement. Idéal pour les personnes dont le temps est précieux.

C'est par un système d'ancrage simple et fiable que le handbike Attitude s'accroche à l'avant de votre fauteuil roulant – sans pièces additionnelles ou câbles autour de vos genoux. Rien ne vient interférer entre votre handbike et le confort que vous attendez de votre fauteuil roulant.

Après avoir détaché le handbike, seuls deux petits axes non contondants (170 g) restent sur votre fauteuil.

- 1 Verrouillez sur les axes d'ancrage.
- 2 Ramenez vers le bas le levier de verrouillage.
- 3 Verrouillez la connexion en tirant le levier rouge.

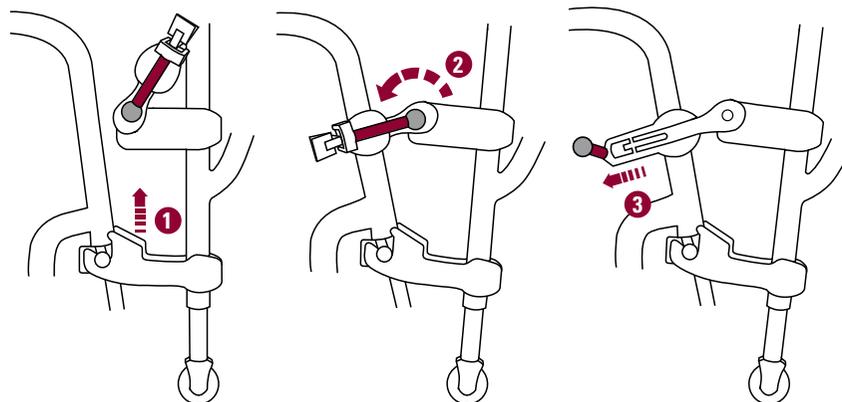

→ Prêt à regarder la vidéo
du système d'ancrage de
l'Attitude!
Voyez plutôt!




PLUS DE LIBERTE

L'autonomie que vous apporte le handbike Attitude ne se limite pas à la conduite. Sa poignée ergonomique et sa fourche permettent de le manoeuvrer facilement, juste d'une seule main. Que ce soit au déverrouillage ou au rangement cela sera toujours sans effort!



DU STYLE A CHAQUE VIRAGE

Un véritable régal pour les yeux! Léger et si stylé le handbike Attitude sera le complément idéal pour votre fauteuil roulant Quickie. Avec ses lignes modernes et aérodynamiques ainsi que sa large palette de couleurs étincelantes, il vous sera facile de le personnaliser à votre image.

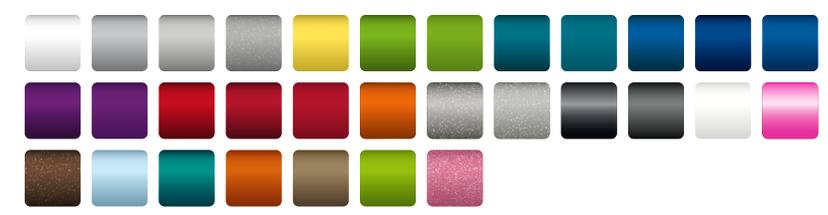

ATTITUDE

MANUAL – LE SPORTIF



Améliorer ses capacités physiques et son endurance tout en prenant du plaisir en roulant, est un des atouts majeurs du handbike Attitude Manual. Roue avant de 20" et dérailleur de 30 vitesses garantissent une performance de conduite exceptionnelle, quel que soit le terrain. Son système de freinage par frein à disque permet le contrôle de sa vitesse tout en douceur. Léger et très maniable, il est le parfait complément de votre fauteuil roulant actif.

Manuel



// DUAL DRIVE (3X10)

Dérailleur 30 vitesses pour tous les terrains. Frein à disque pour un meilleur contrôle de la vitesse.



// GRIP SHIFT

Changement de vitesse par poignée tournante; prise en main et changement de vitesse en une opération simple et rapide.



// SUPPORT GOURDE

Compatible avec toutes les gourdes standards (disponible sur toutes les versions d'handbike Attitude)



// FREIN DE PARKING

Simple à opérer avec fonction verrouillage. De série sur toutes les versions

ATTITUDE

HYBRID – LE TOUT-TERRAIN



L'Attitude Hybrid combine tous les bienfaits d'une activité physique pour la santé et d'une assistance électrique fiable. Ce dispositif électrique peut être engagé à chaque montée délicate ou tout simplement pour vous fournir cette petite pointe de vitesse qui vous manque!

Hybride



// BATTERIE LITHIUM-ION

Batterie de 14,5 Ah pour plus d'autonomie. Témoin de capacité résiduelle sur l'écran du tableau de bord.



// MOTEUR 250 WATT

Moteur puissant de 250 Watt pour atteindre une vitesse jusqu'à 25 km/h (sur terrains privés). Idéal pour les longues distances et terrains abrupts.



// PORTE BAGAGE LATERAL

Compatible avec toutes les sacoches standards. Option disponible pour toutes les versions.




// PEDALIER EN V

La position ergonomique du pédalier empêche tout contact avec votre corps, notamment lors des manoeuvres dans les virages.

ATTITUDE

POWER – LE PUISSANT

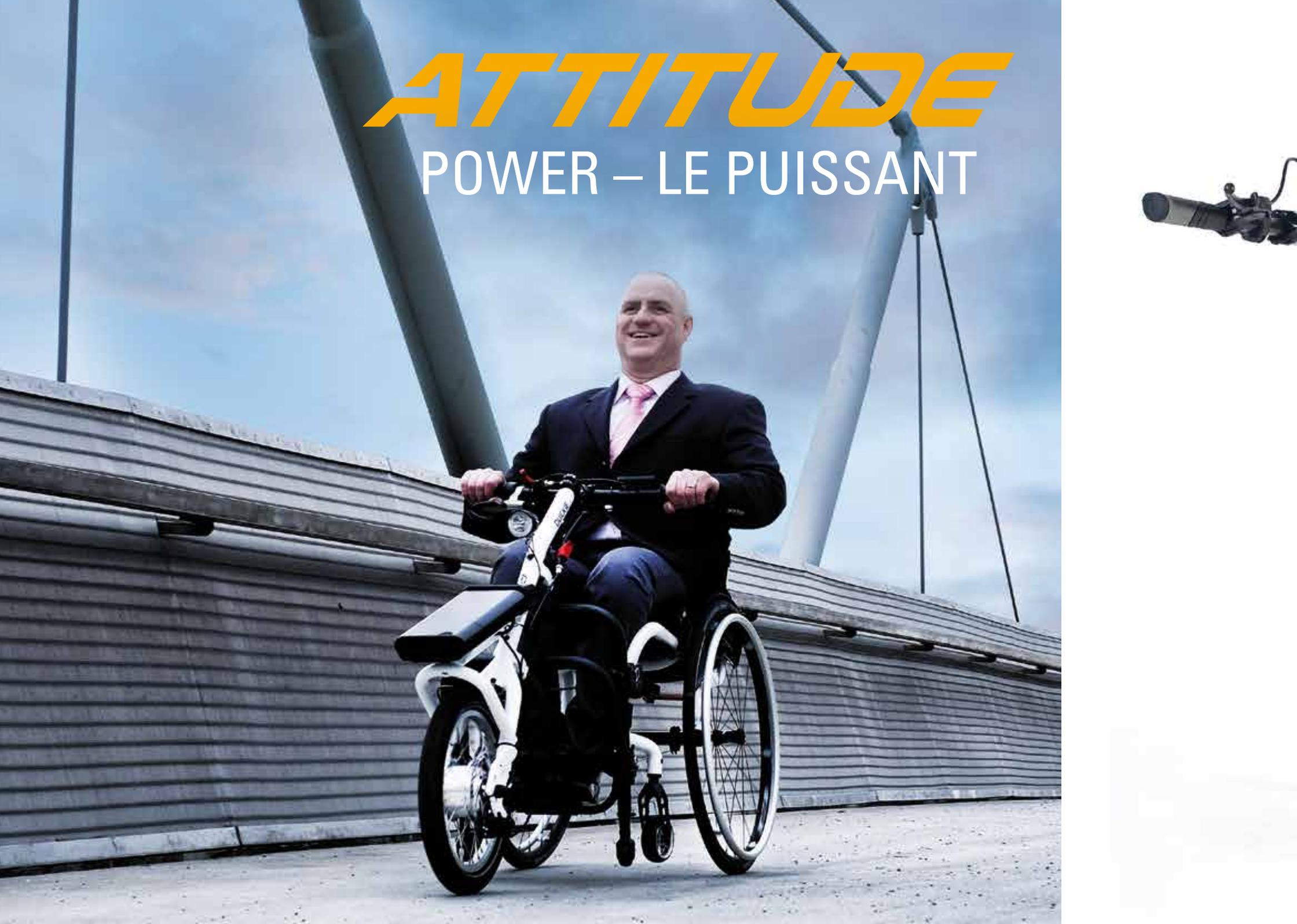

Attitude Power vous assure une propulsion 100 % sans effort pour apprécier le confort et la mobilité à toute puissance. Ne vous préoccupez plus des terrains inclinés ou des longues distances – relaxez-vous et profitez pleinement de votre trajet.

Electrique



// MOTEUR 250 WATT

Puissant moteur 250 watt pour atteindre la vitesse de 23km/h (vitesse maximale autorisée uniquement sur terrains privés).



// GUIDON REGLABLE

Ergonomique et réglable en hauteur. Ecran avec options de conduite.



// BATTERIE LITHIUM-ION

Batterie 9 Ah ou 13,4 Ah. Les batteries Lithium-Ion ne présentent aucun effet mémoire.



// ECLAIRAGE

Lumière avant efficace, directement alimentée par la batterie.

DONNÉES TECHNIQUES

| ATTITUDE | <i>Manual</i> | <i>Hybrid</i> | <i>Power</i> |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
| Poids max. Utilisateur | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Largeur châssis avant (réglage + 2 cm) | 26 – 46 cm | 26 – 46 cm | 26 – 46 cm |
| Poids fixation sur fauteuil | 170 g | 170 g | 170 g |
| Poids total handbike | 14,5 kg | 21,5 kg | 15,3 kg |
| Diamètre roue | 20" | 20" | 16" |
| Vitesse maximale | – | 25 km/h | 6 km/h & 23 km/h |
| Moteur | – | 250 W | 250 W |
| Batterie | – | 14,5 Ah | 9 Ah & 13,4 Ah |
| Poignées changement de vitesse | Trigger / Grip shift | Trigger / Grip shift | – |
| Dérailleur | 8 & 30 vitesses | 10 vitesses | – |
| Largeur pédalier en V | 470 mm | 470 mm | – |
| Longueur pédalier | 170 mm | 170 mm | – |
| Largeur guidon | – | – | 570 mm |
| Frein | Disque (160 mm) | Disque (160 mm) | Disque (160 mm) |
| Frein de parking | oui | oui | oui |
| Marquage CE | oui | oui | oui |



Pour plus d'informations sur les options disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure sur notre site internet. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michaël Faraday
 37170 Chambray-Lès-Tours
 Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
 Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
 E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr