



ZIPPIE VOYAGE

VOYAGER ENSEMBLE
GRANDIR ENSEMBLE



A woman in a dark blue t-shirt and grey pants is pushing a child in a black and red stroller on a bouncy track. The child is wearing a blue shirt and grey pants, and is looking up at the woman with a smile. The background is a colorful, abstract mural of a city skyline.

ZIPPIE
voyage

MODERNE ET SIMPLE D'UTILISATION. LE MEILLEUR POUR BEBE.

La poussette universelle Zippie Voyage combine l'expertise de la poussette Baby Jogger, la polyvalence d'un siège développé pour la croissance des bébés ainsi qu'une très large gamme d'accessoires pour faciliter le quotidien. Résultat: une poussette intuitive, facile à utiliser et sans compromis pour donner le meilleur à votre enfant.



// POIGNEE TELESCOPIQUE

Une seule main suffit pour guider la poussette et régler la hauteur de la poignée.

// ACCES RAPIDE ET SIMPLE AU FREIN DE PARKING

Entre votre bébé, le sac et autres équipements parfois nécessaires, il est important de pouvoir bloquer les roues à une main, grâce à un seul levier.

// PLIAGE BREVETE

Quand plier sa poussette pour la rendre ultra-compacte est aussi simple que ça: simplement tirer sur les poignées!

// CAPOTE DE PROTECTION


Protéger son bébé du soleil est important tout en gardant un oeil sur lui grâce à la fenêtre transparente.

// ESPACE DE RANGEMENT

Peut supporter jusqu'à 7 kg.

// ROUES AVANT SUSPENDUES AVEC BLOCAGE

Quel que soit le terrain, votre bébé est confortablement installé et en sécurité. Le blocage des roues avant permet de garder le cap sur de longues distances.

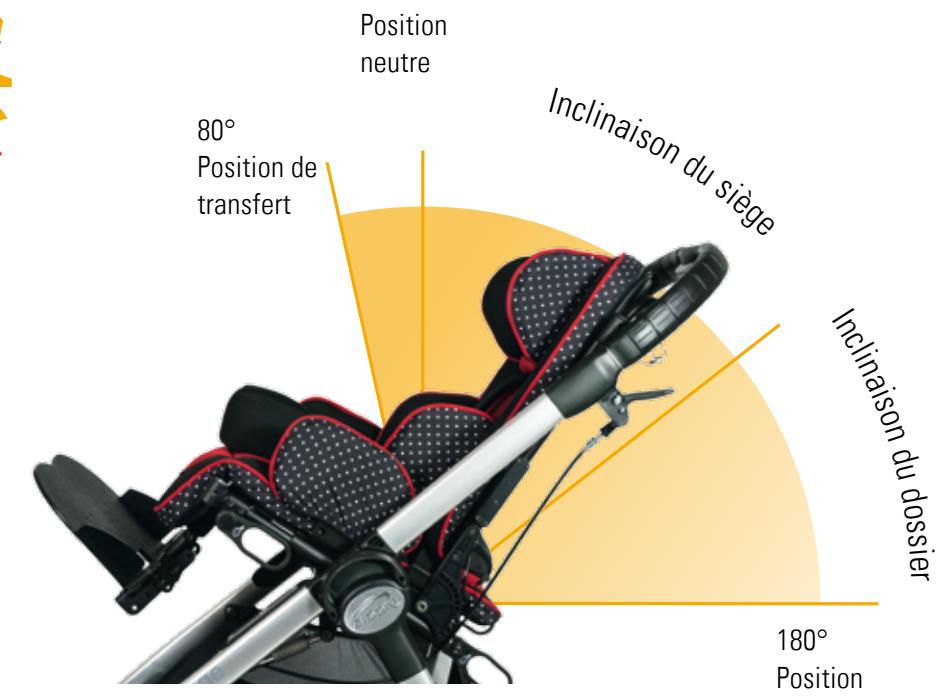

// SIEGE ET DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE

L'inclinaison du siège et du dossier ont plusieurs bénéfices: faciliter l'alimentation/la digestion, améliorer la respiration, ouvrir le champ visuel.

Le levier fixé derrière le dossier, facilement accessible, permet le réglage du siège à 35° et du dossier jusqu'à 180°.

SIEGE ADAPTE A CHAQUE ENFANT

Les années de la petite enfance sont cruciales au bon développement et à la croissance de votre enfant. C'est pourquoi, offrir une assise avec un excellent positionnement fut la condition sinequanone à la conception de la poussette Zippie Voyage.





Approuvé pour l'utilisation en tant que siège dans un véhicule avec un système de retenue homologué pour fauteuil roulant.



// PLIAGE EN UN TOUR DE MAIN

Quand plier sa poussette pour la rendre ultra-compacte est aussi simple que ça: tirer simplement sur les poignées!. Une fois la base pliée et en équilibre, elle est à hauteur de bras pour être transportée.



SI SIMPLE A MANIPULER AU QUOTIDIEN

En un seul mouvement simple et rapide, le siège s'attache et se détache de la poussette. Le transport n'a jamais été aussi simple, même dans une petite voiture.



// DE FACE OU DE DOS

Face à vous, l'interaction avec votre bébé est facilitée. A l'inverse, face à la route, il peut explorer et profiter de son environnement. La rotation du siège s'effectue très facilement.

// SYSTEME DE VERROUILLAGE „SLIDE-N-LOCK“


Retirer et repositionner ne demande aucun effort. Grâce aux rails, vous glissez le siège jusqu'au „click“ de verrouillage et vous êtes assuré que votre enfant sera confortablement installé et en sécurité.





LA VIE TOUTE EN COULEURS!

Personnalisez le design moderne de l'habillage à pois de votre poussette Zippie Voyage parmi une sélection de coloris.

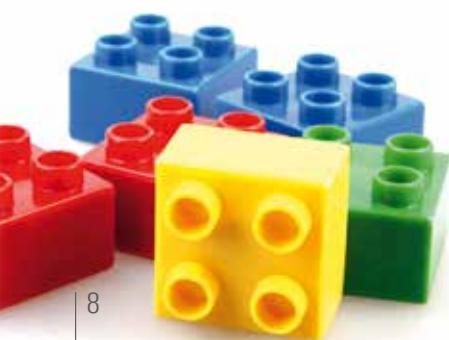



// CHASSIS JCM

Le siège de la poussette Zippie Voyage peut être installé sur une base JCM, facilitant les échanges avec d'autres enfants et les activités péri scolaires. Uniquement sur demande.





ACCESSOIRES POUR LA POUSSETTE ZIPPIE VOYAGE

La poussette Zippie Voyage propose une large gamme d'accessoires pour faciliter votre quotidien, vous rendre la vie plus simple et profiter pleinement des moments de bonheur en famille.



// PLATEFORME

La plateforme est l'accessoire idéal pour permettre à un autre enfant d'être plus proche du vôtre. Mise en place simple et munie d'un anti-dérapant pour la sécurité du second enfant.



// SUPPORT BOUTEILLE

Pratique pour une bouteille d'eau, une gourde ou un biberon. Le support s'incline en fonction du terrain.



// BARRE DE MAINTIEN

Cette barre assure maintien et sécurité à votre bébé durant toute la promenade.



// TABLETTE

Disponible en gris clair ou en plexiglass transparent. Réglable en profondeur et en hauteur.



// CROCHET

Utile pour accrocher un sac ou un cartable, il se fixe grâce à un velcro et évite ainsi de tourner.



// SUPPORT DE RANGEMENT RIGIDE

Située sous le siège, cette plaque rigide peut être utilisée pour la mise en place d'un respirateur. poids maximum supporté 23 kg



// PLATEFORME AVANT

Installée à l'avant du châssis pour le transport d'objets.



// CALE PIEDS

Montés sur la palette pour maintenir les pieds dans une position voulue.

DONNEES TECHNIQUES

Zippie Voyage // Poussette			
Poids max. Utilisateur:	34 kg	Largeur mini. pour 1/2 tour:	110 cm
Largeur d'assise:	24 – 30 cm, avec insert jusqu'à 15,5 cm (excluant habillage)	Pente max. de sécurité:	9° (pour l'utilisation du frein de parking)
Profondeur d'assise:	20 – 34 cm (excluant habillage)	Roue arrière:	12,5" pneumatique avec insert anti-crevaison
Longueur de jambes:	15,5 – 31 cm	Roue avant:	7"
Hauteur de dossier:	41 – 61 cm (excluant habillage)	Poids de l'assise:	6 kg
Plage inclinaison de dossier:	100° (80° à 180°)	Poids de la base:	12 kg
Inclinaison d'assise:	35° (-5° à 30°)	Eléments amovibles:	Siège et roues - pour transport uniquement
Hauteur d'assise:	59 – 62 - 66 cm	Coloris:	bleu, rouge, beige ou gris
Largeur totale:	63 cm	Matériaux châssis:	Aluminium
Longueur totale:	110 cm	Crash test:	en conformité selon norme ISO 7176-19 (2008) - Annexe A
Hauteur totale:	98 – 105 cm	Transport sans utilisateur:	Fixer le produit de façon sûre dans un véhicule
Longueur pliée:	80 cm	Usage prévu et environnement:	Pour enfant à mobilité réduite: usage intérieur/extérieur, manipulation par une tierce personne. Catégorie: Classe I
Hauteur pliée:	37 cm		

Pour plus d'information sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet.
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

