



Q700

L'EXPÉRIENCE ULTIME.



Q700 M




Q700-UP M

L' EXPÉRIENCE ULTIME.



Q700 M

La marque QUICKIE propose la gamme la plus complète de fauteuils roulants électriques premiums, novateurs et à la pointe de la technologie conçus pour répondre aussi bien à vos besoins cliniques qu'à votre style de vie.

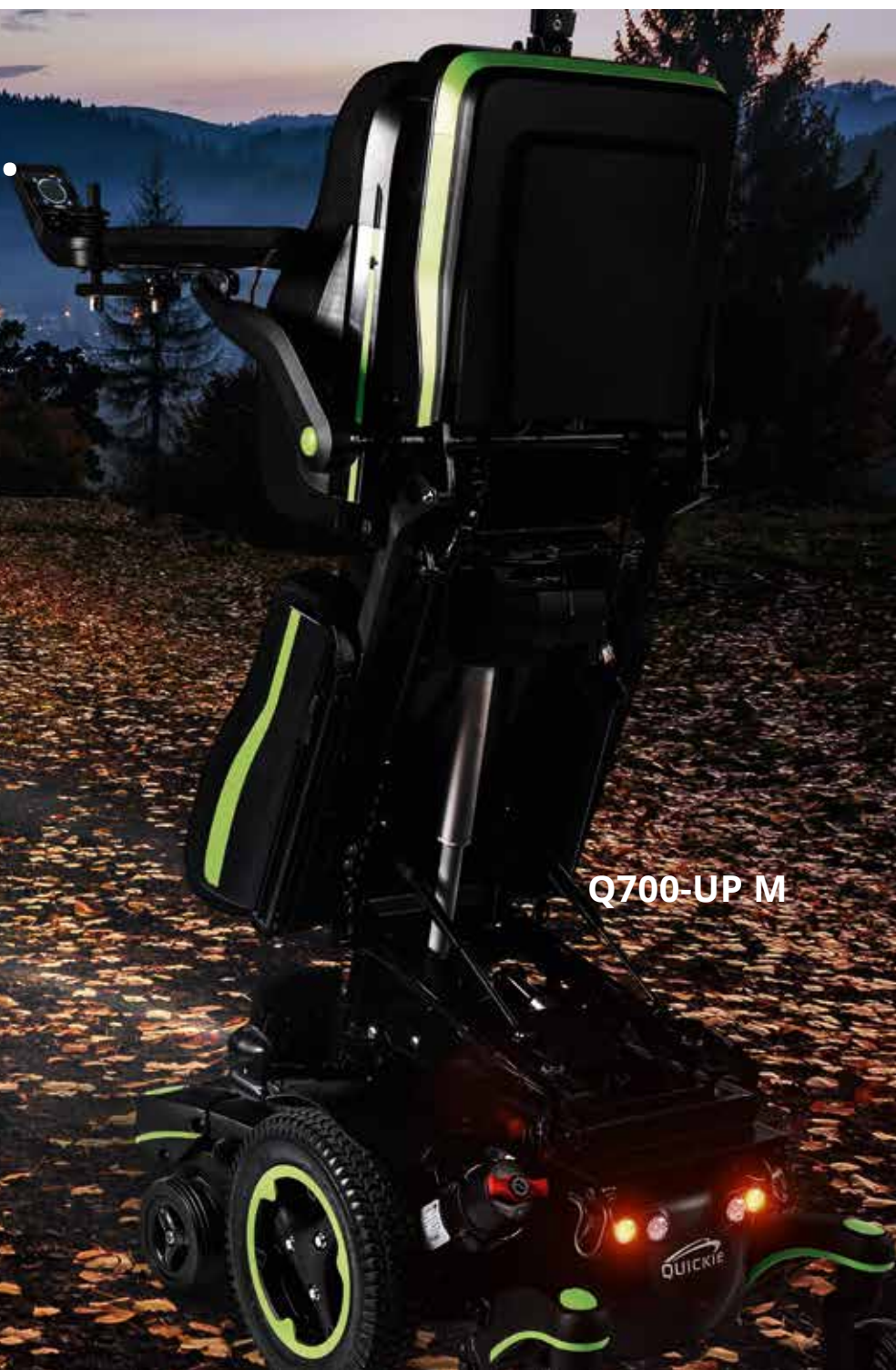

Q700-UP M

Fort de nombreuses années d'expérience et de leadership dans le domaine des bases motrices, des systèmes d'assise et des électroniques évolutives, le QUICKIE Q700 M et Q700-UP M combinent les meilleures performances et technologies pour vous faire vivre l'expérience ultime !

BASE HAUTE PERFORMANCE

Technologie des **roues motrices centrales** la plus avancée avec la puissance et les performances de conduite nécessaires pour vous emmener où vous voulez. Impressionnante manoeuvrabilité en intérieur combinée aux suspensions **SpiderTrac™ 2.0** et au système anti-tangage breveté pour profiter de l'extérieur. Vous bénéficiez à la fois de **puissance** décuplée et de **douceur extrême** dans les franchissements et changements de terrain.

ASSISE INTELLIGENTE

S'adaptant aux positions naturelles de votre corps, l'**assise biomécanique SEDEO ERGO** vous assure un **confort optimal**. Jamais vous ne perdez le contact avec vos repose-pieds, l'appui-tête ou encore une commande au menton pendant les phases de changement de positions d'assise - vous conservez toujours une bonne posture quelle que soit votre position: assis, relax, couché, lift et dans toutes les positions intermédiaires. Accédez à **6 positions d'assise** programmables au **simple toucher d'un bouton**.

COMMANDES INNOVANTES

Connectez-vous avec votre environnement, vos téléphones, ordinateurs et autres appareils électroniques grâce à un choix de commandes intuitives, faciles à utiliser et à la pointe de la technologie, comme l' **Infrarouge** et le **Bluetooth**.

STYLE ÉLÉGANT

Un **design épuré**, minimaliste, mis en valeur par un châssis noir et quelques touches de couleurs vives. A choisir parmi 6 coloris, pour un fauteuil qui vous ressemble.






ROUES MOTRICES CENTRALES PERFORMANCE, AFFIRMÉE.

La base motrice 6 roues Q700 redéfinit les règles de la technologie des fauteuils roulants électriques, intérieur et extérieur. Voyagez encore plus loin avec ses performances de conduite hors normes et sentez-vous en sécurité, même sur les terrains les plus difficiles, grâce à la technologie SpiderTrac 2.0. Celle-ci se caractérise par un mouvement indépendant des 6 roues, pour une traction et une stabilité supérieures. Il faut l'essayer pour le croire!

VOYAGEZ EN TOUTE CONFIANCE

Moteurs 4 pôles performants et fiables, motorisation 6 ou 10 km/h, batteries 60 Ah ou 80 Ah.

Avec le Q700 M, sérénité est le maître-mot!

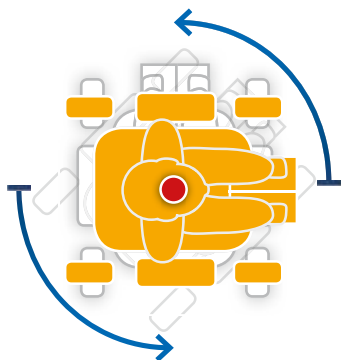

CONÇU POUR L'INTÉRIEUR

En tournant sur son propre axe, vous profitez d'une conduite intuitive et d'une excellente manoeuvrabilité dans les espaces exigus avec sa base étroite (630 mm) et son rayon de giration réduit 630 mm. De plus, vous vous glissez facilement sous les tables et accédez aux véhicules aménagés avec une hauteur d'assise à partir de 430 mm.


BÂTI POUR DES PERFORMANCES EXTÉRIURES

Grâce à sa suspension révolutionnaire SpiderTrac 2.0, vous avez la garantie d'une conduite souple et plus réactive et franchissez jusqu'à 100 mm. Avec les mouvements indépendants des six roues, l'articulation des roues avant et arrière permet au **Q700 M** de monter et descendre des obstacles tout en conservant les **6 roues en contact avec le sol** – même sur une pente ascendante de 10 degrés.


SPIDERTRAC 2.0
S U S P E N S I O N

VOUS GARDEZ LE CAP AVEC LE MODULE GYROSCOPE

L'option de **contrôle de trajectoire gyro** détecte et corrige automatiquement le moindre écart par rapport à votre direction. En vous aidant à **corriger votre trajectoire**, vous réduisez le nombre d'actions physiques ou cognitives nécessaires pour garder le cap – vous bénéficiez alors d'une **conduite moins éprouvante** (tout particulièrement dans le cas d'une conduite avec une commande au menton ou occipitale).

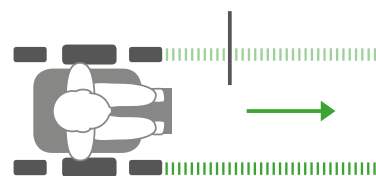

AVEC MODULE GYRO

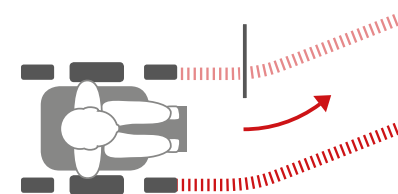

SANS MODULE GYRO



SEDEO ERGO

ASSISE INTELLIGENTE

Une assise ergonomique de première classe spécialement conçue pour s'adapter à votre corps. L'assise SEDEO ERGO offre un positionnement sans égal grâce à son système unique breveté de Repositionnement Biométrique. Plus efficace que tout autre système d'assise, chaque position est indépendante et accessible au gré de vos besoins et de vos envies.

SE TRANSFÉRER

Le coussin d'assise est constitué de 3 éléments. Les deux coussinets latéraux s'escamotent et se retirent pour assurer des transferts dans de bonnes conditions. La partie centrale peut également se substituer à un coussin JAY.

ASSISE RÉGLABLE

L'appui-tête ergonomique (1) s'ajuste facilement et se retire. Toutes les largeurs et profondeurs d'assise (2) sont réglables en continu avec un seul outil. La largeur du siège et du dossier (3) s'ajuste indépendamment l'un de l'autre. Et pour optimiser votre positionnement les accoudoirs sont dotés d'un réglage en angle et en hauteur (4).

RAPPELS DE CHANGEMENT DE POSITION

Une technologie de pointe qui vous rappelle quand changer de position d'assise et ainsi soulager vos points de pression. Un journal de données peut être consulté par l'équipe médicale pour un meilleur suivi.

ASSISE PROGRAMMABLE

Le système d'assise SEDEO ERGO permet de programmer et de mémoriser jusqu'à 6 positions d'assise selon vos besoins. Que vous souhaitiez vous allonger, cuisiner ou regarder la télévision – chaque position peut-être entièrement personnalisée.

REPOSE-PIEDS AU SOL

Les palettes descendant jusqu'au sol, vous pouvez effectuer des transferts debout avec votre Q700-UP M.



REPOSITIONNEMENT BIOMETRIQUE

Sortir d'une position inclinée ou revenir à sa position assise initiale nécessite souvent l'usage de la fonction de la bascule d'assise. Avec le brevet de Repositionnement Biométrique, de la position inclinée à assise, le système SEDEO ERGO passe par une position intermédiaire de bascule, utilisant la gravité pour réaligner votre bassin en un seul mouvement fluide et sans effort.

DOSSIER A COMPENSATION SINUSOÏDALE

175° d'inclinaison de dossier avec variation de la vitesse de compensation sur 180 mm. Ce système unique et breveté supprime tout effet de cisaillement, maintient le positionnement de la tête et du tronc...sur toute la phase d'inclinaison.



Q700 M

ASSISE **SEDEO ERGO**

Osez de nouvelles expériences avec le **Q700 M**
SEDEO ERGO. Combinant tous les avantages de
l'assise **SEDEO ERGO**, vous voyagez à votre rythme
en position liftée grâce à la fonction **C-Me**.



ELEVEZ-VOUS ET CONDUISEZ AVEC C-ME

Regardez et profitez de ce qui vous entoure avec une nouvelle perspective. Avec la fonction **C-Me**, vous pouvez **conduire votre fauteuil roulant avec le siège complètement relevé** (jusqu'à 30 cm) et à une **vitesse maximale de 5 km/h**. Vous bénéficiez d'une plus grande autonomie dans vos activités quotidiennes et discutez avec vos amis à la même hauteur tout en roulant. Élevez-vous et redescendez en appuyant sur un simple bouton sans avoir à vous arrêter.

Lifté, prêt, partez !



BASCULE D'ASSISE



RELAX



LIFT (C-ME)



COUCHÉ

POSITIONS MÉMORISÉES

Tirez le meilleur parti des fonctions électriques de votre **Q700 M** avec la **Mémorisation de Positions d'Assise**. Programmez jusqu'à 4* positions d'assise indépendamment l'une de l'autre. Pour ce faire, déterminez la position souhaitée, appuyez sur le bouton de mémorisation et déplacez le joystick vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La position est enregistrée.

*4 positions programmées par défaut et 2 positions libres.

Q700-UP M

ASSISE **SEDEO ERGO UP**

Découvrez l'assise SEDEO ERGO UP, la réponse aux besoins cliniques, fonctionnels et sociaux de tous ceux qui mènent une vie active. Combinant tous les avantages du système d'assise SEDEO ERGO avec la possibilité de se tenir debout quand vous le désirez.



LES BÉNÉFICES DE LA VERTICALISATION

L'angle de verticalisation à 85° de l'assise SEDEO ERGO UP apporte de nombreux avantages cliniques, fonctionnels et sociaux.


- Soulage de manière régulière la pression exercée sur les surfaces les plus exposées en position assise. La verticalisation réduit les risques d'escarre et peut s'inscrire dans un programme de prévention.
- **Bénéfices psyco-sociaux** en augmentant votre niveau de participation au sein de votre cercle social, en accédant à votre environnement en toute autonomie ...
- **Améliore la capacité et l'amplitude de mouvements** et réduit le risque de contractures
- **Favorise les fonctions des organes vitaux**: augmente la capacité pulmonaire entraînant une meilleure oxygénation du sang, facilite la respiration, améliore la fonction intestinale et vésicale, ainsi que la digestion.
- **Améliore la santé des os**: en réduisant la perte de densité minérale osseuse, en retardant les déformations squelettiques
- **Réduit le tonus musculaire anormal** et la spasticité excessive

ANGLE DU REPOSE-JAMBES


En position assise, le nouveau repose-jambes central permet un véritable angle des genoux à 90°. L'appui sous-rotulien est à la fois ergonomique et réglable en profondeur et en hauteur.



COUCHÉ

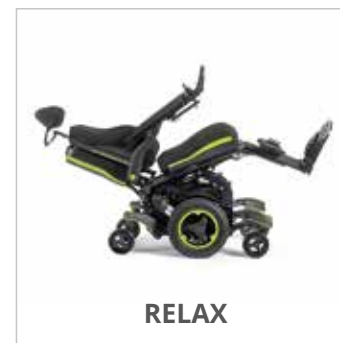


RELAX

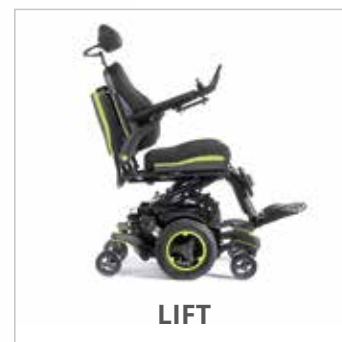


LIFT



ASSIS

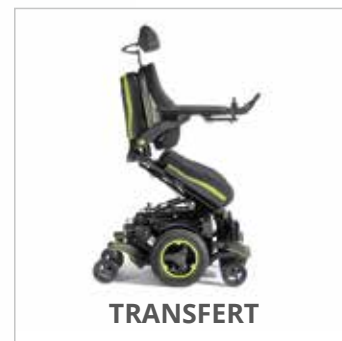

TRANSFERT

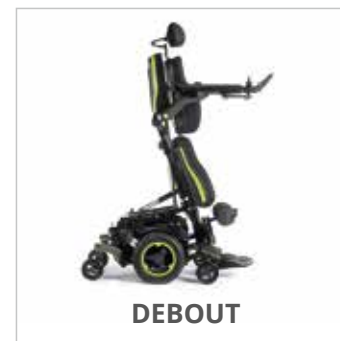

DEBOUT

POSITIONS MÉMORISÉES

Enregistrez jusqu'à 6 positions d'assise avec la fonction de Mémorisation des Positions du Q700-UP M.

JAY® & WHITMYER®

LE POSITIONNEMENT

Une large gamme d'appuis-tête WHITMYER, de coussins et de dossiers JAY disponibles avec les assises SEDEO ERGO et SEDEO ERGO UP pour répondre aux besoins cliniques de chaque Utilisateur et garantir le meilleur positionnement possible.



COUSSINS & DOSSIERS JAY

Conçus pour la stabilité du bassin, la protection de la peau et le confort. Les coussins et dossiers JAY sont disponibles en diverses tailles, formes, contours, matières, degrés de prévention... pour couvrir tous les besoins.



APPUIS-TÊTE WHITMYER

Une gamme complète pour le positionnement des cervicales et de la tête. Des solutions répondant aux besoins les plus simples aux plus complexes, grâce à une variété de coussinets, de barres de montage et d'accessoires.





SWITCH-IT REMOTE SEATING APP

L'application* Switch-It Remote Seating affiche les angles d'inclinaison du fauteuil et suit la fréquence et la durée des changements de position d'assise. Le soulagement des points de pression ayant pour objectif d'améliorer l'état de santé global de l'Utilisateur.

- La technologie Bluetooth se connecte de façon transparente à votre fauteuil
- Création de protocoles de changement de position: bascule d'assise, inclinaison de dossier, élévation des jambes
- Possibilité de partager les rapports de statistiques avec l'équipe soignante par email
- Aide à la mise en place d'un programme de soulagements des points de pression
- Envoi de notifications permettant de rappeler à l'Utilisateur de changer sa position d'assise



* De série avec l'option CTRL+ 5 Contacts R-Net.

A person is shown from the chest up, wearing a blue and black jacket. They are holding a black handheld device with a screen and buttons. The device has a small screen displaying a graph and some text. The person's face is partially visible on the left side of the frame. The background is dark and out of focus.

CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS

Soyez le maître de votre environnement avec les fauteuils de la **série Q700 M** et son électronique intégrant une technologie de pointe. Non seulement vous commandez votre **Q700 M** selon vos souhaits, mais aussi vos appareils électroménagers, informatiques et de communication.

R-NET

TECHNOLOGIE DE POINTE

Chaque **Q700 M** est équipé de la technologie **R-Net** pour une expérience de conduite unique. Différents manipulateurs pour répondre à divers besoins, tous simples d'emploi et intuitifs. Tel que le boîtier, de série, **R-Net LCD** doté d'un écran couleur pour un visuel clair et précis, ou pour rester connecté à votre environnement le modèle **R-Net Advanced** aux multiples fonctionnalités intégrées.

INFRAROUGE

Prenez le contrôle de votre environnement en utilisant la fonctionnalité **Infrarouge intégrée**. Contrôlez simplement par votre joystick, vos appareils, tels que téléviseur, DVD, station d'accueil ... ou encore allumez et éteignez les lumières de votre intérieur.

BLUETOOTH & IDRIVE

Le manipulateur **R-Net Advanced** intègre à la fois l'**Infrarouge** et le **Bluetooth**. Ainsi vous pouvez contrôler vos équipements informatiques. L'électronique R-Net peut se connecter jusqu'à quatre appareils, deux appareils PC, MAC, Android et deux appareils IOS, iPhone, iPad et dispose d'une fonction d'émulation de souris.

ASSIGNATION DE BOUTONS BREVETÉE

Changez la fonction de n'importe quel bouton par celle de votre choix, grâce à la technologie d'assignation brevetée QUICKIE. De plus, vous pouvez attribuer une **seconde fonction** (appui long) à un même bouton, vous donnant un accès plus rapide, plus simple et plus fluide aux fonctions que vous utilisez régulièrement sans avoir à utiliser votre joystick.



Manipulateur
R-Net Advanced

SWITCH-IT

COMMANDES INNOVANTES

Activez confortablement vos 5 positions d'assise avec le **boîtier Ctrl+5** – une parfaite combinaison avec la **Mémorisation des Positions d'Assise**. Il vous permet d'accéder directement à la fonction souhaitée sur simple pression d'un bouton.

COMMANDES DE CONDUITE ALTERNATIVES

Si vous ne pouvez pas conduire votre fauteuil avec un joystick traditionnel, un large choix de **commandes spéciales** vous permettent de profiter pleinement des capacités et des avantages de votre fauteuil. Ci-dessous trois exemples.



1 - Commande **occipitale Dual Pro**: contacteurs sensitifs et à pression pour une conduite proportionnelle, coussinets latéraux ronds ou ovales (au choix)



2 - Commande **proportionnelle manuelle MicroPilot**: joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°. Commande fixée sur plateau appui-palme.



3 - Commande au **menton Mo-Vis Allround**: joystick compact. Supports de fixation possibles: plastron, bras manuel ou électrique escamotable.



LINK-IT

SYSTÈME DE MONTAGE

Discrétion, simplicité et personnalisation. Ce nouveau système Link-It facilite le montage de **contacteurs additionnels** ou de **commandes spéciales**.

Grâce à ses **combinaisons infinies** constituées de modules et de tiges, Link-It répond à tous les besoins cliniques, des plus simples au plus complexes. Non seulement, positionner les éléments Link-It est un jeu d'enfant, ils sont également très discrets et modernes. L'ajout de commandes et contacteurs ne compromet en rien le design élégant de votre fauteuil roulant.

Ainsi, que ce soit un manipulateur complémentaire à ajouter sur l'accoudoir, un bouton poussoir ou un contacteur sur le dossier, just link it!.





QUICKIE

RAFFINEMENT ET **STYLE**

Avec la série **Q700 M**, le style prend un niveau supérieur. Avec son **châssis noir mat**, **aucun câble ni composant visibles**, le tout combiné à une sellerie taillée sur mesure, nous obtenons un design élégant et contemporain.

Le Q700 M et Q700-Up M proposent un choix de 6 couleurs modernes d'inserts qui complètent parfaitement la base noire mate. Désireux de changer de couleur? Remplacez simplement les inserts de couleur au gré de vos envies.



DONNÉES TECHNIQUES

	Q700 M	Q700-UP M		Q700 M & Q700-UP M
Poids max. Utilisateur:	160 kg	120 kg	Largeur mini pour 1/2 tour:	1000 mm
Largeur d'assise:	400 – 560 mm	400 – 500 mm	Pente max. sécurité:	10°
Profondeur d'assise:	400 – 560 mm	400 – 540 mm	Franchissement max.:	100 mm
Hauteur d'assise:	430 – 480 mm	450 – 480 mm	Diamètre roues:	roues motrices: 14"; roues avant/arrière: 6"
Hauteur de dossier:	510 mm – 610 mm	510 mm – 610 mm	Coloris inserts	rouge, bleu, vert, orange, blanc, noir
Angle do dossier:	85° à 175° (électrique)	85° à 175° (électrique)	Autonomie Max. (selon ISO 7176-4)	40 km avec batteries 80 Ah & moteurs 6 km/h (peut varier selon la configuration du fauteuil)
Largeur totale:	630 mm	630 mm	Poids fauteuil:	à partir de 160 kg (sans batteries)
Longueur totale:	1070 mm	1070 mm	Crash test:	Homologué comme pouvant être utilisé comme siège face à la route dans les véhicules à moteur (ISO 7176-19). Fixation: 4 points de fixation au fauteuil avec 2 double sangles à l'arrière & 2 sangles simples à l'avant. Aucune ceinture de sécurité ancrée autorisée. La facilité d'accès et de maniabilité dans un véhicule dépend de la taille du fauteuil roulant.
Hauteur totale:	1100 mm	1100 mm		
Fonctions d'assise mémorisées:	Couché, assis, relax, bascule d'assise, lift, libre	Debout, assis, transfert, couché, lift, relax, bascule d'assise, libre	Transport à vide:	S'assurer de la bonne fixation du fauteuil dans le véhicule (ex. voiture ou avion)
Vitesse max.:	6 km/h (2x500 W - 4 poles) 10 km/h (2x450 W - 4 poles)	6 km/h (2x500 W - 4 poles) 10 km/h (2x450 W - 4 poles)	Usage prévu et environnement:	Pour personne à mobilité réduite; auto-propulsion ou pousser par une tierce personne. Usage mixte: intérieur/extérieur.
Batteries:	60 Ah - 80 Ah	80 Ah	Marquage CE:	Catégorie: classe B Oui
Electronique:	R-Net	R-Net		



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0)2 47 55 44 00
Fax: +33 (0)2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr



Pour plus d'informations, sur les fonctions, options et accessoires, veuillez vous référer à la fiche de mesure. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données techniques de ces produits sans préavis.