


ACCESSOIRE DE MOBILISATION COUCHÉE

RÉFÉRENCE
SIS30000NC

Le Slide Medical System® est une aide technique efficace pour latéraliser et transférer les patients en surcharge pondérale.

Dans de bonnes conditions d'utilisations, il évitera aux soignants de s'exposer aux accidents de travail.

Adaptez la hauteur du lit à votre taille afin de travailler dans de bonnes conditions. Pour bien fonctionner, le Slide Medical System® doit toujours être placé sous les points d'appuis du patient (fessiers et dos) ■

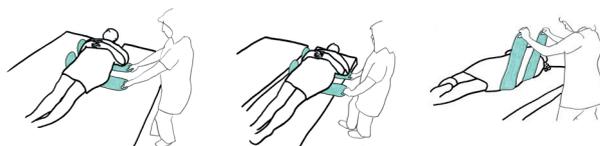

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

LES **+** PRODUIT


Prévention des TMS.

Permet une **latéralisation et le transfert de patients en surcharge pondérale.**

Transferts mortuaires.



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE - FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

FICHE TECHNIQUE

REF	Description	Dimensions
SIS30000NC	La paire	68 x 20 x 25 cm



PRODUIT :	SLIDE MEDICAL SYSTEM®
DESCRIPTION COURTE :	ACCESSOIRE DE MOBILISATION COUCHÉE
RÉFÉRENCE :	SIS30000NC
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	3,50 KG LA PAIRE
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	KMC
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux plans horizontaux, d'un sujet en surcharge pondérale présentant une incapacité de bouger. Contrôlez visuellement le produit avant son usage. Il ne doit pas être fendu ou coupé. Toujours placer le Slide Medical System® sous les points d'appuis du patient (fessiers et dos).
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser un matériel détérioré.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
PIÈCES D'USURE :	Palette coulissante amovible.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	HDPE.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 paire de Slide Medical System ® et sa fiche technique.
COULEUR :	Translucide.