

BAIGNOIRE À HAUTEUR ET INCLINAISON RÉGLABLES

Parker®



Dotée d'une porte latérale pivotante, la baignoire Parker® est conçue pour permettre des transferts autonomes ou assistés dans et hors de la baignoire. Parker est réglable en hauteur et passe de la position assise à la position allongée, ce qui permet au soignant et au résident de choisir leur position préférée pour améliorer l'expérience du bain.

MOBILITHÈQUE D'ARJO



A

B

C

D

Transferts autonomes et assistés

Réglable en hauteur, Parker peut être mise en position assise ou allongée. Sa porte latérale pivotante est conçue pour faciliter l'accès aux patients et aux résidents ayant des niveaux de mobilité de A à C sans qu'il soit nécessaire d'utiliser en plus un lève-personne de bain. Parker convient également aux résidents ayant un niveau de mobilité D lorsqu'elle est utilisée avec un lève-personne sur rail.

Plusieurs niveaux de protection anti-brûlure

Sont inclus un affichage de la température, des mitigeurs régulés en température et en pression et un arrêt automatique de l'eau chaude lorsque la température dépasse les valeurs de sécurité.

Accroître les bienfaits du bain

Parker offre diverses options pour le bain, notamment une immersion progressive, l'Air Spa™ et les fontions Sound & Vision™, pour favoriser la relaxation et profiter au maximum des bienfaits du bain.

Principales caractéristiques

ACCÈS PAR ENTRÉE LATÉRALE

S'intègre à un large éventail d'aides au transfert pour faciliter les transferts autonomes et assistés des personnes à mobilité réduite.

HAUTEUR ET INCLINAISON RÉGLABLES

Permet au soignant d'atteindre la hauteur de travail souhaitée sans compromettre le confort des résidents.

PLUSIEURS FONCTIONS DE PROTECTION ANTI-BRÛLURE

DOUCHETTE AVEC GÂCHETTE VERROUILLABLE

Permet au soignant d'activer la douche lorsqu'il est proche du résident.

REPOSE-TÊTE ET COUSSIN POUR LE DOS (EN OPTION)

Pour plus de confort.

SYSTÈME INTÉGRÉ DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION (EN OPTION)

AIR SPA (EN OPTION)

Avec neuf jets à vitesse contrôlée.

REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

Remplit automatiquement la baignoire jusqu'à un niveau d'eau pré-réglé.

SOUND & VISION (EN OPTION)

Pour une expérience multisensorielle améliorée.

GÉNÉRALITÉS	
Capacité maximale admissible (CMA) (patient + eau)	300 kg
Poids maximal du patient	210 kg
Poids total de la baignoire	126 kg
Longueur totale en position verticale	1 855 mm
Longueur totale en position allongée	1 960 mm
Largeur totale	750 mm
Hauteur de la porte (baignoire en position haute et pédiluve en position basse)	2 510 mm
Hauteur du siège à la position la plus basse	565 mm
Hauteur du siège à la position la plus haute	685 mm
Consommation d'eau (volume du pédiluve prérempli/ niveau de remplissage automatique)	96 litres
Consommation d'eau jusqu'au niveau de débordement	230 litres
Durée de remplissage à une pression dynamique de 3 bar (préremplissage)	1,7 min
Temps de vidange à partir du niveau de remplissage automatique	3 min
Catégorie IP conforme à la norme CEI 60529	IP X4
IP des télécommandes	IP X7
Pression statique maximale de l'eau	6 bars (600 kPa)
Pression de service minimale (varie en fonction du pays)	1 bar (100 kPa)


Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arjo.fr

- ### CARACTÉRISTIQUES STANDARD
- Affichage de la température de l'eau
 - Plusieurs fonctions de protection anti-brûlure
 - Douchette avec gâchette verrouillable
 - Remplissage automatique
 - Trop-plein
 - Fonction de verrouillage du panneau de commande
 - Basculement et abaissement d'urgence
 - Arrêt d'urgence

- ### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
- Système de nettoyage et désinfection intégré
 - Thérapie Air Spa
 - Thérapie Sound & Vision
 - Kit de rinçage à l'eau chaude
 - Pourtour de baignoire bleu
- ### ACCESSOIRES
- Repose-pieds, appuie-tête et coussins pour le dos et le siège
 - Comfort Pack : Coussin de confort, peignoir éponge, peignoir maille

ESPACE REQUIS

La zone bleue indique la zone de travail nécessaire pour faciliter le transfert et les activités d'hygiène pour les résidents ayant un niveau de mobilité de A à C tout en offrant un accès adéquat au résident, à l'équipement et au personnel soignant. Un espace supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour faciliter le transfert d'un résident de niveau de mobilité D à l'aide d'un lève-personne sur rail.

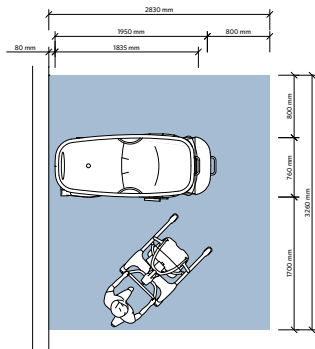

©Arjo, avril 2024. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ARJO.A00015.2.0.FR.FR

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo France SAS • 2, Avenue Alcide de Gasperi • CS 70133 • 59436 Roncq Cedex • France • +33 03 20 28 13 13
Arjo Switzerland AG • Fabrikstrasse 8 • 4614 Hägendorf • Suisse • +41 (0) 61 337 97 77
Arjo Belgium sa • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • Belgique • +32 (0) 53 60 73 80

arjo